


— Modulare Gerätegeneration

modulo 200

Frequenztherapie

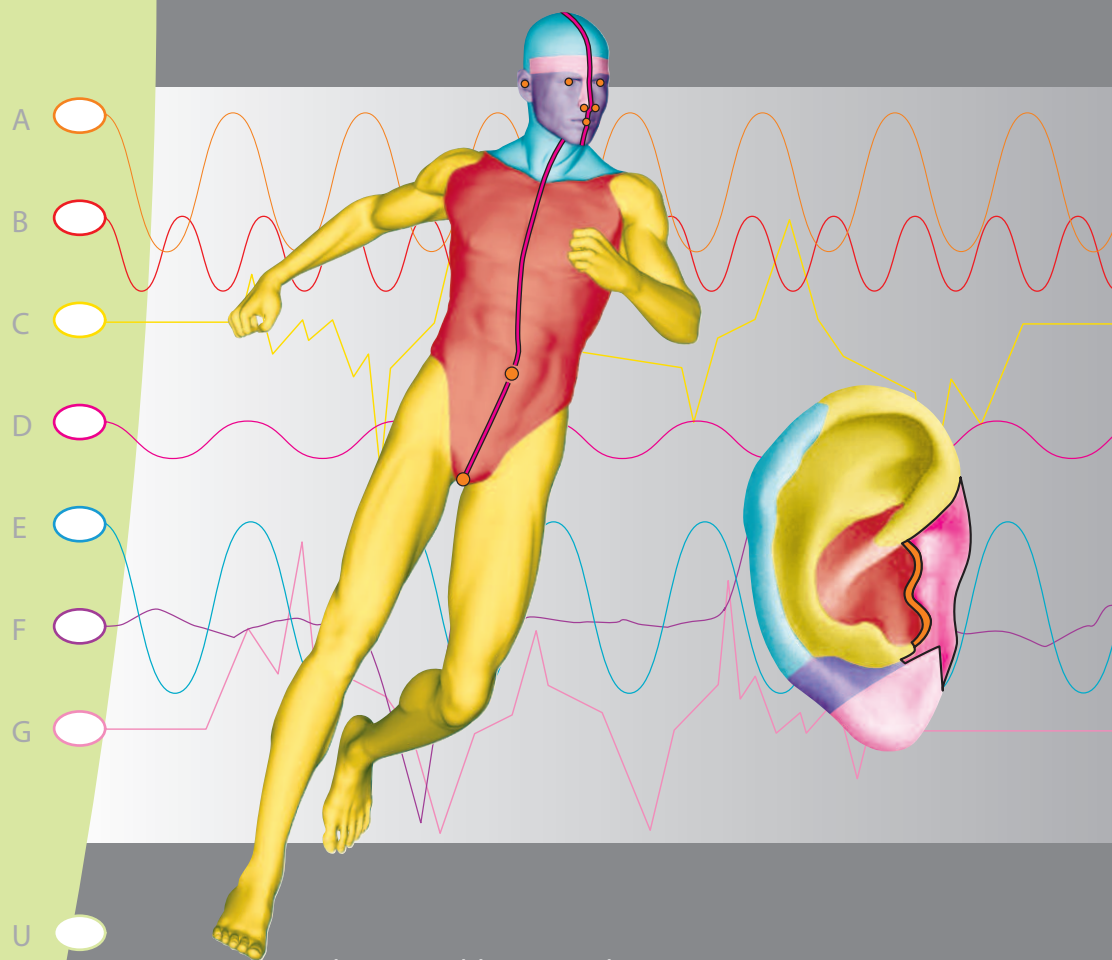

Lasertherapie
Aurikulomedizin
Mikrostrom

Sedatelec

modulo 200

leistungsstark, modular und evolutionär


Modulo 200 Sockel



Ladestation



Austauschbares
Modul
Einfaches und
schnelles Einsetzen

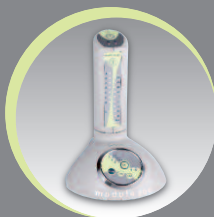

Autonomie
bis zu 7 Tagen
Wiederaufladbare
Batterie




Direktbedienung
Ergonomisches
Handstück




Speicherprogrammierung
3 integrierte
Programme
2 freie Speicher

Wählen Sie Ihre Module

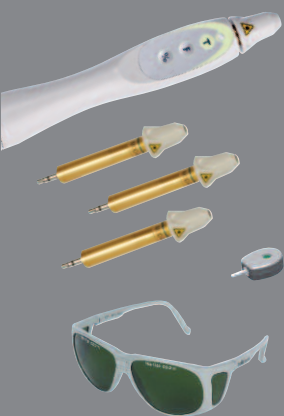

● Lasertherapie

- **IR-Lasermodul 15W gepulst**, Haut und empfindliche Bereiche
- **IR-Lasermodul 40W gepulst**, Körperpunkte
- **Lasermodul 75W gepulst**, großflächige Muskelbereiche oder Fettmasse
- **IR-Lasermodul 40W supergepulst**, lokale Behandlungen
- **Laserschutzbrille**, obligatorisch für den Schutz der Augen.

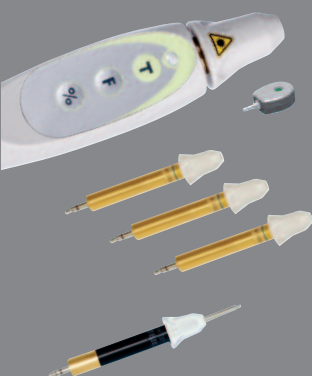

● Aurikulomedizin

- **Infrarot-Mikrolasermodul**: Aurikulomedizin
- **Infrarot- Lichtmodul**: unmittelbares Unterhautgewebe
- **Rotlichtmodul**: **Haut**, spezielle Fotorezeptoren
- **Weißlichtmodul**: **Haut**, Fotorezeptoren-Breitspektrum
- **Elektrisches Direktmodul**: **Haut**, Rezeptoren



● Mikrostrom-Therapie

- **Elektrisches Direkt- oder Differentialmodul**, Stimulation eines einzelnen Punktes
- **Acutrodes-Modul**, Stimulation von bis zu 4 Punkten gleichzeitig
- **Externe Masseelektrode**

Wählen Sie Ihre Behandlung

Lasertherapie



Individuelle Behandlung für jeden Patienten

- Traumatologie - Sportmedizin
- Gelenkbeschwerden
- Rheumatische Erkrankungen
- Dermatologie - Gynäkologie
- Odontostomatologie
- Narbenbildung - Ästhetische Behandlungen

Aurikulomedizin



Individualisierung der Behandlung

- **Diagnose** mit Hilfe der Pulsnahme nach Nogier, mit abgeschwächter Stimulation und präziser Auswahl der verwendeten Frequenz,
- **Behandlung** mit gleich bleibender Präzision,
- **Kontrolle** der positiven Wirkung der Behandlung bei abgeschwächter Emission,

durch einfaches Drücken einer Taste am Handstück.


Mikrostrom-Therapie



Umsetzung der Frequenzinformationen in "intelligente" Mikroströme

- **Akupunktur TEAS**
(Transcutaneous Electrical Acupuncture Stimulation)
- **Aurikulothérapie**
- **Triggerpunkte**
- **MET** (Microcurrent Electrical Therapy)
 - Schmerzen
 - Geweberegeneration

Die Nogier-Frequenzen

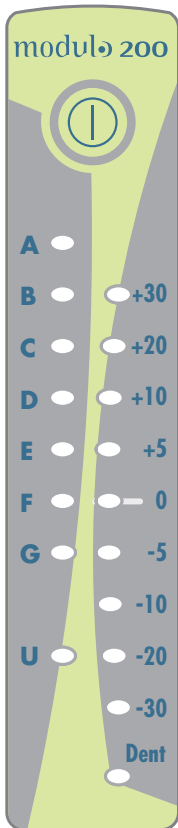

Der menschliche Organismus reagiert besonders auf Stimuli, die mit bestimmten Frequenzen oder Frequenzkombinationen ausgesendet werden.

Die Arbeit von Dr. Paul Nogier ist grundlegend in der modernen Frequenzmedizin. Seine methodischen und wissenschaftlichen Forschungen brachten die Identifizierung von 7 Basisfrequenzen hervor und führten anschließend zu Studien über die physiologische und pathologische Bedeutung ihrer Variationen.

Die Modulo 200 Basis bietet Ihnen die 7 Nogier-Frequenzen (von A bis G) sowie die Universalfrequenz U. Sie ermöglicht es außerdem, diese Frequenzen im Bereich + oder im Bereich - zur Anpassung der Stimulation an den Patienten um 5, 10, 20 oder 30% zu variieren.

Die Programme der Frequenztherapie ermöglichen eine selektive Biostimulation der reaktiven Fähigkeiten des Patienten.

Die richtige Frequenz (Basisfrequenz mit Anwendung einer Prozentvariation falls erforderlich) wird per Diagnose mit Hilfe der Pulsnahme nach Nogier oder durch therapeutische Schlussfolgerung gewählt. Die Frequenzinformation mobilisiert daraufhin die Rezeptoren und wird an das zentrale Nervensystem übermittelt. Letzteres setzt die erforderlichen physiologischen Reaktionen um.

Für selektive Behandlungen in der Mundhöhle ermöglicht die Position Dent ein Verschieben der Skala um -35%.

Bei abgeschwächter Emission ist dank der Genauigkeit der Frequenz eine sorgfältige Diagnose durch die Pulsnahme nach Nogier gewährleistet.

Speichern Sie Ihre Frequenzkombinationen

Ihr Modulo 200 bietet die Möglichkeit, bis zu 5 Programme zu speichern, was die automatische Anwendung einer individuellen Sequenz mit speziellen Frequenzen erlaubt.

Bei der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder hat die Anwendung von Kombinationen verschiedener Nogier-Frequenzen insbesondere bei der lokalen Behandlung eine synergetische Wirkung, weil zusätzliche biologische Funktionen stimuliert werden. Die aufeinanderfolgende, automatische Anwendung im Rahmen eines gespeicherten Programms erleichtert Ihnen die Behandlung.

Es sind 3 Basisprogramme für gängige Indikationen integriert, wie Schmerzzustände (Prog. Analgesie), Gewebeschädigungen (Regeneration) oder Verspannungen (Myorelaxation)



modulo 200
Eine nachhaltige Investition

● Eine bewährte Therapie

Die **schnell eintretende** Therapiewirkung drückt sich auf funktionaler Ebene in der Verringerung von Schmerzzuständen, der **Verbesserung** der behandelten Störungen, und der **Beschleunigung** des natürlichen Heilungsprozesses ohne Nebenwirkungen aus.



Ihr Fachhändler :

Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322
Fax + 33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

CE 0123

Dent

+30

+20

+10

+5

0

-5

-10

-20

-30