

The cover features a collage of medical and surgical items. At the top left, a blue surgical cap is visible. Below it, several curved surgical instruments, possibly forceps or retractors, are shown in various colors (blue, green, yellow). In the bottom left corner, there is a white surgical package labeled 'ETHICON VICRYL' and 'V479'. The background is a mix of blue and white patterns, including a mesh-like structure.

2008

Gesamtkatalog

NAHTMATERIAL UND IMPLANTATE

gültig ab Januar 2008

ETHICON®

a Johnson & Johnson company

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
EUROPÄISCHE PHARMAKOPÖE	2
ETHICON UND DIE UMWELT	3
DIE BESTELLUNG	3
ATRALOC - Bestellnummern auf einen Blick	4
NADELÜBERSICHT	
ATRALOC Programm	12
CHIRURGISCHE NADELN	
mit Federöhr	19
mit geschlossenem Öhr	22
NAHTMATERIAL	
 MONOCRYL	25
 VICRYL rapide	31
 VICRYL plus	37
 VICRYL	47
 PDS II	65
 ETHIBOND	77
 MERSILENE	87
 ETHILON	93
 ETHILON II	99
 PERMA - HAND SEIDE	105
 PROLENE	111
 STAHLDRAHT	129
 SONSTIGES	133
Implantate resorbierbar	133
Implantate teilweise resorbierbar	136
Implantate nicht resorbierbar	137
MINIMAL INVASIVE CHIRURGIE	138
Sonstiges	145
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ETHICON GmbH	151

Europäische Pharmakopöe (PH. EUR.)

Stärkenbezeichnung für chirurgisches Nahtmaterial

metric	nichtresorbierbar sowie synthetisch resorbierbar	Durchmesserspanne in mm
0,01	12 – 0	0,001 – 0,009
0,1	11 – 0	0,010 – 0,019
0,2	10 – 0	0,020 – 0,029
0,3	9 – 0	0,030 – 0,039
0,4	8 – 0	0,040 – 0,049
0,5	7 – 0	0,050 – 0,069
0,7	6 – 0	0,070 – 0,099
1	5 – 0	0,100 – 0,149
1,5	4 – 0	0,150 – 0,199
2	3 – 0	0,200 – 0,249
2,5	2 – 0	0,250 – 0,299
3	2 – 0	0,300 – 0,349
3,5	0	0,350 – 0,399
4	1	0,400 – 0,499
5	2	0,500 – 0,599
6	3	0,600 – 0,699
7	5	0,700 – 0,799
8	6	0,800 – 0,899
9	7	0,900 – 0,999

Europäische Pharmakopöe

Mit der Veröffentlichung der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur. = Pharmacopoea Europaea), die von der Europäischen Arzneibuchkommission in Straßburg unter Aufsicht des Europarates erarbeitet wurde, ist eine Harmonisierung der Fadensortierung und Stärkenbezeichnungen für chirurgisches Nahtmaterial in Europa erreicht worden. Bedeutungsvoll ist, daß die Monographien in der Ph. Eur. über chirurgisches Nahtmaterial inhaltlich weitgehend abgestimmt sind mit der amerikanischen Pharmakopöe (USP).

Die Ph. Eur. schreibt eine Dezimalsortierung vor. Die Stärkenbezeichnung ist metrisch; sie gibt die Fadendurchmesser in 1/10 mm wieder: Ein Faden der Stärke 1 hat einen Durchmesser von 0,1 mm. Diese Bezeichnungen sind fraglos logischer und aussagefähiger als die historisch gewachsenen konventionellen Stärkenangaben, die für die gleichen Stärkenbezeichnungen in den verschiedenen nationalen Arzneibüchern unterschiedliche Durchmesser vorschrieben.

ETHICON und die Umwelt

Nicht ohne Grund werden gegenwärtig vermehrt die Umweltgefahren, ausgehend von privaten Haushalten, Verkehr, Energiewirtschaft und Industrie, in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Ozonloch, Treibhauseffekt, saurer Regen und wachsende Müllberge sind nur einige der wichtigsten Umweltprobleme dieser Gesellschaft.

Wir bei ETHICON betrachten schon seit vielen Jahren den Umweltschutz als eines unserer wichtigsten Unternehmensziele. Für uns als Hersteller von chirurgischem Nahtmaterial ist es nicht immer einfach, den vielfältigen Anforderungen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes gerecht zu werden.

Beispielsweise besteht die Aufgabe einer Verpackung darin, die Ware vor mechanischer Beschädigung zu schützen, Sterilität zu gewährleisten und eine sichere Handhabung für den Anwender zum Wohle des Patienten soweit wie möglich zu garantieren.

Hierzu gehört die problemlose Entnahme des Nahtmaterials aus einer gesetzlich vorgeschriebenen, sterilen Verpackung. Andererseits sollte die Verpackung möglichst umweltverträglich sein. ETHICON-Produkte und deren Verpackungen enthalten kein PVC.

Die Gassterilisation ist für Hersteller und Anwender von medizinischen Bedarfsartikeln das Wichtigste. ETHICON entwickelte schon vor Jahren die seinerzeit erste und einzigartige Sterilgasrückgewinnungsanlage, so daß eingesetztes Sterilgas nicht an die Umwelt abgegeben, sondern für weitere Sterilisationen zurückgewonnen wird.

Die Anlage bietet nicht nur mehr als doppelt soviel Kapazität wie ihre Vorgängerin, sondern kontrolliert sich selbst anhand eines ausgefeilten Umweltmonitorings. Der für die Abnahme von Industrieanlagen verantwortliche Technische Überwachungsverein hat die von der ETHICON-Anlage erzielten Werte und Sicherheitseinrichtungen zum Standard für alle zukünftigen zu bauenden Anlagen erhoben.

Unsere Prospekte/Kataloge werden auf dem zur Zeit erhältlichen chlorfreien Papier und Recycling-Papier gedruckt. Unsere Druckerei verwendet hierbei ausschließlich Farben mit Bindemitteln, die zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden. Der Einsatz von phenolfreien Reinigungsmitteln, Abgasreinigung, Lösungsmittelrückgewinnung, Reststoffverwertung und ein organisiertes Abfallsammelsystem gehören bei ETHICON unter dem Motto:

Vermeiden • Verwerten • Beseitigen

zur Unternehmenspolitik. Zudem gehören Arbeitsplatzhygiene und Reinhaltung der Abwässer zu selbstverständlichen Bestandteilen unseres Umweltprogrammes.

Die genannten Umweltschutzeinrichtungen veranlaßten das Land Schleswig-Holstein, ETHICON den Umweltschutzpreis zu verleihen.

Auch in Zukunft werden von uns alle Möglichkeiten wahrgenommen, Qualität und Umweltverträglichkeit bei unseren Produktionsprozessen und Produkten in Einklang zu bringen.

DIE BESTELLUNG

Einfach – Schnell – Sicher

Um Ihnen eine reibungslose und fehlerfreie Abwicklung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, nachfolgend einige Tipps:

Einfach und schnell:

Bitte richten Sie Ihren Auftrag per Fax, e-mail oder/und telefonisch an die für Sie direkt zuständige Ansprechpartnerin in der ETHICON - Auftragsannahme.

Sollte Ihnen diese Nummer nicht bekannt sein, erfragen Sie Ihre Ansprechpartnerin bitte unter Telefon 0180 - 10 00 8 29.

Sicher:

Bitte geben Sie bei allen Bestellungen die vollständige **Bestellnummer** und **Artikelbezeichnung** sowie die **Bestellmenge** an.

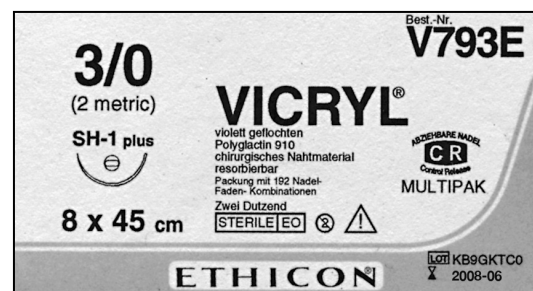
Fragen:

Zur Lieferung, Verpackung, Liefertermin beantwortet Ihnen Ihre direkte Ansprechpartnerin oder Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter.

Selbstverständlich können Sie Ihre Bestellung auch bei dem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder per Post an uns richten:

ETHICON PRODUCTS DEUTSCHLAND
22841 Norderstedt

Lieferung erfolgt ausschließlich in Originalverpackung, d.h. entsprechende Folien einzeln steril in Schachteln verpackt.



ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
PHS E	137	EC 11	140	CB 84 E	77	Y 213 H	25
PHS L	137	EJ 11	139	VM 94	134	V 214 H	48
PHS M	137	EZ 11	139	VM 96	134	VCP 214 H	37
UHS L	136	MPW 11 E	148	V 97 H	52	Y 214 H	25
UHS M	136	TSE 11	148	100 K	146	V 215 H	48
UHS OV	136	AHV 12	148	V 100 H	51	VCP 215 H	37
A 1 H	25	AHVM 12	146	VCP 100 H	39	Y 215 H	25
ATS 1	135	EA 12	140	101 K	146	V 216 H	48
BCC 1	150	EB 12	140	MIC 101 H	142	Y 218 H	26
BPW 1	148	EC 12	140	V 101 H	51	V 219 H	49
PCD G1	136	ED 12	140	VCP 101 H	39	VCP 219 H	37
PCD H1	136	EJ 12	139	VM 101	134	Y 219 H	26
PCD J1	136	EZ 12	139	102 K	146	V 220 H	49
PCD M1	136	TSE 12	148	MIC 102 H	142	VM 220	134
PHS E1	137	BPW 13	148	V 102 H	51	Y 220 H	26
PHS L1	137	ED 13	139	VCP 102 H	39	V 224 H	50
PHS M1	137	SN 13 G	130	VM 102	134	VCP 224 H	38
PML 1	137	V 13 H	52	103 K	146	V 225 H	50
PVM L1	136	Z 13 H	67	MIC 103 H	142	V 226 H	51
PVM M1	136	MPW 14 E	148	V 103 H	51	VCP 226 H	39
PVM N1	136	V 14 H	52	VCP 103 H	39	V 227 H	51
PCD W1	136	Z 14 H	67	104 K	146	Y 227 H	27
SN 1 G	131	EB 15	140	105 K	146	V 228 H	51
UHS L1	136	ESS 15	139	MIC 105 H	142	Y 228 H	27
UHS M1	136	PMT 15	137	VM 106	134	Y 229 H	27
UHS OV1	136	V 15 H	52	MIC 108 G	138	V 230 H	57
UML 1	136	VCP 15 H	39	MIC 109 G	138	Y 230 H	27
UMT 1	136	Z 15 H	67	MIC 110 G	138	V 231 H	57
UPPL 1	136	EH 16	149	V 110 H	51	VCP 231 H	41
UPPM 1	136	MPW 16 E	148	ZLO 110 H	91	V 237 H	55
UPPS 1	136	V 16 H	52	MIC 111 G	138	VCP 237 H	41
ATS 2	135	SN 17 G	131	MIC 112 G	138	V 238 H	55
BCC 2	150	RS 21 G	146	MIC 113 G	138	VCP 238 H	41
C 2 E	105	RS 22 G	146	V 113 H	52	V 239 G	56
3 DPM	137	EDP 23	134	Z 113 H	67	V 241 H	50
3 DPL	137	RS 23 G	146	MIC 114 H	143	V 242 H	50
ATS 3	135	EH 24	149	V 114 H	52	VCP 242 H	38
BCC 3	150	W 30 E	149	X 114	148	Y 242 H	26
P3 DPM	137	MPVR 32 H	34	Z 114 H	67	V 243 H	50
P3 DPL	137	V 32 H	33	MIC 115 H	143	VCP 243 H	38
PMM 3	137	V 38 G	34	V 115 H	52	Y 243 H	26
PMN 3	137	V 39 G	34	Z 115 H	67	V 244 H	50
PML K3	137	EDP 46	134	V 119 G	63	VCP 244 H	38
PMP 3	137	EC 50	140	V 120 G	63	V 245 H	51
PMS K3	137	VX 50	134	Z 120 H	66	VCP 245 H	38
PMS 3	136	BPW 51	148	MIC 130 G	138	V 246 H	51
PVM 2 L3	136	MIC 51 E	143	MIC 131 G	138	VCP 246 H	38
PVM 2 M3	136	EC 52	140	MIC 133 G	138	Y 246 H	26
PVM 2 N3	136	MIC 52 E	143	V 133 H	47	V 247 H	51
PVM 2 P3	136	C 53 E	105	MIC 134 G	138	VCP 247 H	38
PVM 2 S3	136	CB 53 E	77	V 134 H	47	Y 247 H	26
PVM 2 VN3	136	CB 54 E	77	Y 134 H	25	V 249 H	57
UMM 3	136	MIC 54 E	143	MIC 140 H	141	BPW 251	148
UMN 3	136	MIC 55 E	143	V 140 G	58	MIC 253 H	141
UMP 3	136	V 55 H	31	V 152 G	56	V 253 H	55
UMS 3	136	V 56 H	31	V 153 G	56	VCP 253 H	41
ZX 3	135	V 57 H	31	V 159 G	56	V 254 H	55
ZX 4	135	EA 62 G	31	MIC 161 H	142	V 255 H	55
RS 5 M G	146	RS 62 G	146	Z 162 E	68	Y 259 H	27
ZX 5	135	V 62 H	31	MIC 163 H	142	MIC 260 G	139
APP XL6	146	RS 63 G	146	Z 166 H	69	Y 260 H	27
APP 6	146	V 66 H	31	MIC 170 G	138	Y 261 H	27
UPPL 6	136	V 70 H	31	V 170 H	55	X 265	147
UPPM 6	136	RS 71 G	146	MIC 171 G	138	N 266 H	105
UPPS 6	136	RS 72 G	146	MIC 173 H	142	N 267 H	105
ZX 6	135	EH 74	149	Z 177 H	70	V 269 H	53
ZX 7	135	Y 74 G	27	MIC 182 H	142	V 270 H	53
R 8	149	EH 75	149	MIC 202 G	138	Y 270 H	27
ZX 8	135	EH 76	149	ZVP 203	134	N 271 H	105
R 9	149	V 76 H	32	VM 210	134	V 271 H	53
EX 10 C G	139	EH 81	149	BPW 211	148	Z 271 E	67
MPW 10 E	148	V 81 H	32	BPW 212	148	N 272 H	105
BPW 11	148	EH 82	149	Y 212 H	25	X 273 H	137
EB 11	140	EH 83	149	V 213 H	48	V 274 H	57

ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
Z 274 H	70	Z 323 H	67	VCP 364 H	40	Y 424 H	28
Z 275 H	70	V 324 H	51	EH 365	147	Z 424 E	73
V 276 H	57	VCP 324 H	39	V 365 H	55	Z 425 E	71
VCP 276 H	41	V 325 H	51	VCP 365 H	40	MPY 426 H	29
Z 276 H	70	VCP 325 H	39	V 366 H	55	V 426 H	49
V 277 H	57	V 326 H	53	VCP 366 H	40	MPY 427 H	29
VCP 277 H	41	VCP 326 H	39	V 367 H	55	V 429 G	63
Z 277 H	70	Y 326 H	27	VCP 367 H	40	V 432 H	55
V 278 H	57	V 327 H	52	V 368 G	55	Y 432 H	25
VCP 278 H	41	V 328 H	52	VCP 368 G	41	V 436 H	55
V 279 H	57	VCP 328 H	39	EH 370 G	137	V 439 G	63
VCP 279 H	41	Z 328 H	67	V 370 H	55	R 440 G	87
Z 282 H	72	V 329 H	52	VCP 370 H	40	V 440 G	63
V 291 H	59	VCP 329 H	39	Z 370 E	68	V 441 H	59
VCP 291 H	43	Z 329 H	67	V 371 H	55	Z 441 E	72
Y 291 H	28	V 330 H	53	VCP 371 H	40	V 442 H	59
Z 291 E	72	VCP 330 H	39	Z 371 E	68	VCP 442 H	43
V 292 H	59	Y 330 H	27	V 372 H	55	Y 442 H	28
V 292 Z H	59	V 331 H	53	VCP 372 H	40	Z 442 E	72
VCP 292 H	43	VCP 331 H	39	EH 375	147	V 443 H	59
VCP 292 Z H	43	Y 331 H	27	V 375 H	47	VCP 443 H	43
Y 292 H	28	V 332 H	53	Y 375 H	25	Y 443 H	28
Z 292 E	72	V 333 H	53	EH 376 G	147	Z 443 E	72
Z 292 Z E	72	VCP 333 H	39	V 376 H	47	V 449 G	62
V 293 H	59	Z 333 H	67	VCP 376 H	37	V 450 G	62
VCP 293 H	43	V 334 H	53	Y 376 H	25	V 451 H	59
Y 293 H	28	VCP 334 H	39	V 377 H	47	V 452 H	59
Z 293 E	72	Z 334 H	68	EH 379 G	147	VCP 452 H	43
V 301 G	56	V 335 H	53	V 379 G	55	V 453 H	59
V 302 H	48	VCP 335 H	39	EH 381 E	147	VCP 453 H	43
VM 302	134	Z 335 H	67	V 381 H	47	Z 458 E	72
Z 302 H	65	V 336 H	53	EH 382 E	147	V 461 H	58
V 303 H	48	VCP 336 H	39	V 382 H	47	VCP 461 H	42
VCP 303 H	37	V 338 H	54	EH 383 E	147	Z 463 H	73
VH 303	133	V 339 H	54	V 383 H	60	EH 464 G	138
Z 303 H	65	VCP 339 H	40	EH 384 E	147	Z 464 H	73
ZH 303	133	Z 339 H	68	EH 385 E	147	Z 464 B E	148
V 304 H	48	V 340 H	54	EH 386	147	EH 465	148
VCP 304 H	37	VCP 340 H	40	EH 387	147	EH 466	148
Z 304 H	65	Z 340 H	68	EH 388	147	V 466 H	58
V 305 H	48	V 341 H	54	EH 389	147	VCP 466 H	42
VCP 305 H	37	VCP 341 H	40	EH 390 E	147	EH 467	148
Z 305 H	65	Z 341 H	68	V 391 H	59	V 467 H	58
V 306 H	48	V 345 H	54	VCP 391 H	43	VCP 467 H	42
VCP 306 H	37	VCP 345 H	40	V 392 H	59	Z 467 H	72
VH 306	133	V 346 H	54	V 392 Z H	59	V 468 H	58
ZH 306	133	VCP 346 H	40	VCP 392 H	43	VCP 468 H	42
Z 307 H	72	V 347 H	54	VCP 392 Z H	43	Z 468 H	72
V 310 H	49	VCP 347 H	40	V 393 H	59	Y 470 H	28
VCP 310 H	37	V 348 H	54	VCP 393 H	43	VCP 471 H	42
Z 310 H	66	VCP 348 H	40	EH 395	148	V 474 H	58
V 311 H	49	V 349 G	62	EH 396 E	148	VCP 474 H	42
VCP 311 H	37	V 350 H	54	EH 397 G	148	V 479 H	58
Z 311 H	66	VCP 351 H	40	V 397 H	59	V 480 H	58
V 312 H	49	V 352 H	54	VCP 397 H	43	VCP 480 H	42
VCP 312 H	37	VCP 352 H	40	EH 398 G	147	V 481 H	58
V 315 H	50	V 353 H	54	VCP 398 H	43	VCP 481 H	42
VCP 315 H	38	VCP 353 H	40	EH 399 E	148	V 482 H	58
Z 315 H	66	VS 353 E	145	V 400 G	56	VCP 482 H	42
V 316 H	50	VS 354 E	145	400 G	129	V 485 H	58
VCP 316 H	38	V 357 H	54	ZVP 406	134	Z 485 E	72
Z 316 H	66	Z 357 E	68	Y 415 H	26	V 486 H	58
Z 316 C G	66	V 358 H	54	V 416 H	50	VCP 486 H	42
V 317 H	50	VCP 358 H	40	VCP 416 H	38	Z 487 H	73
VCP 317 H	38	Z 358 E	68	Y 416 H	26	MPV 489 H	61
Z 317 H	66	V 359 H	54	Y 417 H	26	MPVR 489 H	34
V 318 H	50	VCP 359 H	40	Y 418 H	26	MPY 489 H	29
VCP 318 H	38	Z 359 E	68	V 422 H	59	MPZ 489 H	74
V 321 H	52	EH 360	145	Y 422 H	28	V 489 H	60
V 322 H	51	V 360 H	54	Z 422 E	72	Y 489 H	28
VCP 322 H	39	VCP 360 H	40	Z 422 Z E	72	Z 489 E	28
Z 322 H	67	V 363 H	55	V 423 H	59	MPV 490 H	61
V 323 H	51	VCP 363 H	40	Y 423 H	28	MPVCP 490 H	44
VCP 323 H	39	V 364 H	55	Z 423 E	72	V 490 H	60

ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
Y 490 H	28	VCP 516 H	41	X 620 G	137	678 H	108
Z 490 E	73	V 517 H	57	Z 620 E	69	679 H	108
V 491 H	60	VCP 517 H	41	R 623 H	89	680 H	108
VCP 491 H	43	MIC 518 H	143	V 623 E	64	Z 682 E	74
Y 491 H	28	V 518 H	57	V 624 E	64	683 H	107
MPV 492 H	61	VCP 518 H	41	VCP 624 E	45	MPV 683 H	29
MPY 492 H	29	V 519 H	57	V 625 E	64	MPVCP 683 H	44
V 492 H	60	VCP 519 H	41	VCP 625 E	45	MPY 683 H	29
Y 492 H	28	V 520 H	59	Y 625 H	30	MPZ 683 H	74
Z 492 E	61	VCP 520 H	41	V 626 E	64	R 683 H	88
MPV 493 H	61	V 523 H	60	VCP 626 E	45	V 683 H	60
MPVCP 493 H	44	V 524 H	60	X 626 H	137	VCP 683 H	44
MPY 493 H	29	V 528 H	50	V 627 H	64	Y 683 H	29
MPZ 493 H	74	X 535 G	120	VCP 627 H	45	Z 683 E	74
V 493 H	74	ZFJ 535 H	64	Z 627 E	75	684 H	108
VCP 493 H	43	ZFK 535 H	64	V 628 H	64	MPV 684 H	61
Y 493 H	28	MIC 540 H	141	VCP 628 H	45	MPY 684 H	29
Z 493 E	73	V 542 G	63	Z 630 E	69	V 684 H	60
MPV 494 H	61	V 546 G	63	Z 631 E	69	VCP 684 H	44
MPVCP 494 H	44	V 547 G	63	632 H	107	Y 684 H	29
MPY 494 H	29	V 548 G	63	V 632 H	64	Z 684 E	74
MPZ 494 H	74	V 549 G	63	V 633 H	64	685 H	108
V 494 H	60	MIC 551 H	142	VCP 633 H	45	MPV 686 H	61
VCP 494 H	43	V 551 G	61	Z 633 H	75	V 686 H	60
Y 494 H	28	MIC 552 H	142	V 634 H	64	MPV 687 H	61
Z 494 E	73	V 554 G	61	VCP 634 H	45	V 687 H	60
V 495 H	60	V 555 G	62	V 635 H	64	690 H	95
Y 495 H	29	V 557 G	61	VCP 635 H	45	R 691 H	89
Z 495 E	73	MIC 563 H	142	Z 635 H	45	VCP 694 H	42
MPV 496 H	61	MIC 565 H	141	V 636 E	64	VCP 695 H	42
MPVCP 496 H	44	V 570 G	62	VCP 636 E	45	697 H	95
MPY 496 H	29	V 571 G	62	Z 636 E	75	MPE 697 H	96
MPZ 496 H	74	MIC 572 H	141	V 637 E	64	R 697 H	89
V 496 H	60	V 572 G	62	VCP 637 E	45	698 H	95
V 496 Z H	60	MIC 573 H	142	V 638 H	64	MPE 698 H	96
VCP 496 H	44	V 574 G	62	VCP 638 H	45	R 698 H	89
VCP 496 Z H	44	V 575 G	62	639 H	108	699 H	95
Y 496 H	28	V 577 G	62	640 H	108	R 699 H	89
Z 496 E	73	X 577 H	116	641 H	108	V 703 E	57
Z 496 Z E	73	X 579	134	V 642 H	64	VH 703	133
MPV 497 H	61	V 581 G	52	V 643 H	64	ZH 703	133
MPVCP 497 H	44	MIC 582 H	142	644 H	94	VH 706	133
MPY 497 H	29	V 582 G	52	V 644 H	64	ZH 706	133
MPZ 497 H	74	V 583 G	52	V 645 H	64	ZK 708	133
V 497 H	60	VCP 584 G	39	VCP 645 H	45	ZV 709	134
VCP 497 H	44	V 585 H	59	V 646 E	45	Y 714 G	25
Y 497 H	28	VCP 585 H	43	V 647 E	64	719 H	107
Z 497 E	73	MIC 586 H	141	648 H	94	V 719 G	54
MPY 498 H	29	V 586 H	59	V 648 H	64	ZK 728	133
V 498 H	60	VCP 586 H	43	V 652 E	64	R 730 H	88
VCP 498 H	44	V 587 H	59	653 B G	129	V 733 E	48
Y 498 H	28	VCP 587 H	43	V 653 E	64	VCP 733 E	37
Z 498 E	73	V 600 G	63	V 654 E	64	734 H	107
V 499 H	60	V 601 H	47	V 655 H	64	V 734 E	48
VCP 499 H	43	V 602 H	47	V 656 H	64	VCP 734 E	37
Y 499 H	28	VCP 602 H	37	660 H	94	V 735 G	48
MPY 500 H	29	Y 602 H	25	661 H	94	736 H	107
V 500 H	60	V 603 H	47	662 H	94	V 736 G	54
VCP 500 H	44	VCP 603 H	37	663 H	95	VCP 736 G	40
Z 500 E	73	VM 605	134	664 H	95	737 H	107
MPY 501 H	29	X 605 H	32	V 664 H	60	V 737 G	54
VH 503	133	Y 605 H	25	R 665 H	88	VCP 737 G	40
ZH 503	133	Z 605 E	65	667 H	94	739 H	107
VCP 505 H	44	V 606 H	47	V 667 H	48	V 740 G	54
VH 506	133	Y 610 E	25	668 H	94	VCP 740 G	40
ZH 506	133	V 611 H	64	669 H	95	V 741 G	54
MIC 511 G	138	611 H	94	R 670 H	88	VCP 741 G	40
Z 512 H	75	X 613	133	V 670 G	62	V 742 G	54
Z 513 H	73	EDP 614	134	V 671 G	62	VCP 742 G	40
Z 513 Z H	73	VL 615	135	X 671	133	W 742	113
MIC 514 H	143	V 617 H	64	R 673 G	88	V 744 E	53
Z 514 Z H	73	V 618 H	64	R 674 G	88	VCP 744 E	39
MIC 515 H	143	X 619 G	137	R 674 G	88	V 745 E	53
V 516 H	57	V 620 H	56	R 677 H	88	VCP 745 E	39

ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
746 G	90	K 802 H	106	V 919 H	57	V 987 H	57
V 746 E	53	VM 802	134	Y 919 H	27	V 988 H	57
VCP 746 E	39	K 803 H	106	Z 920 E	71	V 990 H	58
V 747 G	53	K 804 H	106	V 921 H	59	Z 990 H	71
VCP 747 G	39	ZV 805 H	134	V 924 H	47	V 991 H	58
V 748 G	53	V 807 E	51	VCP 924 H	37	Z 991 H	71
VCP 748 G	39	VCP 807 E	38	X 924 G	118	V 992 E	57
V 753 G	54	V 808 E	51	Z 924 H	65	V 993 E	57
VCP 753 G	40	Z 809 G	133	V 925 H	48	V 994 H	57
V 754 G	54	Z 811 G	133	VCP 925 H	37	VCP 994 H	41
VCP 754 G	40	Z 812 G	133	Y 925 H	25	Z 994 H	70
V 755 G	55	Z 813 G	133	Z 925 H	65	Z 995 H	70
VCP 755 G	40	Z 814 G	133	V 926 H	47	Z 996 H	73
V 756 E	53	VL 815	135	Z 926 H	65	Z 997 H	70
VCP 756 E	39	Z 825 G	133	V 928 H	52	Z 997 C	71
V 759 E	53	V 829 E	58	MPY 935 H	29	V 998 H	57
VCP 759 E	39	VCP 829 E	41	Z 935 H	65	VCP 998 H	41
V 760 G	53	V 830 G	58	K 936 H	107	Z 998 H	70
VCP 760 G	39	K 831 H	105	K 942 H	107	V 999 H	57
V 765 G	55	K 832 H	105	X 943 H	62	VCP 999 H	41
VCP 765 G	40	R 832 H	87	V 944 H	54	X 999 G	116
V 766 G	54	K 833 H	105	V 945 H	54	Y 999 H	27
VCP 766 G	40	R 833 H	87	VCP 945 H	40	Z 999 H	70
V 767 G	54	K 834 H	105	Y 945 H	27	V 1000 H	52
VCP 767 G	40	R 834 H	87	V 946 H	54	Z 1002 H	69
768 G	108	K 835 H	105	VCP 946 H	40	ZH 1002	133
769 G	109	Z 835 G	133	Y 946 H	27	V 1003 H	32
V 770 E	50	R 836 H	87	V 947 H	53	VH 1003	133
VCP 770 E	38	V 836 G	54	VCP 947 H	40	ZH 1003	133
V 771 E	50	VCP 836 G	40	Y 947 H	27	X 1004 G	117
V 773 E	50	V 837 G	54	V 948 H	54	VH 1006	133
VCP 773 E	38	VCP 837 G	40	K 951 H	107	ZH 1006	133
V 774 E	50	Z 838 G	133	K 952 H	107	V 1010 H	52
VCP 774 E	38	B 843 H	78	R 952 H	87	X 1012 H	120
V 775 E	50	R 843 H	87	K 953 H	107	Z 1012 H	69
VCP 775 E	38	K 844 H	105	R 953 H	87	Z 1013 H	69
V 776 G	51	R 844 H	87	K 954 H	107	ZK 1015	133
V 777 G	51	K 845 H	105	R 955 H	87	V 1027 G	47
VCP 777 G	39	R 845 H	87	Y 958 H	27	V 1028 H	47
V 778 G	51	846 C G	81	V 959 H	54	X 1029 H	49
V 779 H	50	K 853 H	106	Y 959 H	27	Z 1032 H	71
VCP 779 H	39	K 854 H	106	V 960 H	54	Z 1033 E	71
780 G	109	K 861 H	106	VCP 960 H	40	Z 1042 H	71
V 780 H	50	Z 863 H	66	V 962 E	64	Z 1043 H	71
VCP 780 H	38	Y 864 G	26	V 963 E	64	V 1058 H	59
V 781 G	50	Z 864 H	66	K 964 H	107	VCP 1058 H	42
V 782 H	49	Z 867 H	65	R 964 H	87	V 1059 H	59
VCP 782 H	37	869 G	81	V 964 E	45	VCP 1059 H	42
783 G	109	K 870 H	105	VCP 964 E	64	X 1059 H	78
V 783 G	50	R 870 H	87	V 965 E	64	ZV 1113	134
V 784 E	50	K 871 H	105	VCP 965 E	45	X 1130 H	120
V 785 E	50	R 871 H	87	V 966 H	64	X 1153 G	66
VCP 785 E	38	K 872 H	105	VCP 966 H	45	X 1154 G	66
786 G	109	R 872 H	87	X 966 G	114	X 1166 H	113
V 786 G	51	K 873 H	105	V 967 H	64	X 1192	147
VCP 786 G	39	K 880 H	106	X 967 G	115	V 1205 G	64
V 787 E	56	K 889 H	106	VCP 969 H	42	V 1206 G	64
789 G	109	K 890 H	106	Z 969 H	72	ZK 1206	133
V 791 E	49	K 891 H	106	V 970 G	56	V 1207 G	64
V 792 E	49	W 893	85	V 971 G	56	V 1208 G	64
VCP 792 E	37	Z 898 E	71	V 975 G	63	VM 1208	134
V 793 E	49	V 903 H	64	V 977 H	64	V 1209 G	64
VCP 793 E	37	V 904 H	64	Y 977 G	27	V 1210 G	34
Y 793 G	26	V 905 E	64	V 978 H	64	V 1211 G	34
V 794 E	49	V 906 E	64	V 979 H	64	X 1212 H	114
VCP 794 E	37	V 907 E	64	Y 979 G	27	V 1214 E	64
V 795 E	49	V 908 E	64	V 980 E	64	VCP 1214 E	45
VCP 795 E	37	V 909 H	64	VCP 980 E	45	V 1215 E	64
V 797 E	47	V 910 H	64	V 981 E	64	VCP 1215 E	45
V 798 G	49	V 911 E	64	VCP 981 E	45	VL 1215	135
VCP 798 G	37	V 912 E	64	V 982 H	64	ZK 1215	133
V 799 E	48	V 913 E	64	VCP 982 H	45	V 1216 E	64
VCP 799 E	37	V 914 E	64	Z 983 H	72	VCP 1216 E	45
V 800 E	47	X 916 G	114	Z 984 H	72	V 1217 E	64

ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer			Seite	Bestellnummer			Seite	Bestellnummer			Seite	Bestellnummer			Seite
VCP 1217	E	45	Z 1751	E	71	4PL 2566	Y G	54	ENN 2934	G	74				
V 1218	H	64	Z 1752	E	71	4PF 2572	Y G	50	VPM 2940		135				
VCP 1218	E	45	1760	G	90	4PF 2573	H	50	JD 2942	H	73				
V 1219	H	64	1763	G	90	4PF 2573	Y E	50	JG 2942	H	73				
VCP 1219	H	45	V 1774	E	57	BA 2573	H	56	VPM 2942		135				
V 1220	G	34	V 1775	E	57	VAA 2573	E	47	VPM 2944		135				
V 1223	H	64	1778	G	90	VCC 2573	H	47	VPM 2945		135				
V 1224	H	64	1780	G	109	VCP 2573	E	38	VPM 2946		135				
VCP 1224	H	45	MPE 1855	H	102	4PF 2574	Y E	50	VPM 2947		135				
V 1225	H	64	Z 1923	E	60	6OK 2574	H	57	VPM 2950		135				
VCP 1225	H	45	Z 1924	E	68	8PB 2574	Y E	48	VPM 2952		135				
V 1226	H	64	Z 1930	G	71	8PF 2574	E	50	PUU 2971	E	65				
VCP 1226	H	45	Z 1940	G	71	MF 2574	H	58	PGG 2972	E	67				
V 1227	E	64	Z 1950	G	68	VCP 2574	E	39	6PE 2973	G	66				
VCP 1227	E	45	EH 1980		149	4PF 2575	Y E	50	JC 2973	S H	73				
V 1228	E	64	ZV 2001		134	4PK 2575	Y E	53	VAA 2973	E	65				
VCP 1228	E	45	ZK 2006		133	6PK 2575	G	53	MH 2976	E	72				
V 1229	H	64	ZX 2006		133	VC 2575	H	47	KCC 2992	E	69				
VCP 1229	H	45	ZK 2007		133	VCP 2575	E	39	PFF 2992	E	67				
EH 1252	G	149	ZK 2017		133	5TC 2576	Y G	55	PEE 2993	H	66				
X 1252	E	69	ZX 2026		133	5TD 2576	Y G	55	PFF 2993	H	67				
EH 1253	G	149	ZK 2027		133	6PK 2576	G	53	VCC 2993	E	65				
X 1295	H	113	V 2130	H	31	VCP 2576	G	41	PFF 2994	E	67				
X 1296	H	113	V 2140	H	31	8PN 2577	Y G	55	OL 2995	G	70				
ZK 1308		133	V 2143	H	31	PF 2577	H	50	PL 2995	E	68				
Z 1311	H	66	V 2150	H	31	VCP 2577	G	40	PN 2997	E	68				
Z 1312	H	66	2160		150	VCP 2578	G	39	ZV 3000		134				
Z 1315	H	67	2161		150	VCP 2592	H	37	VM 3003		134				
Z 1316	H	67	2162		150	8PF 2593	Y G	50	RM 3015		137				
Z 1317	H	67	2163		150	OB 2593	H	57	VM 3020		134				
ZK 1328		133	V 2180	H	31	VCC 2593	H	47	RM 3030		137				
Z 1370	E	65	V 2190	H	31	VCP 2593	H	37	V 3030	H	48				
V 1407	E	54	V 2200	H	49	VAA 2594	H	47	Y 3030	H	25				
V 1408	E	54	EB 2206	H	82	VC 2594	H	47	Z 3030	H	66				
VCP 1408	E	40	2211		149	4PL 2595	Y	54	V 3040	H	48				
ZV 1416		134	2212		149	4PK 2596		53	VCP 3040	H	37				
V 1428	E	55	2214		149	7TB 2596	Y	55	Y 3040	H	25				
VCP 1428	E	40	2215		149	PK 2597	H	53	Z 3040	H	66				
V 1430	G	55	2226		149	VCP 2597	H	39	V 3050	H	48				
VH 1503		133	2227		149	EAA 2641	H	61	VCP 3050	H	37				
ZH 1503		133	2228		149	MLL 2641	H	61	Y 3050	H	25				
ZH 1506		133	2229		149	MN 2641	H	62	V 3060	H	48				
ZK 1506		133	2230		149	ML 2642	H	61	KB 3072	H	69				
ZX 1506		133	2231		149	8PB 2643	Y E	48	V 3100	H	49				
ZV 1530	G	134	2232		149	OA 2644	H	57	VCP 3100	H	38				
EC 1534	G	34	2233		149	JE 2672	H	60	Y 3100	H	26				
ZV 1590		134	2234		149	VCP 2672	H	37	Z 3100	H	66				
1617	H	89	V 2420	H	51	8PF 2673	Y E	50	V 3110	H	49				
MPE 1621	H	102	VCP 2420	H	38	4PE 2674	Y H	49	VCP 3110	H	38				
MPE 1626	H	102	V 2430	H	51	OK 2674	H	57	Y 3110	H	26				
BH 1643	H	33	VCP 2430	H	38	4MF 2675	Y E	58	Z 3110	H	66				
1647	H	95	ZV 2500		134	OA 2675	H	57	V 3120	H	49				
1663	H	95	PN 2512	E	55	OB 2675	H	57	VCP 3120	H	38				
1666	H	95	VM 2515		134	2808	G	93	Y 3120	H	26				
1667	H	95	OH 2528	G	58	2809	G	93	V 3150	H	51				
MPE 1667	H	96	EA 2531	H	61	2810	G	93	Y 3150	H	26				
VA 1673	H	31	EC 2531	H	63	2814	G	93	Z 3150	H	66				
1677	H	108	MNN 2531	H	62	MPP 2831	H	126	Z 3150	B G	66				
1678	H	108	8OS 2542	Y G	58	UDD 2831	G	62	V 3160	H	51				
MPE 1685	H	102	4PG 2543	Y G	51	MPP 2832	H	126	VCP 3160	H	38				
PM 1694	H	34	8MF 2543	Y E	58	MPP 2833	H	126	Y 3160	H	26				
PV 1694	H	31	8PA 2543	Y E	47	MPP 2834	H	126	Z 3160	H	66				
1696	H	95	MD 2543	H	58	MPP 2847	H	126	V 3170	H	51				
TC 1696	H	32	ME 2543	H	58	MPP 2854	H	126	VCP 3170	H	38				
1698	H	95	VCP 2543	E	37	MPP 2858	H	126	Y 3170	H	26				
MPE 1698	H	96	8ME 2544	Y E	58	MPP 2859	H	126	Z 3170	H	66				
Z 1701	E	68	8OC 2544	Y G	57	MPP 2860	H	126	Y 3212	H	29				
Z 1702	H	68	8PK 2544	Y G	53	MPP 2861	H	126	Y 3213	H	26				
Z 1711	E	71	8PM 2544	Y G	54	MPP 2862	H	126	Y 3213	H	29				
Z 1712	H	71	4PA 2545	Y G	59	V 2910	H	33	Y 3214	H	26				
1713	G	127	4PE 2545	Y E	49	V 2920	H	33	Y 3218	H	26				
1717	G	97	4PN 2545	Y G	55	Z 2920	H	72	V 3219	H	49				
Z 1721	H	69	6OB 2545	Y E	57	OF 2924	XG	71	Y 3219	H	26				
Z 1722	H	69	8PN 2545	Y G	55	V 2930	H	33	V 3220	H	52				

ATRALOC Bestellnummern

Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite	Bestellnummer	Seite
V 3224 H	51	PUU 5670 H	111	EH 6666 E	91	6964 H	81
V 3230 H	52	OKK 5672 H	118	EH 6672 H	91	6965 H	81
Y 3416 H	26	PF 5672 S H	112	6681 H	84	6976 H	81
Y 3417 H	26	KHH 5673 S H	114	6682 H	85	6977 H	81
V 3481 G	54	KHL 5673 J G	114	6683 H	82	P 6977 H	81
VS 3530 E	145	PG 5674 H	113	6697 H	84	6987 H	81
VS 3540 E	145	PK 5676 H	113	6698 H	84	7000 G	96
ECC 3543 G	109	OBB 5694 S H	118	6710 H	77	7003 G	97
8PA 3544 Y E	105	PGG 5694 H	113	EH 6712 H	110	7003 K E	98
Z 3605 E	70	PGG 5695 H	113	EH 6713 H	110	7008 G	98
Z 3700 G	70	JA 5742 H	124	EH 6715 E	110	EH 7008 H	122
Y 3715 G	25	JC 5743 H	124	EH 6722 E	110	EH 7012 H	100
Y 3793 G	26	PF 6315 H	78	EH 6723 E	110	EH 7013 H	100
Y 3864 G	26	PF 6324 H	78	EH 6724 H	110	EH 7018 H	82
Y 3866 G	26	4PA 6343 Y H	77	EH 6726 E	110	EH 7026 H	122
ZP 4013	134	MD 6343 H	82	EH 6731 H	91	EH 7032 H	122
ZPA 4013	134	5FK 6344 Y H	83	EH 6732 H	91	EH 7033 H	83
MIC 4030	143	8FL 6344 Y G	83	EH 6733 H	91	EH 7037 H	100
MIC 4032	143	OA 6344 H	80	EH 6734 H	91	EH 7038 H	123
MIC 4034	143	EH 6371 H	86	EH 6735 H	91	7060 G	97
MIC 4036	143	EH 6373 H	86	EH 6736 H	91	EH 7060 H	124
V 4150 H	31	PFF 6373 L G	78	EH 6737 H	91	7061 G	96
V 4160 H	31	PP 6373 H	77	EH 6739 H	91	7062 G	98
V 4170 H	31	EH 6374 H	86	EH 6762 H	110	EH 7065 H	84
MPVR 4260 H	34	HCC 6374 H	82	EH 6763 H	110	EH 7070 H	101
V 4260 H	33	BLL 6375 E	80	EH 6765 H	110	EH 7071 H	101
MPVR 4270 H	34	EH 6375 E	86	EH 6767 H	110	EH 7075 H	124
V 4270 H	33	PLL 6375 H	78	EH 6806 H	110	EH 7076 H	124
EB 4407 H	81	PNN 6375 H	79	EH 6807 H	110	EH 7081 H	84
V 4416 H	51	MG 6376 H	82	EH 6824 H	110	EH 7085 H	85
V 4420 H	33	PN 6376 H	78	V 6830 H	33	EH 7086 H	85
V 4421 H	33	MS 6377 H	82	Y 6830 H	29	EH 7090 H	125
V 4430 H	33	OB 6396 H	81	6832 H	78	EH 7100 H	85
V 4431 H	33	EH 6407 G	91	6833 H	78	EH 7101 H	102
V 4550 H	32	EH 6413 H	91	6834 H	78	EH 7102 H	125
Z 4630 H	73	EH 6417 H	91	6836 E	78	EH 7110 H	85
Z 4640 H	73	EH 6433 H	86	EH 6836 E	110	EH 7111 H	85
Z 4870 E	73	EH 6434 H	86	EH 6837 E	110	EH 7113 H	102
MPVR 4930 H	34	EH 6435 H	86	EH 6839 E	110	EH 7114 H	102
V 4930 H	33	EH 6436 H	86	V 6840 H	33	EH 7115 H	102
Y 4930 H	28	EH 6437 H	86	Y 6840 G	29	EH 7118 H	102
MPVR 4940 H	34	EH 6441 H	86	EH 6853 H	91	EH 7120 H	125
V 4940 H	33	VCP 6441 H	45	EH 6854 H	91	EH 7121 H	125
Y 4940 H	28	EH 6442 H	86	EH 6855 H	91	EH 7123 H	125
Y 4950 G	28	EH 6443 H	86	EH 6856 H	91	EH 7124 H	125
V 4960 H	33	EH 6444 H	86	EH 6857 H	91	EH 7136 G	97
Y 4960 H	28	EH 6445 H	86	EH 6858 H	91	EH 7138 H	85
V 4961 H	33	EH 6446 H	86	6870 H	77	EH 7139 H	95
MPVR 4970 H	34	EH 6447 H	86	6871 H	77	EH 7142 H	82
V 4970 H	33	EH 6454 H	86	6872 H	77	EH 7143 H	99
Y 4970 H	28	EH 6455 H	86	6873 H	77	EH 7144 H	99
V 4971 H	33	EH 6456 H	86	6881 H	79	EH 7145 H	94
ECC 5132 G	97	EH 6457 H	86	EH 6884 H	91	EH 7147 H	88
EB 5133 H	98	EH 6458 H	86	EH 6887 H	91	EH 7149 G	107
V 5170 H	32	EH 6459 H	86	EH 6888 E	91	EH 7150 H	122
FH 5171 H	94	OA 6475 H	80	6889 H	79	EH 7151 H	122
V 5180 H	32	6521 H	78	6890 H	79	EH 7160 H	85
V 5190 H	32	6522 H	78	6903 H	81	EH 7160 B H	85
Y 5218 H	26	6523 H	78	6905 H	81	EH 7161 H	101
Y 5270 H	26	6524 H	78	EH 6935 H	91	MPE 7161 H	102
JD 5273 H	101	EH 6524 H	86	6936 H	80	EH 7162 H	101
KCC 5613 H	117	EH 6525 H	86	EH 6936 H	91	EH 7163 H	95
PBB 5613 H	111	EH 6526 H	86	6937 H	80	EH 7164 H	89
PEE 5613 H	112	EH 6527 H	86	6937 L G	80	EH 7166 G	124
PGG 5613 H	113	6550 H	77	EH 6937 H	91	EH 7167 H	124
PGG 5614 H	113	6557 H	77	MEH 6937 N	80	EH 7168 H	124
FD 5640 H	122	6558 H	77	P 6937 H	80	EH 7169 H	125
MD 5642 H	121	EH 6562 H	103	6943 H	82	EH 7171 H	121
KHH 5643 H	114	6661 H	82	6944 H	82	EH 7173 H	99
KBB 5650 H	116	6663 H	83	6951 H	80	EH 7174 H	99
KAA 5660 H	115	EH 6663 H	91	6953 H	80	EH 7175 H	122
KBB 5661 H	116	6664 H	83	6954 H	80	EH 7176 H	122
KHH 5662 H	114	EH 6664 H	91	6959 G	80	EH 7177 H	94
JC 5663 V E	124	EH 6665 E	91	6963 H	81	EH 7190 L G	112

ATRALOC Bestellnummern

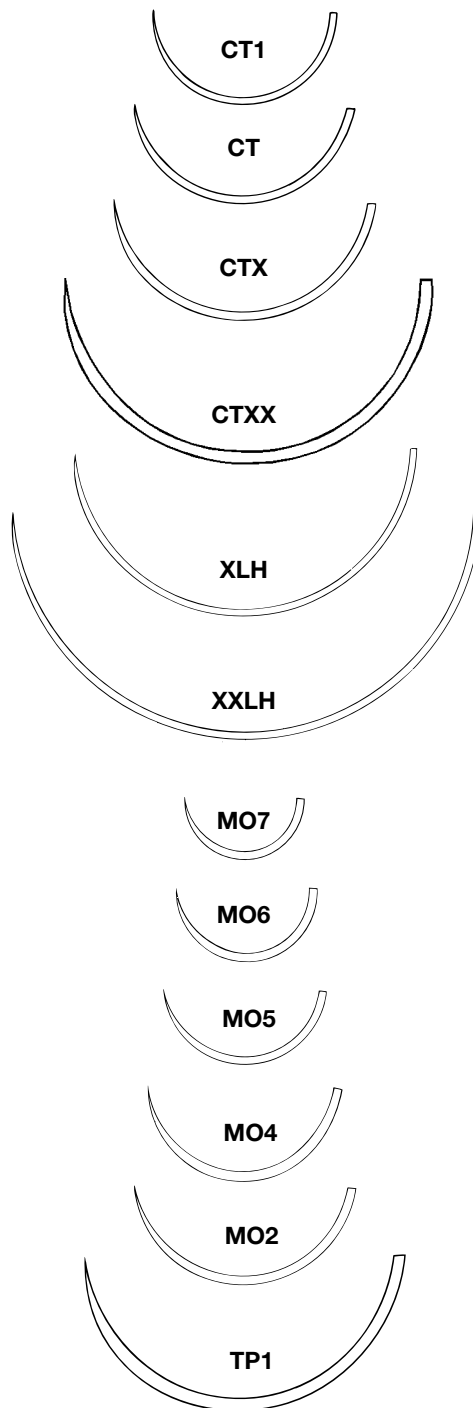
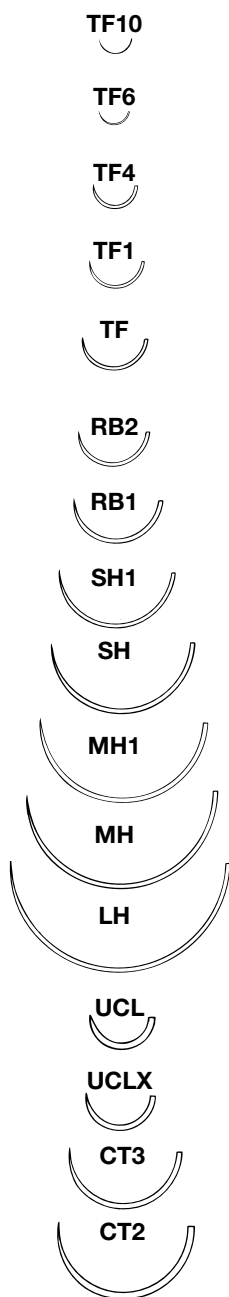
Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite
V	7191	H	32	EH	7307	H	79	EH	7500	H	93
V	7197	H	57	EH	7325	H	88	EH	7506	H	94
MEH	7210	G	129	V	7330	E	48	EH	7508	H	117
MEH	7211	G	129	VCP	7330	E	37	EH	7509	G	93
MEH	7212	G	129	EH	7338	G	90	EH	7526	H	87
MEH	7213	G	129	V	7340	E	48	EH	7528	H	78
MEH	7214	G	129	VCP	7340	E	37	EH	7535	H	112
EH	7216	G	129	EH	7343	H	105	EH	7544	H	82
MEH	7216	G	129	EH	7344	H	105	EH	7545	H	121
MEH	7218	G	129	EH	7345	H	107	EH	7546	H	88
MEH	7219	G	129	EH	7346	H	82	EH	7547	H	107
EH	7220	H	114	EH	7350	H	88	EH	7550	H	125
EH	7221	H	114	V	7350	G	48	EH	7551	H	85
EH	7222	H	115	EH	7352	H	88	EH	7552	H	108
EH	7223	H	114	EH	7352	B E	88	EH	7553	H	95
MEH	7224	J G	115	V	7361	G	54	EH	7554	H	89
EH	7225	H	114	EH	7384	H	80	EH	7555	H	124
EH	7226	H	116	EH	7385	H	87	EH	7556	H	85
EH	7227	H	116	EH	7386	H	87	EH	7557	H	108
EH	7228	H	116	EH	7387	H	87	EH	7558	H	95
EH	7229	H	116	EH	7393	H	77	EH	7559	H	89
EH	7230	H	116	EH	7395	H	77	EH	7560	H	108
EH	7231	H	116	EH	7397	H	77	EH	7561	H	123
MEH	7232	J G	116	EH	7398	H	77	EH	7562	H	83
MEH	7233	J G	116	EH	7399	H	77	EH	7563	H	95
EH	7234	H	120	EH	7400	H	111	EH	7568	H	125
EH	7235	H	120	EH	7401	H	111	EH	7569	H	85
EH	7236	H	120	EH	7402	H	114	EH	7570	H	85
EH	7237	H	120	EH	7403	H	114	EH	7570	B H	85
EH	7240	H	115	EH	7404	H	111	EH	7573	H	84
EH	7241	H	118	EH	7405	H	115	EH	7578	H	123
MEH	7241	J G	118	EH	7406	H	114	EH	7579	H	83
EH	7244	G	118	EH	7408	H	80	EH	7581	H	111
EH	7245	H	115	EH	7411	H	111	EH	7582	H	111
EH	7248	H	120	EH	7412	H	111	EH	7583	H	112
EH	7251	H	120	EH	7416	H	77	EH	7584	H	112
EH	7253	H	119	EH	7417	H	77	EH	7585	H	112
EH	7254	H	116	EH	7418	H	80	EH	7586	H	112
EH	7255	H	116	EH	7419	H	77	EH	7587	H	112
EH	7257	H	116	EH	7420	H	77	EH	7588	H	112
EH	7258	H	119	EH	7434	G	106	EH	7596	G	114
EH	7259	H	119	EH	7435	G	109	EH	7597	G	114
EH	7260	H	84	EH	7436	G	93	EH	7603	H	129
EH	7268	H	101	EH	7438	G	93	EH	7605		130
EH	7269	H	100	EH	7440	G	109	EH	7609		130
EH	7270	H	100	EH	7444	G	93	EH	7610		83
EH	7271	H	100	EH	7446	H	93	EH	7611		130
EH	7272	H	100	EH	7448	G	93	EH	7612		130
EH	7273	H	100	EH	7454	H	115	EH	7623	G	131
EH	7274	H	100	EH	7456	E	114	EH	7624	E	99
EH	7275	H	100	EH	7457	G	109	EH	7625	E	99
EH	7276	H	100	EH	7458	G	109	EH	7626	H	94
EH	7277	H	101	EH	7459	E	114	EH	7633	H	108
EH	7278	H	101	EH	7459	LG	114	EH	7637	H	88
EH	7279	H	101	EH	7464	G	109	EH	7638	H	88
EH	7280	H	101	EH	7465	G	97	EH	7640	H	95
EH	7281	H	102	EH	7466	E	93	V	7642	E	53
EH	7282	H	102	EH	7467	G	97	EH	7660	H	108
EH	7283	H	102	EH	7469	E	114	EH	7662	H	95
EH	7284	H	122	EH	7469	L G	114	EH	7663	H	95
EH	7285	H	122	EH	7470	E	114	EH	7665	H	95
EH	7286	H	122	EH	7471	H	118	EH	7666	G	125
EH	7287	H	122	EH	7472	H	118	EH	7667	G	124
EH	7288	H	124	EH	7473	G	127	EH	7668	G	127
EH	7289	H	124	EH	7474	H	119	EH	7670	E	125
EH	7290	H	124	EH	7475	H	119	EH	7673	H	82
EH	7291	H	125	EH	7476	H	116	EH	7674	H	82
EH	7292	H	125	EH	7477	H	116	EH	7677	G	129
EH	7293	H	125	EH	7478	H	116	EH	7677	C G	129
EH	7294	H	125	EH	7480	H	117	EH	7679	H	82
EH	7295	H	125	EH	7481	H	116	EH	7680	G	129
EH	7297	H	125	EH	7491	H	78	EH	7683	H	88
EH	7298	H	125	EH	7492	H	78	EH	7684	H	88
EH	7299	H	122	EH	7499	H	113	EH	7687	H	83
				EH	7688	H		EH	7688	H	83
				EH	7689	H		EH	7689	H	88
				EH	7690	H		EH	7690	H	125
				EH	7691	H		EH	7691	H	124
				EH	7692	H		EH	7692	H	122
				EH	7693	H		EH	7693	H	122
				EH	7694	H		EH	7694	H	122
				EH	7695	H		EH	7695	H	125
				MPP	7695	H		MPP	7695	H	126
				EH	7697	H		EH	7697	H	123
				EH	7700	E		EH	7700	E	147
				V	7700	E		V	7700	E	51
				MEH	7710	L G		MEH	7710	L G	81
				MEH	7710	P G		MEH	7710	P G	80
				V	7710	E		V	7710	E	51
				EH	7711	G G		EH	7711	G G	81
				EH	7712	L G		EH	7712	L G	80
				MEH	7712	N		MEH	7712	N	80
				EH	7713	L G		EH	7713	L G	81
				MEH	7714	L G		MEH	7714	L G	81
				EH	7715	L G		EH	7715	L G	80
				MEH	7715	N		MEH	7715	N	80
				EH	7716	L G		EH	7716	L G	81
				MEH	7716	N		MEH	7716	N	81
				EH	7717	L G		EH	7717	L G	81
				MEH	7717	N		MEH	7717	N	81
				EH	7718	L G		EH	7718	L G	80
				MEH	7718	L G		MEH	7718	L G	80
				EH	7719	L G		EH	7719	L G	80
				MEH	7719	L G		MEH	7719	L G	80
				EH	7722	H		EH	7722	H	83
				EH	7723	H		EH	7723	H	83
				EH	7724	H		EH	7724	H	108
				V	7730	E		V	7730	E	51
				EH	7733	H		EH	7733	H	79
				EH	7735	H		EH	7735	H	79
				V	7740	E		V	7740	E	51
				VCP	7740	E		VCP	7740	E	38
				EH	7741	E		EH	7741	E	79
				EH	7750	H		EH	7750	H	89
				V	7750	E		V	7750	E	51
				VCP	7750	E		VCP	7750	E	38
				EH	7751	H		EH	7751	H	95
				EH	7755	H		EH	7755	H	85
				EH	7756	H		EH	7756	H	125
				MPP	7756	H		MPP	7756	H	126
				EH	7757	H		EH	7757	H	125
				MPP	7757	H		MPP	7757	H	126
				EH	7758	H		EH	7758	H	125
				MPP	7758	H		MPP	7758	H	126
				EH	7759	H		EH	7759	H	123
				EH	7760	H		EH	7760	H	84
				V	7760	G		V	7760	G	52
				EH	7761	H		EH	7761	H	95
				EH	7763	H		EH	7763	H	108
				EH	7764	H		EH	7764	H	124
				MPP	7764	H		MPP	7764	H	126
				EH	7765	G		EH	7765	G	125
				EH	7770	H		EH	7770	H	118
				EH	7771	H		EH	7771	H	118
				EH	7772	H		EH	7772	H	118
				EH	7774	H		EH	7774	H	118
				EH	7778	H		EH	7778	H	118
				EH	7787	H		EH	7787	H	119
				EH	7788	H		EH	7788	H	119
				EH	7790	H		EH	7790	H	99
				V	7790	H		V	7790	H	51
				VCP	7790	H		VCP	7790	H	38
				EH	7791	H		EH	7791	H	100
				EH	7792	H		EH	7792	H	99
				EH	7793	H		EH	7793	H	100
				EH	7794	H		EH	7794	H	100
				EH	7795	H		EH	7795	H	100
				EH	7796	H		EH	7796	H	100

ATRALOC Bestellnummern

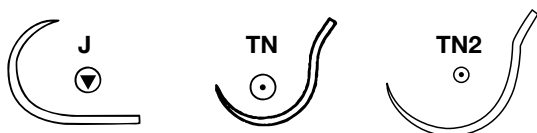
Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite	Bestellnummer		Seite
EH 7797	H	100	EH 7939	H	100	OM 8349	G	129	8832	H	112
EH 7798	H	100	EH 7940	H	99	3OM 8367	G	129	8833	H	112
EH 7799	H	100	V 7940	E	49	8411	H	113	8834	H	112
EH 7800	H	101	EH 7942	H	99	8412	H	113	8841	H	115
MPE 7800	H	102	EH 7943	H	99	8423	H	113	8870	H	111
V 7800	H	51	EH 7945	H	99	8424	H	113	8871	H	111
VCP 7800	H	38	V 7950	E	48	8425	H	113	8872	H	111
Z 7800	G	66	VCP 7950	E	38	8521	H	112	8880	H	116
EH 7801	H	101	EH 7953	H	101	8522	H	112	8881	H	116
MPE 7801	H	102	EH 7954	H	101	8523	H	112	8889	H	116
EH 7802	H	101	MPE 7954	H	102	8527	G	113	8890	H	116
EH 7803	H	101	EH 7955	H	101	8528	H	112	8925	H	119
EH 7804	H	101	EH 7956	H	101	8529	H	112	8934	H	117
MPE 7804	H	102	MPE 7956	H	102	8556	H	111	8935	H	117
EH 7805	H	101	EH 7957	H	101	8557	H	111	M 8935		115
EH 7806	H	101	EH 7961	G	122	8558	H	111	8936	H	117
EH 7807	H	100	EH 7962	G	122	8580	H	117	8937	H	117
EH 7808	H	101	EH 7963	G	122	8581	H	117	M 8941		115
MPE 7808	H	102	EH 7964	G	123	8592	H	118	8942	H	118
EH 7809	H	100	EH 7970	H	120	8622	H	123	8943	H	118
V 7810	G	51	V 7970	E	48	8629	H	122	8951	H	117
EH 7811	E	111	EH 7971	H	120	V 8643	E	35	8952	H	117
EH 7812	E	111	V 7971	E	48	V 8644	E	35	8953	H	117
EH 7813	E	111	EH 7972	E	120	V 8645	E	35	8954	G	117
EH 7814	E	111	EH 7975	H	120	V 8646	E	35	8955	G	117
EH 7815	G	94	EH 7976	H	120	V 8647	E	35	8963	H	118
V 7820	E	49	EH 7977	H	120	8648	H	124	8964	H	118
VCP 7820	E	38	EH 7980	G	97	V 8653	E	35	M 8966		115
EH 7821	H	99	V 7980	E	49	V 8654	E	35	8967	H	115
EH 7822	H	99	VCP 7980	E	38	V 8655	H	35	8975	H	118
EH 7823	H	99	EH 7981	G	97	8661	H	122	8976	H	118
EH 7824	H	99	EH 7985	G	97	8665	H	122	8977	H	118
EH 7825	H	100	EH 7990	G	96	8675	H	123	V 8978	E	35
EH 7826	H	100	V 7990	E	48	8681	H	124	V 8979	E	35
EH 7827	H	100	EH 7991	G	96	MPP 8681	H	126	V 8980	E	35
EH 7828	E	118	EH 7995	G	96	8682	H	125	V 8981	E	35
EH 7829	H	119	EH 7997	G	127	MPP 8682	H	126	9033	G	97
EH 7830	H	111	EH 7998	G	98	8683	H	122	VCP 9213	H	38
V 7830	E	111	EH 7999	G	98	8684	H	122	V 9240	H	48
EH 7834	L G	51	EH 8010	H	117	8685	H	123	MPVR 9360	H	34
EH 7835	H	111	EH 8014	H	117	8686	H	124	V 9360	H	33
V 7840	E	51	EH 8021	E	121	MPP 8686	H	126	MPVR 9380	H	34
VCP 7840	E	38	EH 8022	H	121	MPP 8687	H	126	V 9380	H	33
Y 7840	G	26	MEH 8024	G	121	8689	H	123	V 9450	H	31
EH 7845	H	79	MEH 8024	J G	121	8695	H	124	V 9460	H	31
V 7850	E	51	EH 8030	H	121	MPP 8695	H	126	MPV 9526	H	61
VCP 7850	E	38	EH 8031	H	121	8697	H	124	MPV 9527	H	61
EH 7851	H	79	EH 8032	H	121	MPP 8697	H	126	V 9580	H	31
V 7860	E	52	MEH 8033	J G	121	8698	H	124	V 9590	H	31
EH 7896	G	127	EH 8034	G	121	MPP 8698	H	126	MPZ 9624	H	74
EH 7897	G	127	MEH 8034	G	121	8699	H	124	MPZ 9626	H	74
EH 7900	G	127	MEH 8034	J G	121	MPP 8699	H	126	VCP 9781	H	45
V 7902	H	32	EH 8037	H	121	8701	H	115	VCP 9791	H	45
EH 7905	H	78	MEH 8040	G	121	M 8702	G	120	MPVR 9913	H	34
EH 7908	H	77	MEH 8040	J G	121	8704	H	116	MPVR 9932	H	34
EH 7909	H	77	EH 8050	H	117	8706	H	116	MPVR 9933	H	34
V 7910	E	49	EH 8051	H	117	M 8706	G	116	MPE24012	H	102
EH 7920	H	123	EH 8061	H	113	8707	H	120			
V 7920	E	49	EH 8066	H	112	8710	H	111			
VCP 7920	E	38	V 8071	E	51	8711	H	111			
EH 7921	H	117	EH 8073	H	111	8717	H	117			
EH 7922	G	127	EH 8074	H	111	8719	H	120			
EH 7923	H	124	EH 8075	H	111	8720	H	116			
EH 7930	H	101	EH 8078	H	112	8721	H	120			
MPE 7930	H	102	EH 8080	H	112	8725	B G	116			
V 7930	E	49	EH 8081	H	112	8740	H	115			
VCP 7930	E	38	EH 8082	H	112	8741	H	115			
EH 7931	H	101	EH 8083	H	112	8750	G	122			
MPE 7931	H	102	EH 8086	H	113	8766	H	115			
EH 7932	H	101	EH 8087	H	113	8767	H	115			
EH 7933	H	101	EH 8090	H	113	M 8767		115			
MPE 7933	H	102	8207	H	114	8776	H	115			
EH 7937	H	100	8335	H	115	8807	H	120			
EH 7938	H	100	6OF 8348	G	129	8831	H	112			

Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm

⊙
1/2 KREIS Rundkörper



Trokarinzisionsnadeln



Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm


3/8 KREIS Rundkörper

BV8



BV6



BV75-4



BV4



BV2



BV130-5



BV175-6



BV175-7



BV1



BV175-8



BV1X



BV



C1



C1X



BB



TE



TE1



TE6




5/8 KREIS Rundkörper

UR6



UR5



UR4




1/2 KREIS stumpfe Rundkörper

BP3



BP2



BP1




3/8 KREIS stumpfe Rundkörper

BBS



BPS4




1/2 KREIS stumpfe Rundkörper
mit Sicherheitsspitze Ethiguard

BT1



BT2



BT3



BT4




1/2 gebogene stumpfe Rundkörper

PB6W



Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm

Asymptotische Rundkörper

ABV1



AC1



ARB1



ASH1

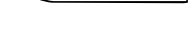


ASH



Ski-Rundkörper

SHT



gerade Rundkörper

ST4



ST3



ST1



ST



STA/STAW



STXW



ASW1



1/2 KREIS flache Rundkörper

TF1-plus



TF-plus



RB1-plus



SH1-plus



SH-plus



MH1-plus



MH-plus



CT3-plus



CT2-plus



CT1-plus



CT-plus



CTX-plus



1/2 KREIS flache Rundkörper VISI BLACK

JTF



JRB1



JB1



JB



JMH1



JMH



3/8 KREIS flache Rundkörper VISI Black

JBB



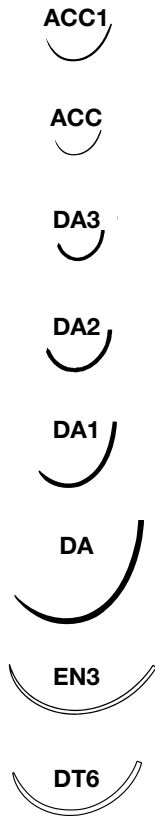
Ski flache Rundkörper VISI Black

JBT



Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm

 Asymptotische schneidende Rundkörper



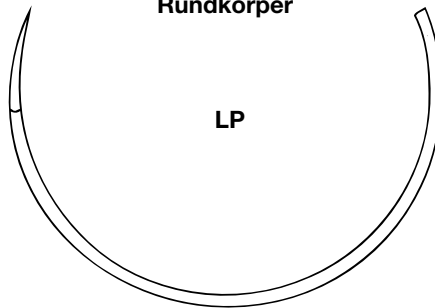
 $\frac{3}{8}$ KREIS schneidende Rundkörper mit Kurzschliff



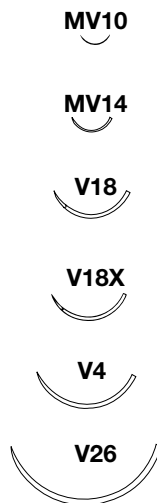
 $\frac{1}{2}$ KREIS schneidende Rundkörper mit Kurzschliff



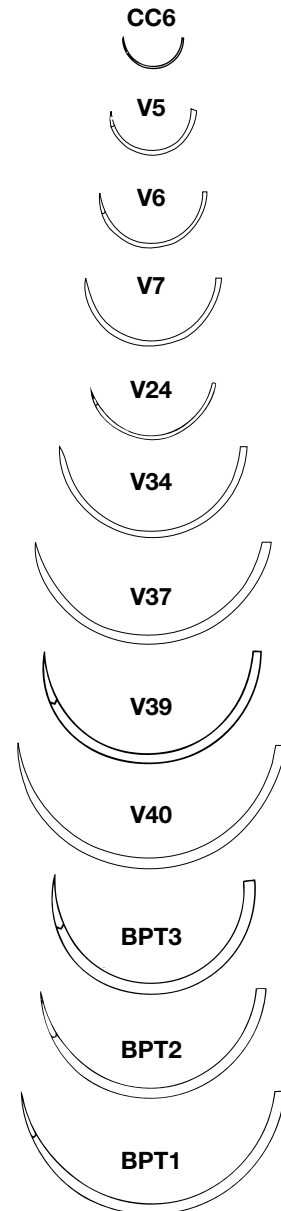
 $\frac{5}{8}$ KREIS schneidende Rundkörper



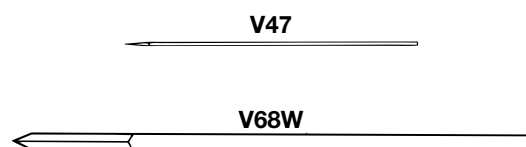
 $\frac{3}{8}$ KREIS schneidende Rundkörper



 $\frac{1}{2}$ KREIS schneidende Rundkörper



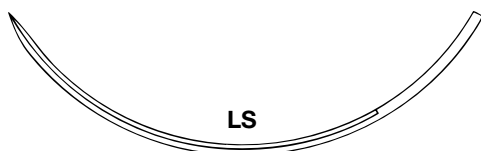
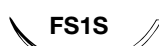
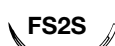
 gerade schneidende Rundkörper



STP10

Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm

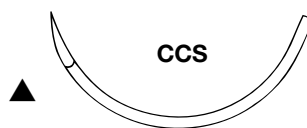
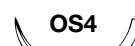
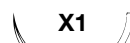
▼
3/8 KREIS schneidend



▼
1/2 gebogen schneidend



▼
1/2 KREIS schneidend

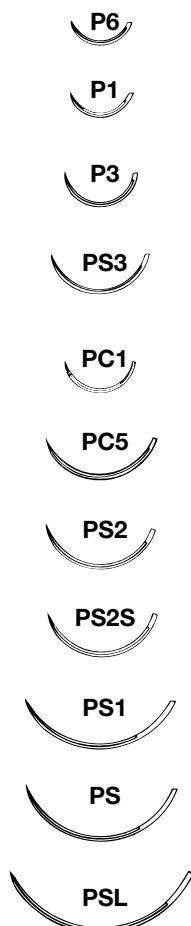


▼
1/2 KREIS schneidend
mit Mikrospitze

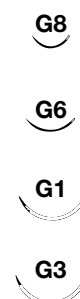


Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm

▼
 $\frac{3}{8}$ KREIS schneidend
 mit Präzisionsspitze/PRIME/MULTIPASS



▼
 $\frac{3}{8}$ KREIS schneidend
 mit Mikrospitze



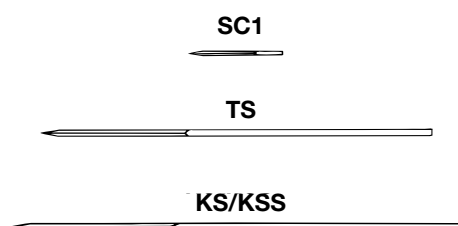
▼
 $\frac{1}{2}$ KREIS schneidend
 mit Präzisionsspitze



▼
 gerade schneidend
 mit Präzisionsspitze



▼
 gerade schneidend



Nadelübersicht über unser gesamtes **ATRALOC®** Programm


**1/8 KREIS Spatula
mit Mikrospitze**

UCS26



**1/4 KREIS Spatula
mit Mikrospitze**

GS8



**3/8 KREIS Spatula
mit Mikrospitze**

GS13


UCS35


CS140-6


CS35C


GS12


GS9



**gerade Spatula
mit Mikrospitze**

STC6



1/4 KREIS Spatula

SM1


S24


S14


S4


S29




RD1


CTC6L



3/8 KREIS Spatula

 **SM2**



**skiförmige Spatula
mit Mikrospitze**

CSS160



1/2 KREIS Spatula

S22


S12



**Asymptotische Spatula
mit Mikrospitze**

UCSA48


CSA48C



**1/2 KREIS Spatula
mit Mikrospitze**

UCS44


CS44C


GS14


GS10


Chirurgische Nadeln mit Federöhr



1/2 KREIS Rundkörper (kräftig)



FTC20K



FCT18K



FCT16K



FCT14K



FCT12K



FCT10K



FCT8K



FCT6K



FCT4K



5/8 KREIS Rundkörper (kräftig)



FUR20K



FUR18K



FUR16K



FUR14K



FUR12K



FUR10K



FUR8K



FUR6K



FUR4K



1/2 KREIS schneidend (kräftig)



FCP16K



FCP14K



FCP12K



FCP10K



FCP8K



FCP6K



FCP4K



1/2 KREIS Rundkörper

FCT26



FCT24



FCT22



FCT20



FCT18



FCT16



FCT14



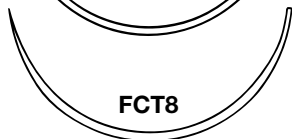
FCT12



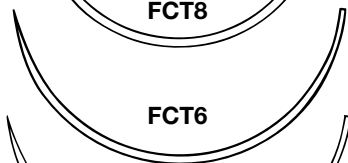
FCT10



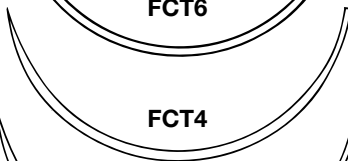
FCT8



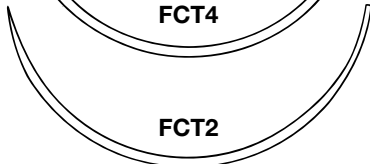
FCT6



FCT4



FCT2



1/2 KREIS Rundkörper (schlank)

FSH26



FSH24



FSH22



FSH20



FSH18



FSH16



FSH14



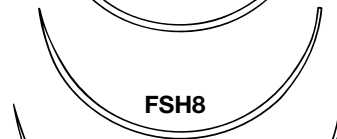
FSH12



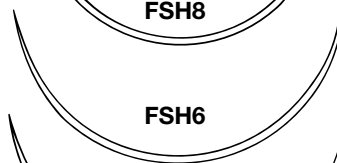
FSH10



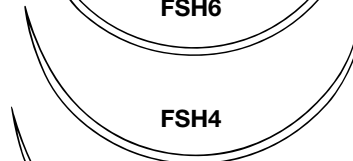
FSH8



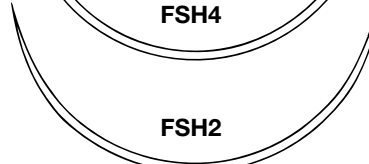
FSH6



FSH4

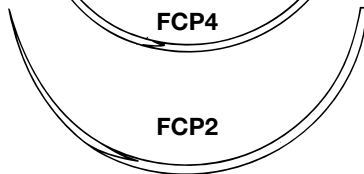
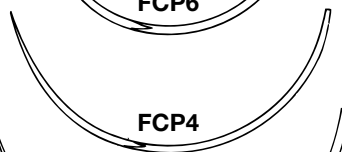


FSH2

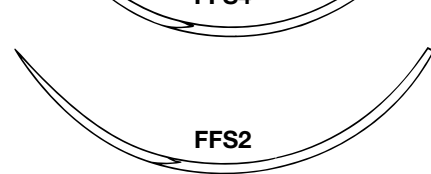
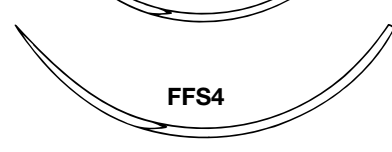




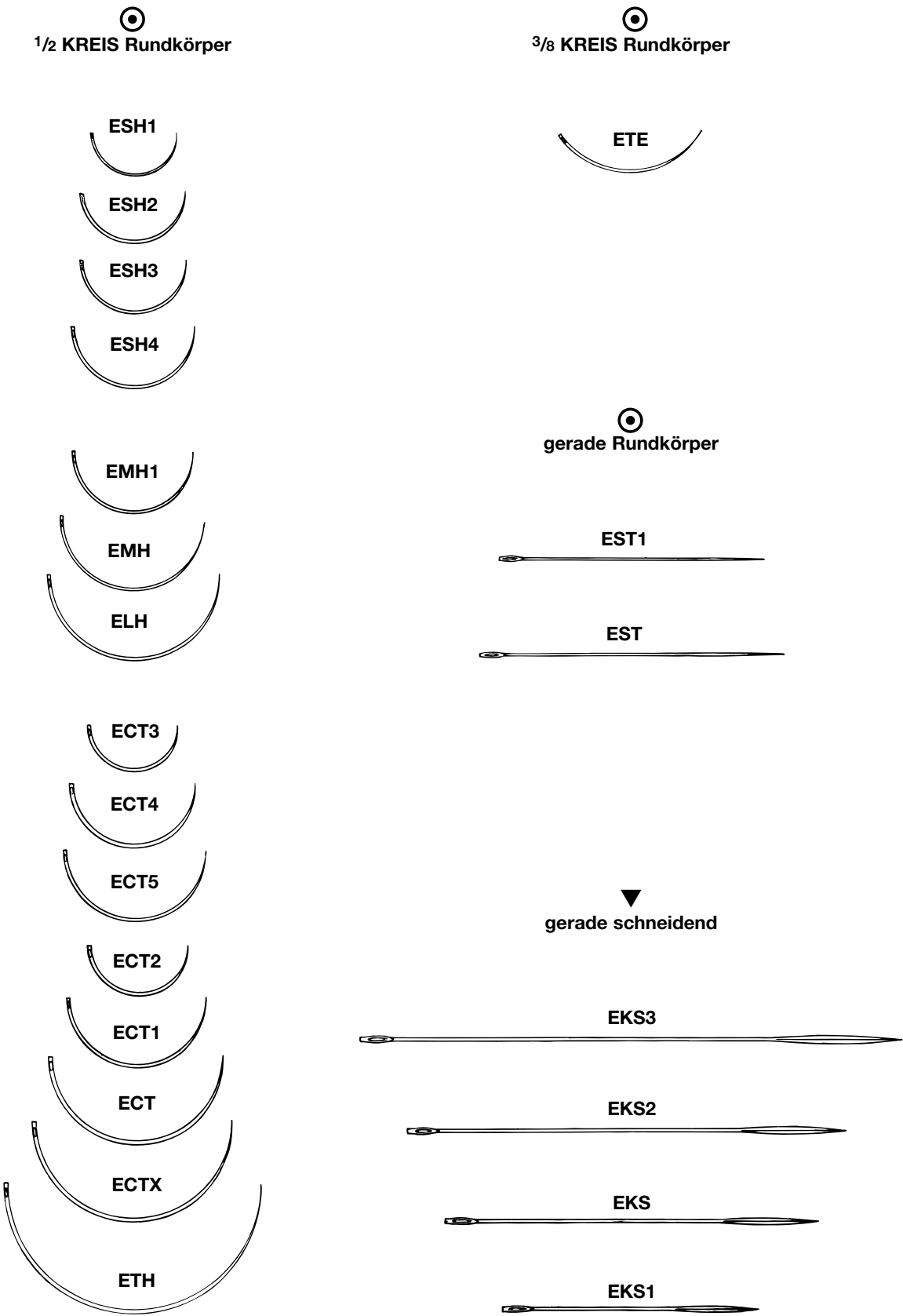
▲
1/2 KREIS schneidend



▲
3/8 KREIS schneidend

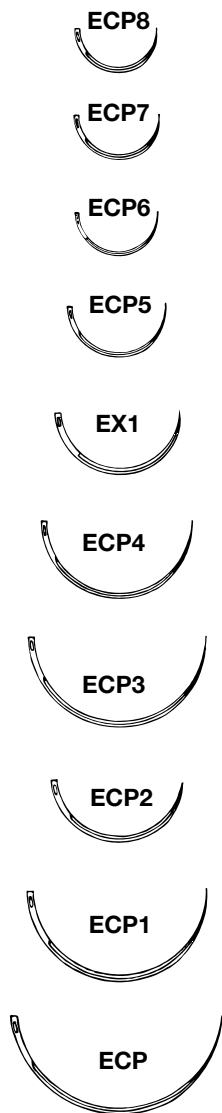


Chirurgische Nadeln mit geschlossenem Öhr



Chirurgische Nadeln mit geschlossenem Ohr

▼
 $\frac{1}{2}$ KREIS schneidend



▼
 $\frac{3}{8}$ KREIS schneidend



BESCHREIBUNG

MONOCRYL® ist ein steriler, synthetischer, resorbierbarer, monofiler Faden, der aus einem Copolymer aus Glycolid und ε-Caprolactam besteht. Poliglecapron 25-Copolymer hat weder antigene noch pyrogene Eigenschaften und verursacht während der Resorption lediglich eine geringe Gewebereaktion. Durch Zusatz von D & C Violett Nr. 2 während der Polymerisation wird MONOCRYL® violett gefärbt. Das Nahtmaterial ist auch ungefärbt erhältlich. MONOCRYL® Nahtmaterial steht in verschiedenen Stärken und Längen zur Verfügung.

ANWENDUNGSGEBIETE

MONOCRYL® ist für die Adaption von Weichgeweben und/oder für Ligaturen geeignet, bei denen die Verwendung eines resorbierbaren Fadens indiziert ist.

WIRKUNG

MONOCRYL® Nahtmaterial verursacht im Gewebe eine minimale entzündliche Gewebsreaktion, und es kommt zum Einsprossen von Bindegewebszellen. Die allmähliche Abnahme der Reißkraft und die Resorption des MONOCRYL® Nahtmaterials sind eine Folge von hydrolytischen Vorgängen, bei denen das Polymer zu Adipinsäure abgebaut wird, die anschließend resorbiert und im Körper metabolisiert wird. Bei der Resorption kommt es zunächst zu einem Rückgang der Reißkraft, gefolgt von einem Verlust der Masse.

VIOLETT		UNGEFÄRBT	
Nach Implantation verbleibende Reißkraft		Nach Implantation verbleibende Reißkraft	
	ca.		ca.
7 Tage	60%		50%
14 Tage	30%		20%
Die ursprüngliche Reißkraft ist 28 Tage postimplantationem vollständig verschwunden.		Die ursprüngliche Reißkraft ist 21 Tage postimplantationem vollständig verschwunden.	

Zwischen dem 90. und dem 120. Tag ist die Resorption im wesentlichen abgeschlossen.

GEGENANZEIGEN

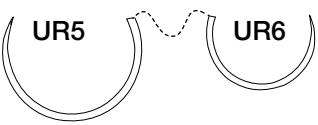
Da es sich bei MONOCRYL® (ungefärbt und violett) um resorbierbare chirurgische Fäden handelt, dürfen sie nicht verwendet werden, wenn eine dauerhafte Approximation des Gewebes unter Belastung erforderlich ist.

MONOCRYL® ungefärbt darf nicht für abdominale Verschlüsse oder zur Approximation von Fasciengewebe eingesetzt werden.

MONOCRYL, Poliglecapron, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	26,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 605 H
	26,0	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 602 H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	A 1 H
	36,4	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 375 H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 376 H
	36,4 + 26,0	violett monofil	2-0	3	0,90	24	Y 610 E

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☾

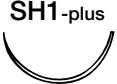
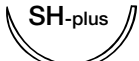
	10,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Y 134 H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Y 432 H
		violett monofil	5-0	1	0,70	36	Y 925 H
	17,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Y 212 H
	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Y 213 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 214 H
		violett monofil CR	4-0	1,5	8*0,45	12	Y 714 G
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 215 H
	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Y 3030 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 3040 H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 3050 H
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,45	12	Y 3715 G

CR = Abziehbare Nadel

MONOCRYL, Poliglecapon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

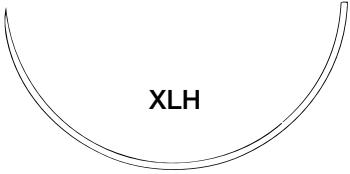
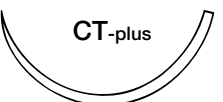
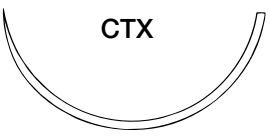
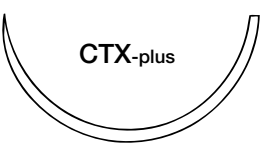
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☾

 VISI BLACK	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Y 3213	H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 3214	H
 SH1-plus	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 218	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 219	H
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,45	12	Y 793	G
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 220	H
 VISI BLACK	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 3100	H
		violett monofil CR	4-0	1,5	8*0,45	12	Y 3866	G
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 3110	H
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,45	12	Y 3793	G
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 3120	H
 VISI BLACK	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 3218	H
		violett monofil	4-0	1,5	0,90	36	Y 5218	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 3219	H
 SH-plus	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 415	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 416	H
		violett monofil	3-0	2	0,90	36	Y 242	H
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,45	12	Y 864	G
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 417	H
		violett monofil	2-0	3	0,90	36	Y 243	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 418	H
 VISI BLACK	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 3150	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 3160	H
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,45	12	Y 3864	G
		violett monofil CR	3-0	2	8*0,70	12	Y 7840	G
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 3170	H
 VISI BLACK	26,0	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Y 3416	H
		violett monofil	3-0	2	0,90	36	Y 5270	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 3417	H
 MH1	31,0	violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 247	H
 MH1-plus	31,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 246	H

MONOCRYL, Poliglecapron, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☾

 MH-plus	36,4	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 227	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 228	H
		violett monofil	1	4	0,70	36	Y 229	H
		violett monofil	1	4	0,90	36	Y 230	H
 XLH	70,0	ungefärbt monofil	1	4	0,70	12	Y 74	G
 CT2-plus	26,0	violett monofil	2-0	3	0,90	36	Y 326	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 270	H
		violett monofil	0	3,5	0,90	36	Y 330	H
		violett monofil	1	4	0,90	36	Y 331	H
 CT1-plus	36,4	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 259	H
		violett monofil	2-0	3	0,90	36	Y 945	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Y 260	H
		violett monofil	0	3,5	0,90	36	Y 946	H
		violett monofil	1	4	0,70	36	Y 261	H
		violett monofil	1	4	0,90	36	Y 947	H
 CT-plus	40,0	violett monofil	0	3,5	0,90	36	Y 958	H
		violett monofil	1	4	0,90	36	Y 959	H
 CTX	48,0	violett monofil	2-0	3	0,90	12	Y 979	G
 CTX-plus	48,0	violett monofil	1	4	0,90	12	Y 977	G

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☿

 V7	26,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Y 999	H
 V34	36,4	violett monofil	1	4	0,90	36	Y 919	H

MONOCRYL, Poliglecapon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

asymptotische schneidende Rundkörper Nadel

 DA1 	13,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	12	Y 4950	G

3/8 Kreis schneidende Nadel

 FS2	19,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	Y 424	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 292	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 422	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	Y 293	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	Y 423	H
 FS1	24,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 291	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	Y 442	H
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,70	36	Y 443	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 P1 PRIME	11,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Y 490	H
		ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	36	Y 489	H
 P3 PRIME	13,0	violett monofil	5-0	1	0,45	36	Y 491	H
		violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 470	H
		ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	36	Y 492	H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	Y 493	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 494	H
 P3 	13,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	Y 4930	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 4940	H
 PS2 PRIME	19,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 498	H
		violett monofil	3-0	2	0,45	36	Y 499	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 496	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	Y 497	H
 PS2 	19,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Y 4960	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	Y 4970	H

MONOCRYL, Poliglecapron, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 PS1 PRIME	24,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	Y 495	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	Y 683	H
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,70	36	Y 684	H
 PS1 VISI BLACK	24,0	ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	Y 6830	H
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,45	12	Y 6840	G

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

 P1 MultiPass	11,0	ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPY 489	H
 P3 MultiPass	13,0	ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPY 492	H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	MPY 493	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPY 494	H
 PS3 MultiPass	16,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	MPY 500	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPY 501	H
 PS2 MultiPass	19,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPY 498	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPY 496	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	MPY 426	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	MPY 497	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	MPY 427	H
 PS1 MultiPass	24,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	MPY 935	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	MPY 683	H
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,70	36	MPY 684	H
 PS MultiPass	26,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	MPY 3212	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	36	MPY 3213	H

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

MONOCRYL, violett monofil

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer		
	USP	metric				
2 x 70 cm	2-0	3	36	Y	625	H

VICRYL® rapide

BESCHREIBUNG

Bei VICRYL® rapide handelt es sich um ein synthetisches, steriles, chirurgisches Nahtmaterial, das resorbierbar ist und aus einem Copolymer aus 90 % Glykolid und 10 % L-Lactid besteht.

Charakteristisch für VICRYL® rapide ist der schnelle Verlust der Reißkraft. Dies wird durch die Verwendung von Polymaterial erreicht, welches ein geringeres Molekulargewicht aufweist als das klassische VICRYL® Nahtmaterial. Der geflochtene VICRYL® rapide Faden trägt eine Beschichtung, die zu gleichen Teilen aus Copolymer Polyglactin 370 und Calciumstearat zusammengesetzt ist. Polyglactin 910 und Polyglactin 370 sowie Calciumstearat haben weder antigene noch pyrogene Eigenschaften und verursachen während der Resorption lediglich eine geringe Gewebereaktion. VICRYL® rapide Nahtmaterial ist ungefärbt und auch, durch Zusatz von D & C Violett Nr. 2 während der Polymerisation, gefärbt erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

VICRYL® rapide ist zur Adaption von Weichgewebe vorgesehen, wenn eine schnelle Resorption gewünscht ist. VICRYL® rapide eignet sich aufgrund seines Reißkraftprofils für Hautnähte, insbesondere in der Kinderchirurgie, sowie Episiotomien, Zirkumzisionen und Subcutan-Schleimhautnähte in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Auch in der Ophthalmochirurgie wird VICRYL® rapide erfolgreich eingesetzt, z. B. für Bindehautnähte.

WIRKUNG

In vivo Studien bei subcutaner und intramuskulärer Implantation von VICRYL® rapide Nahtmaterial zeigen, dass 5 Tage nach der Implantation 50 % der Ausgangsreißkraft verblieben sind. Nach etwa 10-14 Tagen ist keine Reißkraft mehr vorhanden. Die Resorption des Nahtmaterials ist nach etwa 42 Tagen abgeschlossen. VICRYL® rapide Nahtmaterial verursacht anfangs eine geringe Gewebereaktion. Die fortschreitende Abnahme der Reißkraft sowie die Resorption des VICRYL® rapide Nahtmaterials erfolgen durch hydrolytischen Abbau des Copolymers zu Glykolsäure und Milchsäure, die anschließend resorbiert und im Körper metabolisiert werden. Bei der Resorption kommt es zunächst zu einem Rückgang an Reißkraft, gefolgt von einem Verlust an Masse.

GEGENANZEIGEN

Aufgrund der schnellen Reißkraftabnahme darf VICRYL® rapide nicht zur länger andauernden Geweheadaption unter Zugbelastung eingesetzt werden, ebenfalls nicht, wenn Wundunterstützung von mehr als 7 Tagen erforderlich ist. VICRYL® rapide Nahtmaterial ist weder zur Ligatur noch zur Anwendung am Herzen, dem zentralen Kreislaufsystem oder an Nervengewebe vorgesehen.

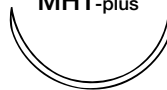
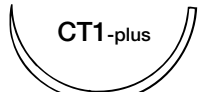
VICRYL rapide, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

 UR5	36,5	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	VA 1673	H

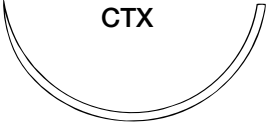
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☹

 RB1-plus	17,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,70	36	V 2130	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 2140	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 2150	H
 SH1	22,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 2180	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 2190	H
 SH1-plus	22,0	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 62	H
 SH-plus	26,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 4150	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 4160	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 4170	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	V 66	H
 MH1-plus	31,0	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,9	36	PV 1694	H
 CT3-plus	22,0	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 2143	H
 CT2	26,0	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 55	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	V 56	H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,70	36	V 57	H
 CT1-plus	36,4	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	V 9450	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 9460	H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 70	H
 CT-plus	40,0	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	PM 1694	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 9580	H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 9590	H

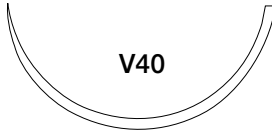
VICRYL rapide, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☹

	48,0	ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	X 605 H
	31,0	ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	TC 1696 H

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☿

	26,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,90	36	V 1003 H
	36,4	ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	V 5170 H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 5180 H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 5190 H
	48,0	ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 7191 H

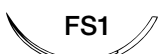
1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	17,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 4550 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 76 H
	22,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 7902 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	V 81 H

VICRYL rapide, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

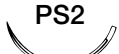
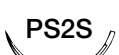
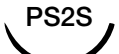
3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS2	19,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 2910	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 2930	H
 FS2S	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 2920	H
 FS1	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 4421	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 4420	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	V 4431	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 4430	H

gerade schneidende Nadel ▼

 SC1	13,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	BH 1643	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 P1 PRIME	11,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	36	V 32	H
 P3 PRIME	13,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 4930	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 4940	H
 PS2 PRIME	19,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 4970	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 4270	H
 PS2 VISI BLACK	19,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 4971	H
 PS2S	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 4960	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 4260	H
 PS2S VISI BLACK	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 4961	H
 PS1	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 6830	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 9360	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	V 6840	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 9380	H

VICRYL rapide, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MULTIPASS ▼

P1 MultiPass 	11,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MPVR 32	H
		ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MPVR 9913	H
		ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,70	36	MPVR 489	H
P3 MultiPass 	13,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	MPVR 4930	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MPVR 4940	H
PS2 MultiPass 	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	MPVR 4260	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	MPVR 4970	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	MPVR 4270	H
PS1 MultiPass 	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	MPVR 9360	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	MPVR 9380	H
PS MultiPass 	26,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	MPVR 9932	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	MPVR 9933	H

3/8 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

GS12 	5,5	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 1220	G
GS9 	6,5	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 1210	G
		violett geflochten	7-0	0,5	0,30	12	V 1211	G
		violett geflochten	6-0	0,7	0,30	12	EC 1534	G
GS9 GS9 	6,5	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 39	G
		violett geflochten	7-0	0,5	0,45	12	V 38	G

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

VICRYL RAPIDE, ungefärbt, geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	4-0	1,5	24	V 8643	E
	3-0	2	24	V 8644	E
	2-0	3	24	V 8645	E
	0	3,5	24	V 8646	E
	1	3,5	24	V 8647	E
6 x 45 cm	3-0	2	24	V 8978	E
	2-0	3	24	V 8979	E
	0	3,5	24	V 8980	E
	1	4	24	V 8981	E
2 x 70 cm	2-0	3	24	V 8653	E
	0	3,5	24	V 8654	E
	1	4	36	V 8655	H

VICRYL® PLUS

BESCHREIBUNG

Bei VICRYL® PLUS handelt es sich um ein synthetisches, steriles, resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90% Glykolid und 10% L-Lactid besteht.

Das geflochtene VICRYL® PLUS Nahtmaterial enthält eine Beschichtung, die zu gleichen Teilen aus einem Copolymer aus Glykolid und Lactid (Polyglactin 370) und Calciumsterat besteht. Polyglactin 910 Copolymer und Polyglactin 370 mit Calciumsterat haben weder antigene noch pyrogene Eigenschaften und verursachen während der Resorption lediglich eine geringe Gewebereaktion.

VICRYL® PLUS Nahtmaterial enthält den über ein breites Spektrum wirksamen antibakteriellen Wirkstoff Irgarcare MP (Triclosan) in einer Konzentration von nicht mehr als 150 µg/m.

VICRYL® PLUS Nahtmaterial wird durch Zusatz von D+C violett Nr. 2 (Color-Index-Nummer: 60725) während der Polymerisation gefärbt. Das Nahtmaterial ist auch ungefärbt erhältlich und steht in verschiedenen Stärken und Längen zur Verfügung.

ANWENDUNGSGEBIETE

VICRYL® PLUS Nahtmaterial ist zur Adaptation von Weichgewebe und/oder zur Ligatur vorgesehen, einschließlich der mikrochirurgischen Versorgung von Gefäßen mit einem Durchmesser von weniger als 2 mm. Die Sicherheit und Wirksamkeit von VICRYL® PLUS Nahtmaterial für kardiovaskuläre, ophtalmologische und neurochirurgische Anwendungen wurde bisher noch nicht nachgewiesen.

WIRKUNG

VICRYL® PLUS Nahtmaterial verursacht im Gewebe eine minimale akute entzündliche Reaktion, und es kommt zum Einsprossen von Bindegewebszellen. Die allmähliche Abnahme der Reißkraft und die Resorption des VICRYL® PLUS Nahtmaterials geschieht durch die Hydrolyse des Copolymers zu Glykol- und Milchsäure, welche anschließend resorbiert und im Körper metabolisiert werden. Bei der Resorption kommt es zuerst zu einer Abnahme der Reißkraft und erst dann zu einem Verlust der Masse. Die gesamte Reißkraft ist mit Abschluss der fünften Woche nach der Implantation vollständig verschwunden. Nach 56 bis 70 Tagen ist die Resorption abgeschlossen.

Tage nach der Implantation	Verbleibende Reißkraft (% der ursprünglichen Reißkraft)
14 Tage	75%
21 Tage (6-0 und größer)	50%
21 Tage (7-0 und kleiner)	40%
28 Tage (6-0 und größer)	25%

Anhand von Hemmzonenstudien wurde nachgewiesen, dass VICRYL® PLUS Nahtmaterial die Kolonialisierung des Nahtmaterials durch Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis sowie deren methicillin-resistente Stämme hemmt.

VICRYL® PLUS Nahtmaterial ist konzeptionell geeignet, postoperative Infektionen vorzubeugen. Die klinische Wirksamkeit dieser Eigenschaft ist nicht nachgewiesen.

GEGENANZEIGEN

VICRYL® PLUS ist ein resorbierbares Nahtmaterial und daher nicht geeignet für die Adaptation von Gewebe, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert. VICRYL® PLUS Nahtmaterial sollte nicht bei Patienten mit bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen Irgarcare MP (Triclosan) eingesetzt werden.

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel

	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 602 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 603 H
	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 2593 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 2592 H
	36,4	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 376 H

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☾

	13,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	VCP 925 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 924 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	VCP 2543 E
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,70	36	VCP 2672 H
	17,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	VCP 303 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 304 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	VCP 734 E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	VCP 799 E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 305 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 733 E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 306 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 214 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 215 H
	17,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 3040 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	VCP 7340 E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 3050 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 7330 E
	22,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 310 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	VCP 794 E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	12	VCP 798 G
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 311 H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	VCP 782 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 793 E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	VCP 795 E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 312 H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	VCP 792 E
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 219 H

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

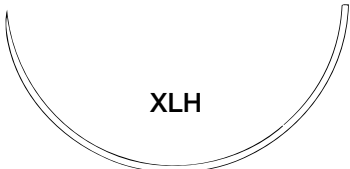
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☾

	22,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 3100	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	VCP 7980	E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 3110	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	24	VCP 7820	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 7930	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	VCP 7950	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 3120	H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	VCP 7920	E
	26,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 315	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	VCP 773	E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 316	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	VCP 242	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	VCP 780	H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 774	E
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,70	24	VCP 2573	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	VCP 784	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 317	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 243	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	36	VCP 779	H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	VCP 775	E
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,70	24	VCP 2574	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	VCP 785	E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 318	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 244	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 416	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 224	H
		ungefärbt geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	VCP 770	E
	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 3160	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	VCP 2420	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	VCP 7800	H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	VCP 7740	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	VCP 7840	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 3170	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 2430	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	36	VCP 7790	H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	VCP 7750	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	VCP 7850	E
	31,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 245	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 246	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,70	24	VCP 807	E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 247	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 9213	H

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

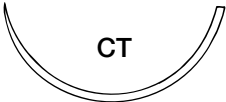
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☿

 MH-plus	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 322	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	VCP 100	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 323	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 101	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	12	VCP 786	G
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	12	VCP 777	G
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 324	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 102	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 325	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 103	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 226	H
 XLH	70,0	violett geflochten	1	4	1,20	12	VCP 584	G
 UCLX	16,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 15	H
 CT3	22,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 328	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 329	H
 CT2	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 333	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 326	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 334	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 330	H
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,45	24	VCP 744	E
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,70	24	VCP 2575	E
		violett geflochten MULTIPAK	0	3,5	6*0,70	12	VCP 2578	G
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,70	12	VCP 747	G
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 335	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 331	H
		violett geflochten CR	1	4	4*0,45	24	VCP 746	E
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	24	VCP 745	E
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	24	VCP 759	E
		violett geflochten CR	1	4	8*0,70	12	VCP 748	G
		violett geflochten	2	5	0,70	36	VCP 336	H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 2597	H
		violett geflochten CR	2	5	4*0,45	24	VCP 756	E
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	VCP 760	G

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☹

 CT1	36,4	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 339	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 345	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 340	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 346	H
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,45	12	VCP 836	G
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,45	12	VCP 740	G
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 341	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 347	H
		violett geflochten CR	1	4	4*0,45	12	VCP 837	G
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	VCP 741	G
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	12	VCP 736	G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 348	H
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	VCP 742	G
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	VCP 737	G
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 945	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 946	H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	VCP 947	H
 CT	40,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 351	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 352	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 358	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 353	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 359	H
		violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	VCP 1408	E
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	VCP 753	G
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	12	VCP 766	G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 360	H
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	VCP 754	G
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	VCP 767	G
		ungefärbt geflochten	2	5	0,90	36	VCP 960	H
 CTX-plus	48,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 363	H
 CTX	48,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 364	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 370	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 365	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 371	H
		violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	VCP 1428	E
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	VCP 765	G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 372	H
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	VCP 755	G
		violett geflochten CR	2	5	8*0,70	12	VCP 2577	G
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	VCP 366	H
		ungefärbt geflochten	2	5	0,90	36	VCP 367	H

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadeln ☹

	75,0	violett geflochten	2	5	0,90	12	VCP 368 G
	26,0	violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 237 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 238 H
	31,0	violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 253 H
		violett geflochten CR	1	4	5*0,70	12	VCP 2576 G

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☺

	17,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 994 H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 276 H
	22,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 277 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 278 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 231 H
	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 998 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 999 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 279 H
	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,90	36	VCP 516 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCP 517 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VCP 518 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 519 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 520 H
	48,0	violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	VCP 829 E

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

 X1	22,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 461 H
 CP2	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 969 H
 CP1	36,4	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 466 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 467 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 468 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 474 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 482 H
 CP	40,0	violett geflochten	2	5	0,70	36	VCP 471 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VCP 480 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 481 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 486 H
 CPX	48,0	violett geflochten	1	4	0,90	36	VCP 1058 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	VCP 1059 H
 OS4	22,0	ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 694 H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,70	36	VCP 695 H

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS2	19,0	violett geflochten	5-0	1	0,45	36	VCP 391	H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 392	Z H
		violett geflochten	3-0	2	0,45	36	VCP 393	H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	VCP 397	H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 398	H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	VCP 291	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 292	Z H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	VCP 293	H
 FS2S	19,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 392	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 292	H
 FS1	24,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 452	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 453	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 442	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 443	H
 FSL	30,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	VCP 585	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCP 586	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	VCP 587	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 P3 PRIME	13,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	VCP 493	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 494	H
 P3 VISI BLACK	13,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	VCP 499	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 491	H

VICRYL Plus, Polyglactin 910, geflochten, antibakteriell, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 PS3 PRIME	16,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	VCP 500 H
 PS2 PRIME	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 496 Z H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	VCP 497 H
 PS2 VISI BLACK	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 505 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	VCP 498 H
 PS2S PRIME	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	VCP 496 H
 PS1 PRIME	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	VCP 683 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	VCP 684 H

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

 P1 MultiPass	11,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	MPVCP 490 H
 P3 MultiPass	13,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	MPVCP 493 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MPVCP 494 H
 PS2 MultiPass	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MPVCP 496 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	MPVCP 497 H
 PS1 MultiPass	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	MPVCP 683 H

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

VICRYL PLUS, violett geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	4-0	1,5	36	VCP 633	H
	3-0	2	36	VCP 634	H
	2-0	3	36	VCP 635	H
	0	3,5	24	VCP 636	E
	1	4	24	VCP 637	E
	2	5	36	VCP 638	H
6 x 45 cm	4-0	1,5	36	VCP 1224	H
	3-0	2	36	VCP 1225	H
	2-0	3	36	VCP 1226	H
	0	3,5	24	VCP 1227	E
	1	4	24	VCP 1228	E
	2	5	36	VCP 1229	H
2 x 70 cm	3-0	2	24	VCP 624	E
	2-0	3	24	VCP 625	E
	0	3,5	24	VCP 626	E
	1	4	36	VCP 627	H
	2	5	36	VCP 628	H
5 x 70 cm	4-0	1,5	24	VCP 1214	E
	3-0	2	24	VCP 1215	E
	2-0	3	24	VCP 1216	E
	0	3,5	24	VCP 1217	E
	1	4	36	VCP 1218	H
	2	5	36	VCP 1219	H

VICRYL PLUS, ungefärbt geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	3-0	2	36	VCP 6441	H
	2-0	3	36	VCP 645	H
6 x 45 cm	3-0	2	36	VCP 9781	H
	2-0	3	36	VCP 9791	H
	0	3,5	24	VCP 980	E
	1	4	24	VCP 981	E
	2	5	36	VCP 982	H
5 x 70 cm	2-0	3	24	VCP 964	E
	0	3,5	24	VCP 965	E
	1	4	36	VCP 966	H

BESCHREIBUNG

Bei VICRYL® handelt es sich um ein synthetisches, steriles, chirurgisches Nahtmaterial, das resorbierbar ist und aus einem Copolymer aus 90 % Glykolid und 10 % L-Lactid besteht.

Der geflochtene VICRYL® Faden enthält eine Beschichtung, die zu gleichen Teilen aus Copolymer Polyglactin 370 und Calciumstearat zusammengesetzt ist. Polyglactin 910 und Polyglactin 370 sowie Calciumstearat haben weder antigene noch pyrogene Eigenschaften und verursachen während der Resorption lediglich eine geringe Gewebereaktion. Durch Zusatz von D & C Violett Nr. 2 während der Polymerisation wird VICRYL® gefärbt. Das Nahtmaterial ist auch ungefärbt erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

VICRYL® ist zur Adaption von Weichgewebe und/oder Ligaturen vorgesehen, einschließlich der Verwendung in der Ophthalmologie, für periphere Nerven nähte und Mikrochirurgie an den Gefäßen von <2mm Durchmesser. Über die Anwendung von VICRYL® Nahtmaterial am Herzen und am zentralen Kreislaufsystem liegen noch keine ausreichenden Daten vor.

WIRKUNG

VICRYL® Nahtmaterial verursacht im Gewebe eine minimale akute entzündliche Reaktion, und es kommt zum Einsprossen von Bindegewebszellen. Die allmähliche Abnahme der Reißkraft sowie die Resorption des VICRYL® Nahtmaterials sind eine Folge von hydrolytischen Vorgängen, bei denen das Copolymer zu Glykolsäure und Milchsäure abgebaut wird, die anschließend resorbiert und im Körper metabolisiert werden. Bei der Resorption kommt es zunächst zu einem Rückgang der Reißkraft, gefolgt von einem Verlust an Masse. Die gesamte Reißkraft ist mit Abschluss der vierten und fünften Woche nach Implantation vollständig verschwunden. Nach 56 bis 70 Tagen ist die Resorption von VICRYL® komplett.

Tage nach der Implantation	Verbleibende Reißkraft (% der ursprünglichen Reißkraft)
14 Tage (Stärke 6-0 und größer)	75%
21 Tage (Stärke 6-0 und größer)	50%
21 Tage (Stärke 7-0 und kleiner)	40%
28 Tage (Stärke 6-0 und größer)	25%

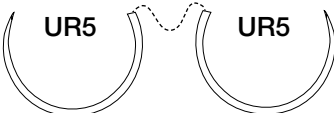
GEGENANZEIGEN

VICRYL® ist ein resorbierbares Nahtmaterial und ist daher nicht geeignet für die Adaption von Gewebe, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 601	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 602	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 603	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VC 2594	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	VC 2575	H
	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 606	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	VCC 2573	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	VCC 2593	H
	36,4	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 375	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 376	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 377	H
	36,4	violett geflochten	2-0	3	0,70	24	VAA 2573	E
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	VAA 2594	H
	40,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 381	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 382	H

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☾

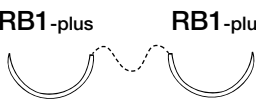
	6,5	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 1027	G
		violett geflochten	7-0	0,5	0,30	36	V 1028	H
	10,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,70	36	V 134	H
	10,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	V 133	H
	13,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,70	36	V 926	H
		violett geflochten MULTIPAK	6-0	0,7	8*0,45	24	V 800	E
		violett geflochten CR	5-0	1	8*0,45	24	V 797	E
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 924	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	8PA 2543	Y E

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	13,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	V 925 H
	13,0	violett geflochten CR	5-0	1	8*0,45	24	V 7970 E
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 9240 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 7971 E
	17,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,70	36	V 302 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	4*0,45	12	V 735 G
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 734 E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	V 799 E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	8PB 2574 Y E
		ungefärbt geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	8PB 2643 Y E
	17,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	V 303 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 304 H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 305 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 733 E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 306 H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,70	36	V 213 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 214 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 215 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 216 H
	17,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 667 H
	17,0	violett geflochten	5-0	1	0,70	36	V 3030 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 3040 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	4*0,45	12	V 7350 G
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 7340 E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	V 7990 E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 3050 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 7330 E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 3060 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	22,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 310	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 794	E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	12	V 798	G
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 311	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	V 782	H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 793	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	V 795	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 312	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	24	4PE 2545 Y	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 792	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	V 791	E
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 426	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 219	H
		ungefärbt geflochten CR	3-0	2	4*0,70	36	4PE 2674 Y	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 220	H
 VISI BLACK	22,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 3100	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 7940	E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	V 7980	E
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 3110	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	X 1029	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	24	V 7820	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 7930	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	V 7950	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 3120	H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 7920	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	V 7910	E
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 3219	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 2200	H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

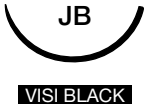
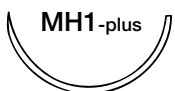
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	26,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 315 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,90	36	V 241 H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	4*0,45	12	V 781 G
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 773 E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	4*0,70	12	4PF 2572 Y G
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	12	V 783 G
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 316 H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	V 242 H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	V 780 H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 774 E
		violett geflochten MULTIPAK	3-0	2	4*0,70	36	4PF 2573 H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,70	24	4PF 2573 Y E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	V 784 E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,90	12	8PF 2593 Y G
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 317 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 243 H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	36	V 779 H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 775 E
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,70	24	4PF 2574 Y E
		violett geflochten MULTIPAK	2-0	3	8*0,70	24	8PF 2574 E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	V 785 E
		violett geflochten	0	4	0,70	36	V 318 H
		violett geflochten	0	4	0,90	36	V 244 H
		violett geflochten CR	0	4	4*0,70	24	4PF 2575 Y E
		violett geflochten	1	5	0,90	36	PF 2577 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 416 H
		ungefärbt geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 771 E
		ungefärbt geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	8PF 2673 Y E
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 224 H
		ungefärbt geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 770 E
		ungefärbt geflochten	0	4	0,70	36	V 225 H
	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 528 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

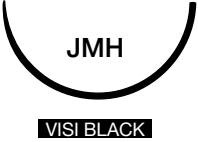
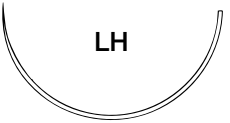
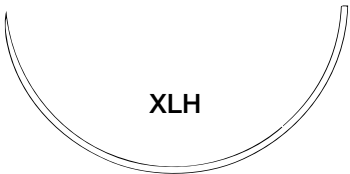
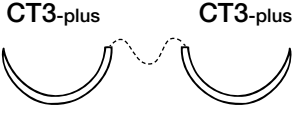
	26,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 3150	H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 3160	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	V 2420	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 3170	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 2430	H
		violett geflochten CR	4-0	1,5	4*0,45	12	V 7810	G
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	V 7730	E
		violett geflochten CR	4-0	1,5	8*0,70	24	V 7830	E
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	V 7800	H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 7740	E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	24	V 7840	E
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	36	V 7790	H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 7750	E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	24	V 7850	E
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 4416	H
		ungefärbt geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 7710	E
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 3224	H
		ungefärbt geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 7700	E
	31,0	violett geflochten CR	0	3,5	4*0,70	24	V 808	E
	31,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 245	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,70	24	V 8071	E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 246	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,70	24	V 807	E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 247	H
	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 322	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	V 100	H
		violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	12	4PG 2543 Y	G
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	12	V 776	G
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 323	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 101	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	12	V 786	G
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,70	12	V 777	G
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 324	H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 102	H
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,70	12	V 778	G
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 325	H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 103	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 226	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	V 110	H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	V 227	H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,70	36	V 228	H

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

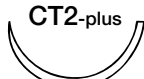
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 3220	H
		violett geflochten	3-0	2	0,90	36	V 1000	H
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,70	12	V 7760	G
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 3230	H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 1010	H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	24	V 7860	E
	40,0	violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 97	H
	70,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	12	V 581	G
		violett geflochten	0	3,5	0,70	12	V 582	G
		violett geflochten	1	4	0,70	12	V 583	G
	13,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 113	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 114	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 115	H
	16,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 13	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 14	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 15	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 16	H
	22,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 327	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 328	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 329	H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 321	H
	22,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 928	H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

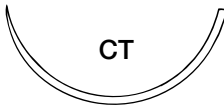
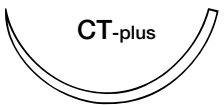
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 332 H
	26,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 333 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 326 H
		violett geflochten CR	2-0	3	4*0,45	24	V 7642 E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	12	8PK 2544 Y G
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 334 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 330 H
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,45	24	V 744 E
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,70	24	4PK 2575 Y E
		violett geflochten MULTIPAK	0	3,5	6*0,70	12	6PK 2575 G
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,70	12	V 747 G
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 335 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 331 H
		violett geflochten CR	1	4	4*0,45	24	V 746 E
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	24	V 745 E
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	24	V 759 E
		violett geflochten MULTIPAK	1	4	6*0,70	12	6PK 2576 G
		violett geflochten CR	1	4	8*0,70	12	V 748 G
		violett geflochten MULTIPAK	1	4	4*0,90	6	4PK 2596
		violett geflochten	2	5	0,70	36	V 336 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	PK 2597 H
		violett geflochten CR	2	5	4*0,45	24	V 756 E
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	V 760 G
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 269 H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	V 270 H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,70	36	V 271 H
	36,4	ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 947 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

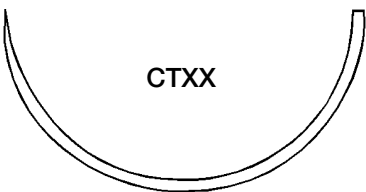
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 338 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 339 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 345 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 340 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 346 H
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,45	12	V 836 G
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,45	12	V 740 G
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,70	12	V 7361 G
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,90	6	4PL 2595 Y
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 341 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 347 H
		violett geflochten CR	1	4	4*0,45	12	V 837 G
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	V 741 G
		violett geflochten CR	1	4	4*0,60	12	4PL 2566 Y G
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	12	V 736 G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 348 H
		violett geflochten	2	5	4*0,70	12	V 3481 G
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	V 742 G
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	V 737 G
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,90	36	V 944 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,90	36	V 945 H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 946 H
		ungefärbt geflochten CR	1	4	8*0,45	12	V 719 G
		ungefärbt geflochten	2	5	0,90	36	V 948 H
	40,0	violett geflochten als Schlinge	0	3,5	1,50	24	V 1407 E
		violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	V 1408 E
		violett geflochten CR	1	4	4*0,70	12	V 766 G
		violett geflochten CR	2	5	4*0,70	12	V 767 G
	40,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 350 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 357 H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	12	8PM 2544 Y G
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 352 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 358 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 353 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 359 H
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	V 753 G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 360 H
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	V 754 G
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 959 H
		ungefärbt geflochten	2	5	0,90	36	V 960 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

 CTX	48,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 363 H
		violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	V 1428 E
		violett geflochten als Schlinge	1	4	2,40	12	V 1430 G
		violett geflochten	6	8	1,20	24	PN 2512 E
 CTX-plus	48,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 364 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 370 H
		violett geflochten CR	0	3,5	4*0,45	12	4PN 2545 Y G
		violett geflochten CR	0	3,5	8*0,45	12	8PN 2545 Y G
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 365 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 371 H
		violett geflochten CR	1	4	8*0,45	12	V 765 G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 372 H
		violett geflochten CR	2	5	8*0,45	12	V 755 G
		violett geflochten CR	2	5	8*0,70	12	8PN 2577 Y G
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,90	36	V 170 H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 366 H
		ungefärbt geflochten	2	5	0,90	36	V 367 H
 CTXX	75,0	violett geflochten	2	5	0,90	12	V 368 G
		violett geflochten	2	5	1,20	12	V 379 G
 MO6	26,0	violett geflochten	1	4	0,90	36	V 237 H
		violett geflochten CR	1	4	7*0,90	6	7TB 2596 Y
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 238 H
 MO5	31,0	violett geflochten	1	4	0,90	36	V 253 H
		violett geflochten CR	1	4	5*0,70	12	5TC 2576 Y G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 254 H
 MO4	36,4	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 436 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 255 H
		violett geflochten CR	1	4	5*0,70	12	5TD 2576 Y G
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 432 H

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

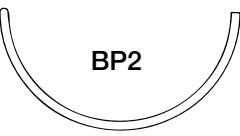
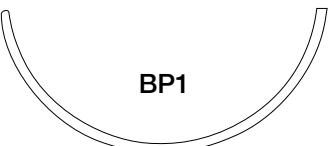
3/8 Kreis Rundkörper Nadel Ⓞ

 BV6	5,0	violett monofil	10-0	0,2	0,10	12	V 970 G
 BV4	5,1	violett monofil	10-0	0,2	0,15	12	V 971 G
 BV2	6,5	violett monofil	9-0	0,3	0,15	12	V 239 G
		violett geflochten	8-0	0,4	0,20	12	V 400 G
 BV1	9,3	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 301 G
 C1	13,0	violett geflochten CR	3-0	2	4*0,45	24	V 787 E

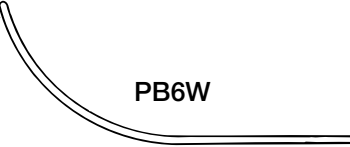
gerade Rundkörper Nadel Ⓞ

 ST4	19,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	BA 2573 H
 ST4 ST4	19,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,35	36	V 620 H

1/2 Kreis stumpfe Rundkörper Nadel Ⓞ

 BP2	48,0	BAND; violett flach gewebt; normale Struktur; Breite: 3 mm			0,60	12	V 153 G
 BP1	65,0	BAND; violett flach gewebt; normale Struktur; Breite: 3 mm			0,60	12	V 152 G

1/2 gebogene stumpfe Rundkörper Nadel Ⓞ

 PB6W	70,0	BAND; violett flach gewebt; normale Struktur; Breite: 3 mm			0,60	12	V 159 G

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			
1/2 Kreis stumpfe Rundkörper Nadel ETHIGUARD®							
 BT3	45,0	violett geflochten	2	5	0,90	36	V 7197 H
1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel							
 V4	17,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 249 H
 V5	18,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 994 H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 276 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 274 H
		violett geflochten CR	2-0	3	6*0,45	24	V 703 E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 987 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 988 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 230 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	OA 2644 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	OA 2675 H
 V6	22,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 277 H
		violett geflochten MULTIPAK	3-0	2	6*0,70	36	6OK 2574 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 278 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 231 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	OK 2674 H
 V7	26,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,90	36	OB 2593 H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 998 H
		violett geflochten CR	3-0	2	5*0,70	24	V 993 E
		violett geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	V 1774 E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 999 H
		violett geflochten CR	2-0	3	6*0,45	24	6OB 2545 Y E
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	V 1775 E
		violett geflochten CR	2-0	3	5*0,70	24	V 992 E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 279 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	OB 2675 H
 V34	36,4	violett geflochten	3-0	2	0,90	36	V 516 H
		violett geflochten	2-0	3	0,90	36	V 517 H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	12	8OC 2544 Y G
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 518 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 519 H
		ungefärbt geflochten	1	4	0,90	36	V 919 H

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

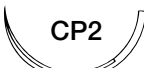
1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

 V39	45,0	violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	12	8OS 2542 Y G
 V40	48,0	violett geflochten als Schlinge	1	4	1,50	24	V 829 E
		violett geflochten als Schlinge	2	5	2,40	12	V 830 G
 BPT1	48,0	violett geflochten	6	8	0,75	12	V 140 G
		violett geflochten	6	8	1,5	12	OH 2528 G

3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

 V18	13,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,70	36	V 991 H
		violett geflochten	5-0	1	0,70	36	V 990 H

1/2 Kreis schneidende Nadel

 J1	17,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MD 2543 H
 X1	22,0	violett geflochten	3-0	2	0,45	36	ME 2543 H
		violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	8ME 2544 Y E
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 461 H
 CP2	26,0	violett geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	8MF 2543 Y E
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	MF 2574 H
		ungefärbt geflochten CR	1	4	4*0,70	24	4MF 2675 Y E
 CP1	36,4	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 466 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 467 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 468 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 474 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 482 H
 CP	40,0	violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 479 H
		violett geflochten	0	3,5	0,90	36	V 485 H
		violett geflochten	1	4	0,70	36	V 480 H
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 486 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 481 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	48,0	violett geflochten CR	0	3,5	4*0,45	12	4PA 2545 Y G
		violett geflochten	1	4	0,90	36	V 1058 H
		violett geflochten	2	5	0,90	36	V 1059 H

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	19,0	violett geflochten	5-0	1	0,45	36	V 391 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 392 Z H
		violett geflochten	3-0	2	0,45	36	V 393 H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 291 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 292 Z H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 293 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 423 H
	19,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 392 H
		violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 397 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 292 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 422 H
	24,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 451 H
		violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 452 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 453 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	V 441 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,70	36	V 442 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 443 H
	30,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 585 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 586 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 587 H
		ungefärbt geflochten	0	3,5	0,70	36	V 520 H

1/2 gebogene schneidende Nadel ▼

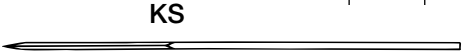
	22,0	violett geflochten	3-0	2	0,45	36	V 921 H

CR = Abziehbare Nadel

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

gerade schneidende Nadel ▼

	13,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 383 H
	60,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	V 523 H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 524 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,70	36	V 664 H

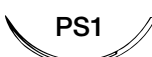
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	11,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	V 489 H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 490 H
	13,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	V 492 H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 493 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 494 H
	13,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	V 495 H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	V 499 H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 491 H
	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 496 Z H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 497 H
	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 500 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 498 H
	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	V 496 H
	24,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,70	36	JE 2672 H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	V 683 H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	V 684 H
	30,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	V 686 H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	V 687 H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

 P1 MultiPass	11,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MPV 489	H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	MPV 490	H
 P3 MultiPass	13,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MPV 492	H
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	MPV 493	H
		ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MPV 494	H
 PS2 MultiPass	19,0	ungefärbt geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MPV 496	H
		ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	MPV 497	H
 PS1 MultiPass	24,0	ungefärbt geflochten	3-0	2	0,45	36	MPV 683	H
		ungefärbt geflochten	2-0	3	0,45	36	MPV 684	H
 PS MultiPass	26,0	violett geflochten	3-0	2	0,70	36	MPV 9526	H
		violett geflochten	2-0	3	0,70	36	MPV 9527	H
 PSL MultiPass	30,0	violett geflochten	2-0	3	0,70	36	MPV 686	H
		violett geflochten	0	3,5	0,70	36	MPV 687	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Mikrospitze

 G6	8,0	violett geflochten	7-0	0,5	0,30	36	EA 2531	H
 G6 G6	8,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 551	G
		ungefärbt geflochten	7-0	0,5	0,45	36	EAA 2641	H
 G1 G1	11,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 554	G
 G3 G3	13,0	violett geflochten	5-0	1	0,45	12	V 557	G

1/2 Kreis Spatula Nadel

 S12	8,0	ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	36	ML 2642	H
 S12 S12	8,0	ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MLL 2641	H

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/4 Kreis Spatula Nadel

S29 S29 	8,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 555 G
S14 	8,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	36	MN 2641 H
S14 S14 	8,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,25	36	MNN 2531 H
		violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 570 G
		violett geflochten	5-0	1	0,45	12	V 571 G
		ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 670 G
		ungefärbt geflochten	5-0	1	0,45	12	V 671 G
S14 S14  VISI BLACK	8,0	violett geflochten	6-0	0,7	0,45	12	V 575 G
		violett geflochten	5-0	1	0,45	12	V 577 G
		ungefärbt geflochten	6-0	0,7	0,20	36	X 943 H
S4 S4 	8,0	violett geflochten	4-0	1,5	0,45	12	V 572 G

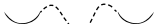
1/2 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

UCS44 UCS44 	5,4	violett monofil	10-0	0,2	0,15	12	UDD 2831 G
		violett geflochten	9-0	0,3	0,30	12	V 349 G
GS14 GS14 	5,5	violett monofil	10-0	0,2	0,30	12	V 450 G
		violett monofil	9-0	0,3	0,30	12	V 449 G
		violett geflochten	8-0	0,4	0,20	12	V 574 G

VICRYL, Polyglactin 910, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

GS12 	5,5	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 542 G
CS35C CS35C 	6,0	violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 975 G
UCS35 	6,5	violett monofil	10-0	0,2	0,15	12	V 429 G
GS9 	6,5	violett geflochten	9-0	0,3	0,30	12	V 600 G
		violett geflochten	9-0	0,3	0,20	36	EC 2531 H
		violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 120 G
		violett geflochten	7-0	0,5	0,30	12	V 119 G
GS9 GS9 	6,5	violett monofil	10-0	0,2	0,30	12	V 440 G
		violett monofil	9-0	0,3	0,30	12	V 439 G
		violett geflochten	9-0	0,3	0,30	12	V 549 G
		violett geflochten	8-0	0,4	0,20	12	V 547 G
		violett geflochten	8-0	0,4	0,30	12	V 548 G
		violett geflochten	7-0	0,5	0,45	12	V 546 G

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

VICRYL, violett, geflochten, beschichtet

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
	USP	metric		
3 x 45 cm	5-0	1	36	V 632 H
	4-0	1,5	36	V 633 H
	3-0	2	36	V 634 H
	2-0	3	36	V 635 H
	0	3,5	24	V 636 E
	1	4	24	V 637 E
	2	5	36	V 638 H
6 x 45 cm	5-0	1	36	V 1223 H
	4-0	1,5	36	V 1224 H
	3-0	2	36	V 1225 H
	2-0	3	36	V 1226 H
	0	3,5	24	V 1227 E
	1	4	24	V 1228 E
	2	5	36	V 1229 H
12 x 45 cm	4-0	1,5	36	V 903 H
	3-0	2	36	V 904 H
	2-0	3	24	V 905 E
	0	3,5	24	V 906 E
	1	4	24	V 907 E
	2	5	24	V 908 E
2 x 70 cm	4-0	1,5	24	V 623 E
	3-0	2	24	V 624 E
	2-0	3	24	V 625 E
	0	3,5	24	V 626 E
	1	4	36	V 627 H
	2	5	36	V 628 H
5 x 70 cm	4-0	1,5	24	V 1214 E
	3-0	2	24	V 1215 E
	2-0	3	24	V 1216 E
	0	3,5	24	V 1217 E
	1	4	36	V 1218 H
	2	5	36	V 1219 H
1,40 m	1	4	36	V 617 H
	2	5	36	V 618 H

VICRYL, ungefärbt, geflochten, beschichtet

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
	USP	metric		
3 x 45 cm	5-0	1	36	V 642 H
	4-0	1,5	36	V 643 H
	3-0	2	36	V 644 H
	2-0	3	36	V 645 H
	0	3,5	24	V 646 E
	1	4	24	V 647 E
	2	5	36	V 648 H
6 x 45 cm	4-0	1,5	36	V 977 H
	3-0	2	36	V 978 H
	2-0	3	36	V 979 H
	0	3,5	24	V 980 E
	1	4	24	V 981 E
	2	5	36	V 982 H
12 x 45 cm	4-0	1,5	36	V 909 H
	3-0	2	36	V 910 H
	2-0	3	24	V 911 E
	0	3,5	24	V 912 E
	1	4	24	V 913 E
	2	5	24	V 914 E
2 x 70 cm	3-0	2	24	V 652 E
	2-0	3	24	V 653 E
	0	3,5	24	V 654 E
	1	4	36	V 655 H
	2	5	36	V 656 H
5 x 70 cm	4-0	1,5	24	V 962 E
	3-0	2	24	V 963 E
	2-0	3	24	V 964 E
	0	3,5	24	V 965 E
	1	4	36	V 966 H
	2	5	36	V 967 H
5 x 35 cm	2-0	3	36	ZFJ 535 H
	0	3,5	36	ZFK 535 H
1,40 m	1	4	36	V 611 H

LIGAPAK

VICRYL, violett, geflochten, beschichtet

Fadenlänge in m	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
	USP	metric		
2,50 m auf Handrolle für Ligaturen	3-0	2	12	V 1205 G
	2-0	3	12	V 1206 G
	0	3,5	12	V 1207 G
	1	4	12	V 1208 G
	2	5	12	V 1209 G

BESCHREIBUNG

PDS II® ist ein steriler, synthetischer, resorbierbarer, monofiler Faden, der aus dem Polymer Poly-p-dioxanon hergestellt wird.

Das Polymer Polydioxanon hat weder antigene noch pyrogene Eigenschaften und verursacht während der Resorption lediglich eine geringe Gewebereaktion. Die Färbung des PDS II® Fadens erfolgt durch den Zusatz D & C Violett Nr. 2 oder D & C Blau Nr. 6 während der Polymerisation. Der Faden ist auch in ungefärbter Form erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

PDS II® ist für die Adaption von Weichgeweben vorgesehen, u. a. in der pädiatrischen Herz- und Gefäßchirurgie, der Mikrochirurgie sowie der Ophthalmologie. PDS II® ist besonders in Situationen geeignet, in denen sowohl ein resorbierbarer Faden als auch Wundadaption über einen längeren Zeitraum (bis zu sechs Wochen) gewünscht werden.

WIRKUNG

PDS II® Nahtmaterial verursacht im Gewebe eine minimale akute entzündliche Reaktion, und es kommt zum Einsprossen von Bindegewebszellen. Die allmähliche Abnahme der Reißkraft und die Resorption des PDS II® Nahtmaterials sind eine Folge von hydrolytischen Vorgängen. Durch diese wird das Polymer zu 2-Hydroxyethoxy-Essigsäuremonomeren abgebaut, die anschließend im Körper metabolisiert werden. Die Resorption führt zu Abnahme der Reißkraft und anschließend zu einem Verlust der Masse. Implantationsstudien in vivo ergeben folgendes Profil:

Nach Implantation	Verbleibende Reißkraft ca.
14 Tage (Stärken 4-0 und kleiner)	60%
(Stärken 3-0 und größer)	75%
28 Tage (Stärken 4-0 und kleiner)	50%
(Stärken 3-0 und größer)	70%
42 Tage (Stärken 4-0 und kleiner)	35%
(Stärken 3-0 und größer)	50%

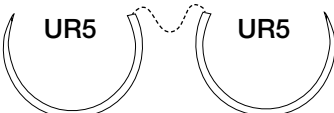
GEGENANZEIGEN

PDS II® ist ein resorbierbarer Faden und darf daher nicht für die Adaption von unter Spannung stehenden Geweben über einen längeren Zeitraum (mehr als 6 Wochen) oder die Implantation von Prothesen, z. B. Herzklappen oder synthetischen Implantaten, verwendet werden.

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	26,0	violett monofil	3-0	2	0,70	24	Z 605 E
		violett monofil	2-0	3	0,90	24	VCC 2993 E
	36,4	violett monofil	2-0	3	0,70	24	VAA 2973 E

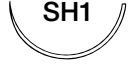
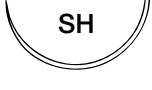
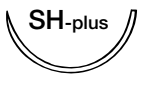
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

	6,5	violett monofil	7-0	0,5	0,70	24	Z 1370 E
	10,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	24	PUU 2971 E
	13,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 925 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 924 H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 926 H
	13,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 935 H
	13,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 867 H
	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 303 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 304 H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 305 H
	17,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 302 H

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

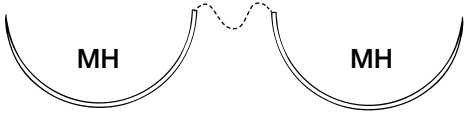
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

 JRB1 VISI BLACK	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 3030	H
		violett monofil CR	5-0	1	4*0,70	12	X 1153	G
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 3040	H
 RB1-plus RB1-plus	17,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 863	H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 864	H
 SH1	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 310	H
		violett monofil MULTIPAK	4-0	1,5	6*0,70	12	6PE 2973	G
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 311	H
 JB1 VISI BLACK	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 3100	H
		violett monofil CR	4-0	1,5	4*0,70	12	X 1154	G
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 3110	H
 SH1 SH1	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,90	36	PEE 2993	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 1311	H
 JB1 JB1 VISI BLACK	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,75	36	Z 1312	H
 SH	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 315	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 316	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 317	H
 SH-plus	26,0	violett monofil MULTIPAK	4-0	1,5	4*0,70	12	Z 3150 B	G
		violett monofil MULTIPAK	3-0	2	6*0,70	12	Z 316 C	G
		violett monofil	2-0	3	1,20	36	Z 120	H
 JB VISI BLACK	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 3150	H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 3160	H
		violett monofil CR	3-0	2	4*0,45	12	Z 7800	G
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 3170	H

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

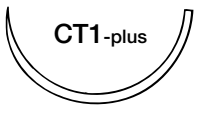
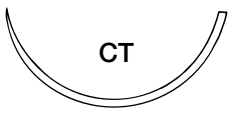
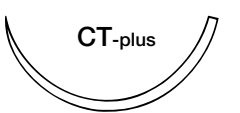
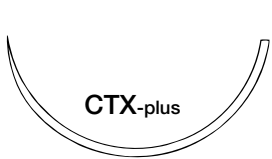
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	26,0	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 1316	H
	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 1315	H
		violett monofil	4-0	1,5	0,90	24	PFF 2992	E
		violett monofil	3-0	2	0,90	36	PFF 2993	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 1317	H
		violett monofil	2-0	3	0,90	24	PFF 2994	E
	36,4	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 322	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 323	H
	36,4	violett monofil	4-0	1,5	0,70	24	PGG 2972	E
	13,0	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 113	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 114	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 115	H
	16,0	violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 13	H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 14	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 15	H
	22,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 328	H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 329	H
	22,0	violett monofil	2-0	3	0,70	24	Z 271	E
	26,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 333	H
		violett monofil	1	4	0,70	36	Z 335	H

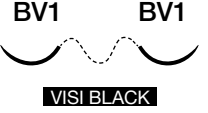
PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

	26,0	violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 334 H
	36,4	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 339 H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 340 H
		violett monofil	0	3,5	0,90	24	PL 2995 E
		violett monofil	1	4	0,70	36	Z 341 H
	40,0	violett monofil als Schlinge	0	3,5	1,50	24	Z 1923 E
		violett monofil als Schlinge	1	4	1,50	24	Z 1924 E
	40,0	violett monofil	2-0	3	0,90	24	Z 357 E
		violett monofil	0	3,5	0,90	24	Z 358 E
		violett monofil	1	4	0,90	24	Z 359 E
	48,0	violett monofil als Schlinge	1	4	1,80	12	Z 1950 G
		violett monofil	2	5	0,90	24	PN 2997 E
	48,0	violett monofil	0	3,5	0,90	24	Z 370 E
		violett monofil	1	4	0,90	24	Z 371 E

3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	9,3	violett monofil	7-0	0,5	0,70	24	Z 1701 E
		violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1702 H
	9,3	violett monofil	7-0	0,5	0,75	24	Z 162 E

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

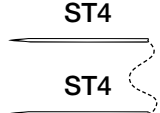
3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	11,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1002	H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1012	H
		violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 1013	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	KB 3072	H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1721	H
		violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 1722	H
	13,0	violett monofil	5-0	1	0,75	36	Z 166	H
	17,0	violett monofil	5-0	1	0,90	24	KCC 2992	E

asymptotische Rundkörper Nadel ☉

	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	24	X 1252	E

gerade Rundkörper Nadel ☉

	19,0	violett monofil	4-0	1,5	0,35	24	Z 620	E
	65,0	violett monofil	0	3,5	0,70	24	Z 630	E
		violett monofil	1	4	0,70	24	Z 631	E

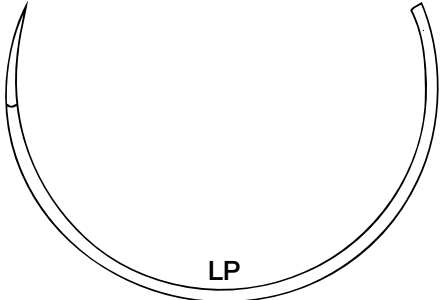
PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis stumpfe Rundkörper Nadel ETHIGUARD®

 BT3	40,0	violett monofil	2	5	0,90	24	Z 3605 E
 BT4	45,0	violett monofil als Schlinge	0	3,5	1,40	12	Z 3700 G

5/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

 LP	110,0	violett monofil	2	5	0,90	12	OL 2995 G

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

 V5	18,0	violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 995 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 994 H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 276 H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 274 H
 V6	22,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 275 H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 277 H
 V7	26,0	violett monofil	4-0	1,5	0,70	36	Z 997 H
		violett monofil	3-0	2	0,70	36	Z 998 H
		violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 999 H
 V7	26,0	violett monofil	3-0	2	0,90	36	Z 177 H

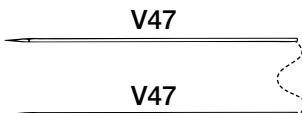
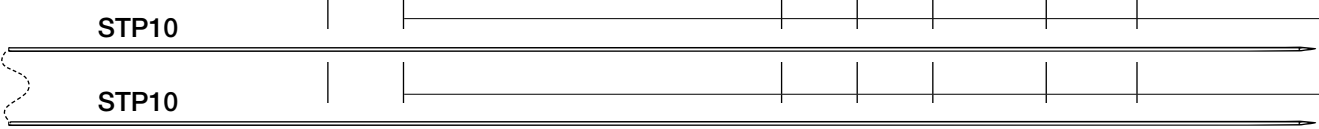
PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☑

	48,0	violett monofil als Schlinge	1	4	1,50	12	Z 1940 G
		violett monofil als Schlinge	1	4	1,80	12	Z 1930 G
		violett monofil als Schlinge	1	4	2,00	12	OF 2924 X G
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 991 H
		violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 990 H
	13,0	violett monofil	5-0	1	0,70	24	Z 898 E

gerade schneidende Rundkörper Nadel ☑

	36,4	violett monofil	4-0	1,5	0,35	24	Z 425 E
		violett monofil	3-0	2	0,35	24	Z 920 E
	254,0	violett monofil	2-0	3	0,70	12	Z 997 C

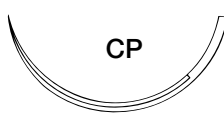
3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel mit Kurzschliff ☑

	9,3	violett monofil	7-0	0,5	0,70	24	Z 1751 E
		violett monofil	6-0	0,7	0,70	24	Z 1752 E
	9,3	violett monofil	7-0	0,5	0,70	24	Z 1711 E
		violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1712 H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1042 H
		violett monofil	5-0	1	0,70	36	Z 1043 H
	13,0	violett monofil	6-0	0,7	0,70	36	Z 1032 H
		violett monofil	5-0	1	0,70	24	Z 1033 E

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	17,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 307 H
	22,0	ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	24	Z 458 E
	26,0	violett monofil	2-0	3	0,70	36	Z 969 H
		violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 983 H
		violett monofil	1	4	0,70	36	Z 984 H
	36,4	violett monofil	0	3,5	0,70	36	Z 467 H
		violett monofil	1	4	0,70	36	Z 468 H
	40,0	violett monofil	0	3,5	0,90	24	Z 485 E
		violett monofil	2	5	0,70	24	MH 2976 E

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	19,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	24	Z 291 E
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 292 Z E
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	24	Z 422 Z E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	24	Z 293 E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	24	Z 423 E
		violett monofil als Schlinge	4-0	1,5	0,30	36	Z 282 H
	19,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 292 E
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	24	Z 422 E
	19,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 2920 H
	24,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	24	Z 441 E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,70	24	Z 442 E
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,70	24	Z 443 E

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

gerade schneidende Nadel ▼

SC1 	13,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 996 H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

P2  PRIME	8,0	violett monofil	5-0	1	0,45	36	JG 2942 H
P1  PRIME	11,0	violett monofil	6-0	0,7	0,45	36	Z 487 H
		ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	24	Z 489 E
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	24	Z 490 E
P1  VISI BLACK	11,0	violett monofil	6-0	0,7	0,45	24	Z 4870 E
P3  PRIME	13,0	violett monofil	5-0	1	0,45	36	Z 463 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 464 H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	24	Z 493 E
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 494 E
P3  VISI BLACK	13,0	violett monofil	5-0	1	0,45	36	Z 4630 H
		violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 4640 H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	24	Z 492 E
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 495 E
PS3 	16,0	violett monofil	5-0	1	0,45	36	JD 2942 H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	24	Z 424 E
PS2  PRIME	19,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 513 Z H
		violett monofil	3-0	2	0,45	36	Z 514 Z H
		violett monofil	3-0	2	0,75	36	JC 2973 S H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 496 Z E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	24	Z 497 E
PS2  VISI BLACK	19,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 500 E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	24	Z 498 E
PS2S  PRIME	19,0	violett monofil	4-0	1,5	0,45	36	Z 513 H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 496 E

PDS II, Polydioxanon, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 PS1 PRIME	24,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	24	Z 682 E
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	24	Z 683 E
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,45	24	Z 684 E

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

 P1 MultiPass	11,0	ungefärbt monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPZ 489 H
 P3 MultiPass	13,0	ungefärbt monofil	5-0	1	0,45	36	MPZ 493 H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPZ 494 H
 PS2 MultiPass	19,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPZ 496 H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	MPZ 497 H
 PS1 MultiPass	24,0	ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	MPZ 683 H
 PS MultiPass	26,0	ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,70	36	MPZ 9624 H
		ungefärbt monofil	2-0	3	0,70	36	MPZ 9626 H

1/2 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 GS14 GS14	5,5	violett monofil	7-0	0,5	0,30	12	ENN 2934 G

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

PDS II, violett, monofil

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	4-0	1,5	36	Z 633	H
	2-0	3	36	Z 635	H
	0	3,5	24	Z 636	E
2 x 70 cm	1	4	24	Z 627	E
120 cm	2-0	3	36	Z 512	H

ETHIBOND® EXCEL

BESCHREIBUNG

ETHIBOND® EXCEL ist ein geflochtenes und beschichtetes, nicht resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyethylenterephthalat. Das Material ist mit Polybutylat als Gleitmittel beschichtet. Dadurch wird die Passage des Fadens durch das Gewebe und die allgemeine Handhabung des Materials verbessert. ETHIBOND EXCEL ist sowohl ungefärbt (weiß) als auch mit grüner Einfärbung (D&C Nr. 6, Color Index Nr. 61565) erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

ETHIBOND® EXCEL ist zur Adaptation von Weichgeweben und/oder Ligaturen vorgesehen, einschließlich neurochirurgischen, ophthalmologischen und kardiovaskulären Eingriffen sowie zur Fixierung von Weichgeweben an knöchernen Strukturen (z.B. Sehnennaht, Trochanternaht).

WIRKUNG

ETHIBOND® EXCEL Nahtmaterial ruft anfangs lediglich eine geringfügige entzündliche Gewebereaktion hervor, auf die eine langsam fortschreitende bindegewebige Einkapselung folgt. In vivo Studien über einen unterschiedlich langen Zeitraum zeigten keinen nennenswerten Verlust der Reißfestigkeit bei Polyesternahmaterial.

GEGENANZEIGEN

Nicht bekannt.

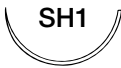
ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

5/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	36,4	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7908	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7909	H

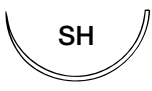
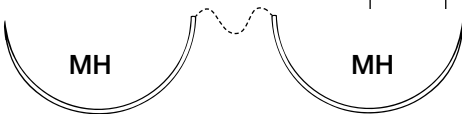
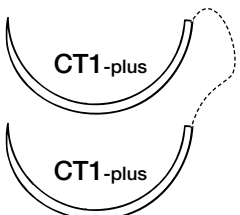
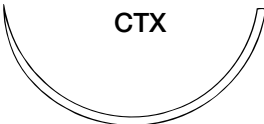
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

	8,3	grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	PP 6373	H
	13,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	EH 7416	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	EH 7417	H
		grün geflochten CR	4-0	1,5	4*0,45	36	4PA 6343 Y	H
		grün geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	CB 84	E
	13,0	grün geflochten mit TFE-Pledgets 2x3 mm	4-0	1,5	0,45	36	EH 7420	H
		grün geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	4-0	1,5	0,75	36	EH 7419	H
	13,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	6710	H
	17,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	6870	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	6871	H
		grün geflochten CR	4-0	1,5	8*0,45	24	CB 54	E
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6872	H
		grün geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	CB 53	E
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6873	H
	17,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	6550	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,90	36	6557	H
		grün geflochten	3-0	2	0,90	36	6558	H
	22,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	EH 7397	H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7398	H
		grün geflochten CR	3-0	2	4*0,45	36	EH 7393	H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7399	H
		grün geflochten CR	2-0	3	4*0,45	36	EH 7395	H

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

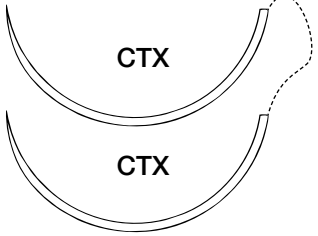
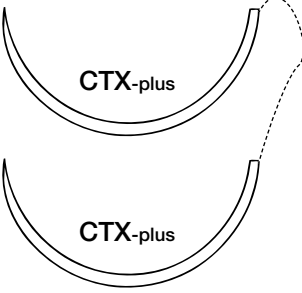
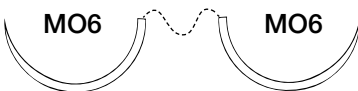
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	26,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6832	H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6833	H
		grün geflochten	2-0	3	1,90	24	PF 6324	E
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	6834	H
		grün geflochten	0	3,5	1,20	36	PF 6315	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7528	H
	26,0	grün geflochten	0	3,5	1,20	36	X 1059	H
		grün geflochten 	0	3,5	4*0,45	24	6836	E
	26,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,90	36	6521	H
		grün geflochten	3-0	2	0,90	36	6522	H
		grün geflochten MULTIPAK	3-0	2	4*0,75	12	PFF 6373 L	G
		grün geflochten	2-0	3	0,90	36	6523	H
		grün geflochten	0	3,5	0,90	36	6524	H
	31,0	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7905	H
	36,4	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7491	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7492	H
	36,4	grün geflochten	2-0	3	0,90	36	B 843	H
	36,4	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	PLL 6375	H
	48,0	grün geflochten	1	4	0,75	36	PN 6376	H

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	48,0	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	PNN 6375	H
	48,0	grün geflochten	2	5	0,75	24	EH 7741	E
	22,0	grün geflochten	2	5	0,75	36	EH 7845	H
	26,0	grün geflochten	3	6	0,75	36	EH 7851	H

3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	13,0	grün geflochten	6-0	0,7	0,75	36	6889	H
		grün geflochten	5-0	1	0,75	36	6890	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	EH 7307	H
	17,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	6881	H

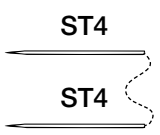
gerade Rundkörper Nadel ☉

	19,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7733	H
	19,0	grün geflochten	2-0	3	1,20	36	EH 7735	H

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

gerade Rundkörper Nadel ☉

	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,35	36	EH 7418 H
	65,0	grün geflochten	0	3,5	0,75	24	BLL 6375 E

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☿

	17,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	6951 H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	EH 7384 H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	OA 6344 H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6953 H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6954 H
		weiss geflochten	2-0	3	0,75	36	OA 6475 H
	17,0	grün/weiß geflochten	4-0	1,5	4*0,75	12	MEH 7719 L G
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6936 H
		grün/weiß geflochten	3-0	2	4*0,75	12	6959 G
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6937 H
		grün geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	0,75	36	P 6937 H
		grün geflochten	2-0	3	4*0,75	12	6937 L G
		grün geflochten; Langpackung	2-0	3	5*0,75	12	MEH 7710 P G
		grün geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	8*0,75	6	MEH 6937 N
		grün/weiß geflochten	2-0	3	4*0,75	12	EH 7712 L G
		grün/weiß geflochten	2-0	3	8*0,75	6	MEH 7712 N
		grün/weiß geflochten	2-0	3	4*0,90	12	EH 7719 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	4*0,75	12	EH 7715 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	8*0,75	6	MEH 7715 N
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	4*0,90	12	MEH 7718 L G
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7408 H
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	0	3,5	4*0,75	12	EH 7718 L G

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	22,0	grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	4*0,75	12	MEH 7714 L G
	26,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6963 H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6964 H
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	6965 H
		grün geflochten	0	3,5	0,90	36	OB 6396 H
	26,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6976 H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6977 H
		weiss geflochten	2-0	3	0,75	36	6987 H
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	0,75	36	P 6977 H
		grün/weiß geflochten	2-0	3	4*0,75	12	EH 7711 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	4*0,75	12	EH 7716 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	8*0,75	6	MEH 7716 N
		grün/weiß geflochten	2-0	3	4*0,90	12	MEH 7714 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	2-0	3	4*0,90	12	MEH 7710 L G
		grün geflochten	0	3,5	0,90	36	6905 H
		grün geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	0	3,5	0,90	36	6903 H
		grün/weiß geflochten	0	3,5	4*0,90	12	EH 7713 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	0	3,5	4*0,90	12	EH 7717 L G
		grün/weiß geflochten mit TFE-Pledgets 3x6 mm	0	3,5	8*0,90	6	MEH 7717 N
	36,4	grün geflochten	1	4	0,90	36	EB 4407 H
	40,0	grün geflochten	2	5	0,75	12	869 G
	48,0	grün geflochten MULTIPAK	6	8	6*0,75	12	846 C G

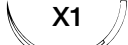
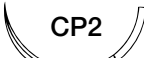
ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

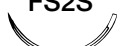
3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☺

 V4	17,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	6943	H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	6944	H
 V26	26,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	HCC 6374	H

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

 J1	17,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	MD 6343	H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7544	H
 X1	22,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7679	H
 CP2	26,0	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7673	H
 CP1	36,4	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EB 2206	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7674	H
		grün geflochten	2	5	0,75	36	MG 6376	H
 OS4	22,0	grün geflochten	2	5	0,75	36	MS 6377	H

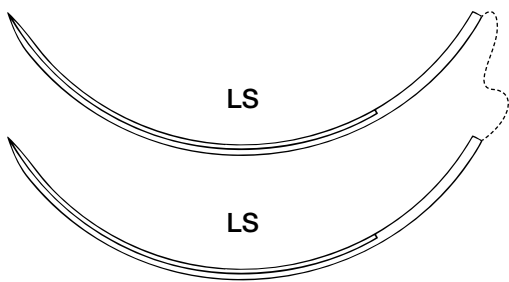
3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS2	19,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	6661	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7142	H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7346	H
 FS2 VISI BLACK	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7018	H
 FS2S	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	6683	H

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

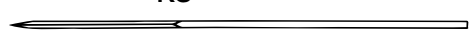
3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS1	24,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	6663 H
 FS1 VISI BLACK	24,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7033 H
 FS	26,0	grün geflochten	2-0	3	0,45	36	6664 H
		grün geflochten CR	2-0	3	5*0,45	36	5FK 6344 Y H
 FSL	30,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7687 H
		grün geflochten CR	2-0	3	8*0,45	12	8FL 6344 Y G
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7688 H
 FSLX	36,4	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7562 H
 LS LS	90,0	grün geflochten; mit 2 Polyethylenplatten und 2 Silikonplatten	5	7	0,75	6	EH 7610

1/2 gebogene schneidende Nadel ▼

 PB1	22,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7579 H

gerade schneidende Nadel ▼

 KS	60,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7722 H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7723 H

CR = Abziehbare Nadel

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

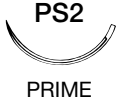
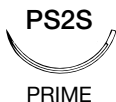
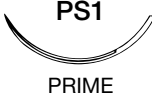
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	11,0	grün geflochten	6-0	0,7	0,45	36	6697 H
	11,0	grün geflochten	6-0	0,7	0,45	36	EH 7065 H
	13,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	6698 H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7573 H
	13,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	EH 7260 H
	16,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	6681 H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7760 H
	16,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7081 H

ETHIBOND EXCEL, Polyester, geflochten, beschichtet

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 PS2 PRIME	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7160 H
		grün geflochten MULTIPAK	4-0	1,5	4*0,45	36	EH 7160 B H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7570 H
		grün geflochten MULTIPAK	3-0	2	4*0,45	36	EH 7570 B H
		grün geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7556 H
		weiss geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7138 H
 PS2 VISI BLACK	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7085 H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7086 H
 PS2S PRIME	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	6682 H
 PS1 PRIME	24,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7755 H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7569 H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7551 H
 PS	26,0	grün geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7100 H
 PSL	30,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7110 H
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7111 H

1/4 Kreis Spatula Nadel ▼

 S14 S14	8,0	weiss geflochten	5-0	1	0,45	12	W 893

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

ETHIBOND EXCEL, grün, geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	3-0	2	36	EH 6433	H
	2-0	3	36	EH 6434	H
	0	3,5	36	EH 6435	H
	1	4	36	EH 6436	H
	2	5	36	EH 6437	H
6 x 45 cm	5-0	1	36	EH 6441	H
	4-0	1,5	36	EH 6442	H
	3-0	2	36	EH 6443	H
	2-0	3	36	EH 6444	H
	0	3,5	36	EH 6445	H
	1	4	36	EH 6446	H
	2	5	36	EH 6447	H
12 x 45 cm	5-0	1	36	EH 6371	H
	3-0	2	36	EH 6373	H
	2-0	3	36	EH 6374	H
	0	3,5	24	EH 6375	E
2 x 70 cm	2-0	3	36	EH 6454	H
	0	3,5	36	EH 6455	H
	1	4	36	EH 6456	H
	2	5	36	EH 6457	H
	3	6	36	EH 6458	H
	5	7	36	EH 6459	H
5 x 70 cm	2-0	3	36	EH 6524	H
	0	3,5	36	EH 6525	H
	1	4	36	EH 6526	H
	2	5	36	EH 6527	H

BESCHREIBUNG

MERSILENE® ist ein steriles nicht resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus Polyethylenterephthalat, das in geflochtener Ausführung, als auch monofil erhältlich ist. MERSILENE® ist sowohl ungefärbt (weiß) als auch mit grüner Einfärbung (D&C Nr. 6, Color Index Nr. 61565) erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

MERSILENE® ist zur Adaptation von Weichgeweben und/oder zur Ligatur einschließlich neurochirurgischer, ophthalmologischer und kardiovaskulärer Eingriffe, sowie zur Fixierung von Weichgeweben an knöchernen Strukturen (z.B. Sehnennaht, Trochanternaht) vorgesehen.

WIRKUNG

MERSILENE® Nahtmaterial ruft anfangs lediglich eine geringfügige entzündliche Gewebereaktion hervor, auf die eine langsam fortschreitende, bindegewebige Einkapselung folgt. In vivo Studien konnten zeigen, dass nach der Implantation des Materials in das Unterhautfettgewebe, bei einem Beobachtungszeitraum von 180 Tagen kein Verlust der Zugfestigkeit auftrat.

GEGENANZEIGEN

Nicht bekannt.

MERSILENE, Polyester, geflochten

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

RB1-plus 	17,0	grün geflochten	5-0	1	0,75	36	R 870	H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	R 871	H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	R 872	H
SH1-plus 	22,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	EH 7385	H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7386	H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7387	H
SH 	26,0	grün geflochten	0	3,5	4*0,45	36	R 836	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7526	H
SH-plus 	26,0	grün geflochten	3-0	2	0,75	36	R 832	H
		grün geflochten	2-0	3	0,75	36	R 833	H
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	R 834	H
MH-plus 	36,4	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	R 843	H
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	R 844	H
		grün geflochten	1	4	0,75	36	R 845	H
CTX-plus 	48,0	grün geflochten CR	1	4	6*0,45	12	R 440	G

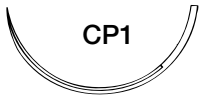
1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☿

V5 	17,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,75	36	R 952	H
		grün geflochten	3-0	2	0,75	36	R 953	H
V6 	22,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	R 955	H
V7 	26,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	R 964	H

MERSILENE, Polyester, geflochten

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	17,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	R 730 H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7546 H
	22,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7689 H
	26,0	grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7325 H
	36,4	grün geflochten	1	4	0,75	36	EH 7350 H

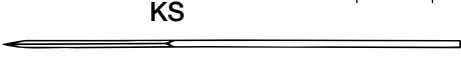
3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	16,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	R 670 H
	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7147 H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7352 H
		grün geflochten MULTIPAK	3-0	2	4*0,45	24	EH 7352 B E
	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	R 683 H
	24,0	grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7684 H
		grün geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7683 H
	26,0	weiß geflochten	2-0	3	0,45	36	R 665 H
	30,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7638 H
		grün geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7637 H
		grün geflochten MULTIPAK	0	3,5	4*0,45	12	R 673 G
		grün geflochten MULTIPAK	0	3,5	6*0,45	12	R 674 G
		weiß geflochten	2-0	3	0,45	36	R 677 H

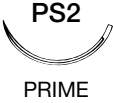
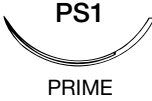
MERSILENE, Polyester, geflochten

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

gerade schneidende Nadel ▼

	60,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	R 623 H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	11,0	grün geflochten	6-0	0,7	0,45	36	R 697 H
	13,0	grün geflochten	5-0	1	0,45	36	R 698 H
		grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	R 699 H
		weiss geflochten	4-0	1,5	0,45	36	R 691 H
	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7164 H
		grün geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7750 H
		grün geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7559 H
	19,0	grün geflochten	4-0	1,5	0,45	36	1617 H
	24,0	grün geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7554 H

MERSILENE, Polyester, geflochten

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/4 Kreis Spatula Nadel

	8,0	weiss geflochten	5-0	1	0,45	12	746 G
	8,0	weiss geflochten	4-0	1,5	0,45	12	1778 G
	8,0	weiss geflochten	5-0	1	0,45	12	1760 G
	8,0	weiss geflochten	4-0	1,5	0,45	12	1763 G

3/8 Kreis Spatula Nadel

 	8,1	weiss geflochten	4-0	1,5	0,45	12	EH 7338 G

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

MERSILENE, grün geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
2 x 45 cm	2	5	36	EH 6739	H
3 x 45 cm	3-0	2	36	EH 6853	H
	2-0	3	36	EH 6854	H
	0	3,5	36	EH 6855	H
	1	4	36	EH 6856	H
	2	5	36	EH 6857	H
	3	6	36	EH 6858	H
6 x 45 cm	5-0	1	36	EH 6731	H
	4-0	1,5	36	EH 6732	H
	3-0	2	36	EH 6733	H
	2-0	3	36	EH 6734	H
	0	3,5	36	EH 6735	H
	1	4	36	EH 6736	H
	2	5	36	EH 6737	H
12 x 45 cm	3-0	2	36	EH 6663	H
	2-0	3	36	EH 6664	H
	0	3,5	24	EH 6665	E
	1	4	24	EH 6666	E
2 x 70 cm	2-0	3	36	EH 6884	H
	2	5	36	EH 6887	H
	3	6	24	EH 6888	E
5 x 70 cm	0	3,5	36	EH 6935	H
	1	4	36	EH 6936	H
	2	5	36	EH 6937	H
1 x 100 cm	5	7	36	ZLO 110	H
1 x 140 cm	3-0	2	36	EH 6413	H
	2	5	36	EH 6417	H
1 x 250 cm	2	5	12	EH 6407	G

MERSILENE, weiss geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
12 x 45 cm	4-0	1,5	36	EH 6672	H

ETHILON® schwarz/weiß

BESCHREIBUNG

ETHILON® schwarz/weiß ist ein monofiles, chirurgisches, steriles Nahtmaterial, das nicht resorbierbar ist und aus Polyamid 6 oder Polyamid 6/6 besteht.

Das Polyamid 6/6 entsteht durch die Polykondensation von Hexamethylendiamin und Adipinsäure. Polyamid 6 entsteht durch die Polymerisation von ε-Caprolactam. ETHILON® schwarz wird mittels HCK-Hämatin gefärbt (Color Index Nr. 75290). Es wird auch in weiß (farblos) angeboten.

ANWENDUNGSGEBIETE

ETHILON® schwarz/weiß wird für Nähte und/oder Ligaturen von Weichgeweben bei kardiovaskulären, ophthalmologischen, neurochirurgischen und mikrochirurgischen Eingriffen verwendet.

WIRKUNG

ETHILON® schwarz/weiß bewirkt anfangs lediglich eine geringfügige entzündliche Gewebereaktion, auf die eine langsam fortschreitende, bindegewebige Einkapselung folgt. Polyamid wird nicht resorbiert, es kann jedoch durch fortschreitende Hydrolyse des Polyamids in vivo im Laufe der Zeit zu einem allmählichen Verlust an Reißfestigkeit kommen.

GEGENANZEIGEN

Da ETHILON® schwarz/weiß im Laufe der Zeit einen Teil seiner Reißfestigkeit verliert, ist es nicht geeignet für Indikationen, bei denen eine dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials erforderlich ist.

ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			
3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉							
BV8	3,5	schwarz monofil	11-0	0,1	0,05	12	EH 7436 G
BV4	4,9	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	2814 G
		schwarz monofil	9-0	0,3	0,15	12	EH 7448 G
BV4 BV4	4,9	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	EH 7509 G
BV6	5,1	schwarz monofil	11-0	0,1	0,10	12	EH 7438 G
BV75-4	5,1	schwarz monofil	10-0	0,2	0,10	12	EH 7444 G
BV2	6,5	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	2810 G
		schwarz monofil	9-0	0,3	0,15	12	2809 G
		schwarz monofil	8-0	0,4	0,15	12	2808 G
BV2 BV2	6,5	schwarz monofil	9-0	0,3	0,10	24	EH 7466 E
BV1	9,3	schwarz monofil	7-0	0,5	0,45	36	EH 7446 H
C1	13,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7500 H

ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

gerade Rundkörper Nadel ☺

	75,0	schwarz monofil	2-0	3	0,90	36	EH 7626 H

3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☺

	3,5	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	EH 7815 G

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	13,0	schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	648 H

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	13,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	667 H
		schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	668 H
	13,0	schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	644 H
	16,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	660 H
	16,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7177 H
	19,0	schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	661 H
		schwarz monofil	5-0	1	0,75	36	FH 5171 H
		schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7145 H
		schwarz monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7506 H
	19,0	schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	662 H
		weiß monofil	4-0	1,5	0,45	36	611 H

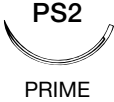
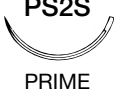
ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS1	24,0	schwarz monofil	3-0	2	0,45	36	663	H
		schwarz monofil	3-0	2	0,75	36	669	H
 FS1S	24,0	schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7640	H
 FS	26,0	schwarz monofil	2-0	3	0,45	36	664	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 P6	8,0	schwarz monofil	7-0	0,5	0,45	36	1647	H
 P1 PRIME	11,0	schwarz monofil	7-0	0,5	0,45	36	1696	H
		schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	697	H
 P3 PRIME	13,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	1698	H
		schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	698	H
		schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	699	H
		weiß monofil	5-0	1	0,45	36	690	H
 PS3 PRIME	16,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7662	H
		schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7663	H
		schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7761	H
 PS2 PRIME	19,0	schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	1666	H
		schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7163	H
		schwarz monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7751	H
		schwarz monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7665	H
		schwarz monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7558	H
		weiß monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7139	H
 PS2S PRIME	19,0	schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	1667	H
 PS1 PRIME	24,0	schwarz monofil	3-0	2	0,45	36	1663	H
		schwarz monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7563	H
		schwarz monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7553	H

ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

P1 MultiPass 	11,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPE 697 H
P3 MultiPass 	13,0	schwarz monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPE 1698 H
		schwarz monofil	5-0	1	0,45	36	MPE 698 H
PS2 MultiPass 	19,0	schwarz monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPE 24022 H
		schwarz monofil	3-0	2	0,75	36	MPE 7665 H
PS2S MultiPass 	19,0	schwarz monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPE 1667 H
PS1 MultiPass 	24,0	schwarz monofil	3-0	2	0,75	36	MPE 7563 H

1/2 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

UCS44 	5,4	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	7061 G
CSS160 	5,4	schwarz monofil	10-0	0,2	0,30	12	7000 G
CS44C 	5,5	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	EH 7990 G
		schwarz monofil	9-0	0,3	0,15	12	EH 7991 G
CS44C CS44C 	5,5	schwarz monofil	10-0	0,2	0,30	12	EH 7995 G

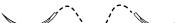
ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

CS35C 	6,0	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	EH 7980	G
		schwarz monofil	9-0	0,3	0,15	12	EH 7981	G
CS35C CS35C 	6,0	schwarz monofil	10-0	0,2	0,30	12	EH 7985	G
UCS35 	6,2	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	7060	G
		schwarz monofil	10-0	0,2	0,30	12	9033	G
CS140-6 CS140-6 	6,2	schwarz monofil	10-0	0,2	0,30	12	7003	G
GS9 GS9 	6,5	schwarz monofil	9-0	0,3	0,30	12	1717	G
		schwarz monofil	8-0	0,4	0,30	12	ECC 5132	G
GS13 	6,5	schwarz monofil	11-0	0,1	0,10	12	EH 7465	G
		schwarz monofil	10-0	0,2	0,10	12	EH 7467	G

1/4 Kreis Spatula Nadel

S4 S4 	8,0	weiß monofil	4-0	1,5	0,45	12	EH 7136	G

ETHILON, Polyamid, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/4 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze

 GS8	6,5	schwarz monofil	7-0	0,5	0,30	36	EB 5133 H

Asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze

 UCSA48	4,8	schwarz monofil	10-0	0,2	0,15	12	7062 G
 UCSA48 UCSA48	4,8	schwarz monofil	10-0	0,2	0,20	12	7008 G
 CSA48C	5,0	schwarz monofil	10-0	0,2	0,10	12	EH 7998 G
 CSA48C CSA48C	5,0	schwarz monofil	10-0	0,2	0,20	12	EH 7999 G

Spezielle Kombinationen

 UCS35 UCS35  PS3	6,2 16,0	ETHILON schwarz monofil, PERMA-HAND SEIDE, schwarz geflochten, Katarakt-Set	10-0 4-0	0,2 1,5	0,15 0,45	24	7003 K E

ETHILON® II blau

BESCHREIBUNG

ETHILON® II blau ist ein synthetisches, nicht resorbierbares monofiles, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyamid 6. Polyamid 6 entsteht durch die Polymerisation von ε-Caprolactam. ETHILON® II blau wird durch ein blaues Pigment gefärbt (Color Index Nr. 69800).

ANWENDUNGSGEBIETE

ETHILON® II blau wird für Hautnähte eingesetzt.

WIRKUNG

Da ETHILON® II blau nicht am Gewebe haftet, können die Fäden leicht entfernt werden.

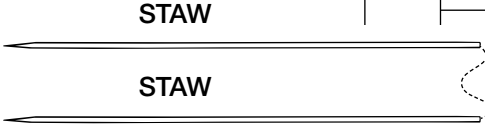
GEGENANZEIGEN

Nicht bekannt.

ETHILON II, Polyamid 6, monofil

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

gerade Rundkörper Nadel ☉

	65,0	blau monofil	2-0	3	0,75	24	EH 7625	E
		blau monofil	0	3,5	0,75	24	EH 7624	E

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7940	H
	17,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7942	H
	22,0	blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7943	H

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7945	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7821	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7822	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7823	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7824	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7173	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7174	H
	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7790	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7144	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7143	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7792	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7797	H

ETHILON II, Polyamid 6, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS2 VISI BLACK	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7269	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7270	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7012	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7271	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7013	H
 FS2S	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7791	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7793	H
 FS1	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7825	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7794	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7795	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7826	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7827	H
 FS1 VISI BLACK	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7272	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7273	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7274	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7275	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7276	H
 FS	26,0	blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7796	H
 FS VISI BLACK	26,0	blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7037	H
 FSL	30,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7939	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7937	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7798	H
		blau monofil	0	3,5	0,45	36	EH 7938	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	EH 7799	H
 FSLX	36,4	blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7807	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	EH 7809	H

ETHILON II, Polyamid 6, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

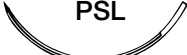
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7800	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7801	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7277	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7268	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7930	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7955	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7931	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	JD 5273	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7070	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7071	H
	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7804	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7162	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7161	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7803	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7933	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7953	H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7278	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7279	H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7802	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7932	H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7280	H
	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7957	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7956	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7805	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7954	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7806	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7808	H

ETHILON II, Polyamid 6, monofil

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 PS1 	24,0	blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7281	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7282	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7283	H
 PS	26,0	blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7101	H
 PSL	30,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7113	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7114	H
		blau monofil	0	3,5	0,45	36	EH 7118	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	EH 7115	H

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

 P3 MultiPass	13,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPE 7800	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPE 7801	H
 PS3 MultiPass	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPE 7930	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	MPE24012	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPE 7931	H
 PS2 MultiPass	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPE 7804	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPE 1855	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPE 7161	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	MPE 1621	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	MPE 7933	H
 PS1 MultiPass	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPE 7956	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	MPE 7954	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	MPE 7808	H
 PS MultiPass	26,0	blau monofil	3-0	2	0,45	36	MPE 1685	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	MPE 1626	H

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

ETHILON II, blau monofil

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
10 x 45 cm	3-0	2	36	EH 6562	H

PERMA - HAND SEIDE

BESCHREIBUNG

PERMA-HAND-SEIDE ist ein nicht resorbierbares, steriles, chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus einem organischen Protein, dem sogenannten Fibroin. Dieses Protein wird aus der gezüchteten Seidenraupenpuppe *Bombyx mori* (B. mori) der Familie der Bombycidae gewonnen. Die für die Flechtung vorgesehenen Fäden werden von ihrer natürlichen Leim- und Wachsschicht befreit. Die geflochtene PERMA-HAND-SEIDE wird mit Wachs überzogen und mit Hämatin schwarz gefärbt (Color Index Nr. 75290). Das Nahtmaterial ist auch ungefärbt erhältlich. Für gedrehte PERMA-HAND-SEIDE wird das Sericin nicht entfernt und hält die Filamente zusammen. Gedrehte PERMA-HAND-SEIDE ist erhältlich in blau, gefärbt mit Methylenblau (Color Index Nr. 52015) oder in schwarz, gefärbt mit Hämatin (Color Index Nr. 75290).

ANWENDUNGSGEBIETE

PERMA-HAND-SEIDE ist zur Adaptation von Weichgeweben und/oder zur Ligatur vorgesehen, einschließlich bei neurochirurgischen, ophthalmologischen und kardiovaskulären Eingriffen.

WIRKUNG

PERMA-HAND-SEIDE verursacht im Gewebe eine minimale, akute, entzündliche Reaktion, gefolgt von einer bindegewebigen Einkapselung des Fadens.

Obwohl PERMA-HAND-SEIDE nicht resorbierbar ist, kann die fortschreitende Degradation der proteinhaltigen Seidenfäden im Körper zu einem Verlust der Reißfestigkeit führen.

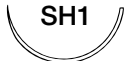
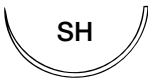
GEGENANZEIGEN

PERMA-HAND-SEIDE darf nicht bei Patienten verwendet werden, die eine bekannte Sensibilisierung oder Allergie gegen Seide aufweisen. Da PERMA-HAND-SEIDE im Laufe der Zeit einen Teil seiner Reißfestigkeit verliert, ist es nicht geeignet für Indikationen, bei denen eine dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials erforderlich ist.

PERMA-HAND SEIDE

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	8,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,45	36	N 271 H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	N 272 H
	13,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	N 267 H
	13,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,45	36	N 266 H
		schwarz geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	8PA 3544 Y E
	17,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,75	36	K 870 H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 871 H
		schwarz geflochten	3-0	2	0,75	36	K 872 H
		schwarz geflochten CR	3-0	2	8*0,45	24	C 53 E
		schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	K 873 H
	22,0	schwarz geflochten CR	2-0	3	8*0,45	24	C 2 E
	22,0	schwarz geflochten	3-0	2	0,75	36	EH 7343 H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7344 H
	26,0	schwarz geflochten	1	4	0,75	36	K 835 H
	26,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 831 H
		schwarz geflochten	3-0	2	0,75	36	K 832 H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	K 833 H
		schwarz geflochten	0	3,5	0,75	36	K 834 H
	36,4	schwarz geflochten	0	3,5	0,75	36	K 844 H
		schwarz geflochten	1	4	0,75	36	K 845 H

PERMA-HAND SEIDE

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	9,3	schwarz geflochten	7-0	0,5	0,30	36	K 803	H
		schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	36	K 802	H
	9,3	schwarz geflochten	7-0	0,5	0,75	36	K 804	H
	13,1	schwarz geflochten	6-0	0,7	0,75	36	K 889	H
		schwarz geflochten	5-0	1	0,75	36	K 890	H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 891	H
	17,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,75	36	K 880	H

gerade Rundkörper Nadel ☉

	19,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 861	H
	48,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	K 853	H
		schwarz geflochten	0	3,5	0,75	36	K 854	H

3/8 Kreis stumpfe Rundkörper Nadel ○

	17,0	schwarz geflochten	3-0	2	2*0,45	12	EH 7434	G

PERMA-HAND SEIDE

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	17,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,75	36	K 951	H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 952	H
		schwarz geflochten	3-0	2	0,75	36	K 953	H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	K 954	H
	17,0	schwarz geflochten	3-0	2	0,75	36	K 936	H
	26,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	K 964	H

3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	17,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,75	36	K 942	H

1/2 Kreis schneidende Nadel

	17,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	734	H
		schwarz geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7547	H
	22,0	schwarz geflochten	3-0	2	0,45	36	632	H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,45	36	737	H

3/8 Kreis schneidende Nadel

	13,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,45	36	719	H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	736	H
	13,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	739	H
	19,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	12	EH 7149	G
		schwarz geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7345	H
	19,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	683	H

PERMA-HAND SEIDE

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

 FS1	24,0	schwarz geflochten	3-0	2	0,45	36	684	H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7633	H
 FS	26,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,45	36	685	H
 FSL	30,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	679	H
		schwarz geflochten	0	3,5	0,45	36	678	H
		schwarz geflochten	0	3,5	0,75	36	680	H
 FSLX	36,4	schwarz geflochten	0	3,5	0,75	36	EH 7560	H

gerade schneidende Nadel ▼

 KS	60,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7724	H

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

 P1 PRIME	11,0	schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	36	639	H
 P3 PRIME	13,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,45	36	640	H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	641	H
 PS3 PRIME	16,0	schwarz geflochten	5-0	1	0,45	36	1678	H
		schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	EH 7763	H
 PS2 PRIME	19,0	schwarz geflochten	3-0	2	0,45	36	EH 7660	H
		schwarz geflochten	2-0	3	0,45	36	EH 7557	H
 PS2S PRIME	19,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	36	1677	H
 PS1 PRIME	24,0	schwarz geflochten	2-0	3	0,75	36	EH 7552	H

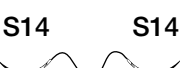
PERMA-HAND SEIDE

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Mikrospitze ▼

 G8	6,5	blau gedreht	8-0	0,4	0,30	12	EH 7457	G
 G6	8,0	schwarz geflochten	7-0	0,5	0,30	12	EH 7464	G
		schwarz geflochten	6-0	0,7	0,30	12	EH 7435	G
 G6 G6	8,0	schwarz geflochten	7-0	0,5	0,45	12	768	G
		schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	12	769	G
 G1	11,0	schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	12	786	G
 G1 G1	11,0	schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	12	780	G
 G3	13,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	12	789	G
 G3 G3	13,0	schwarz geflochten	4-0	1,5	0,45	12	783	G

1/4 Kreis Spatula Nadel ▼

 S14 S14	8,0	schwarz geflochten	6-0	0,7	0,45	12	1780	G
		schwarz geflochten	5-0	1	0,45	12	EH 7440	G

3/8 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

 GS12	5,5	blau gedreht	8-0	0,4	0,30	12	EH 7458	G
 GS9 GS9	6,5	schwarz geflochten	7-0	0,5	0,45	12	ECC 3543	G

SUTUPAK · Nahtmaterial in vorgeschnittenen Längen

PERMA-HAND SEIDE, schwarz, geflochten

Fadenanzahl per Folie Fadenlänge in cm	Fadenstärke		Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer	
	USP	metric			
3 x 45 cm	4-0	1,5	36	EH 6762	H
	3-0	2	36	EH 6763	H
	0	3,5	36	EH 6765	H
	2	5	36	EH 6767	H
6 x 45 cm	4-0	1,5	36	EH 6712	H
	3-0	2	36	EH 6713	H
	0	3,5	24	EH 6715	E
12 x 45 cm	4-0	1,5	24	EH 6722	E
	3-0	2	24	EH 6723	E
	2-0	3	36	EH 6724	H
	1	4	24	EH 6726	E
2 x 70 cm	1	4	24	EH 6836	E
	2	5	24	EH 6837	E
	5	7	24	EH 6839	E
5 x 70 cm	2-0	3	36	EH 6824	H
1,40 m	1	4	36	EH 6806	H
	2	5	36	EH 6807	H

BESCHREIBUNG

PROLENE® ist ein steriles, monofiles, nicht resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus einem isotaktischen, kristallinen Stereoisomer von Polypropylen. Prolene® ist sowohl ungefärbt (transparent) als auch mit blauer Einfärbung (Phthalocyanin-blau, Color Index Nr. 74160) erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

PROLENE® wird allgemein bei der Naht und der Ligatur von Weichgewebe verwendet, einschließlich bei neurochirurgischen, ophthalmologischen und kardiovaskulären Eingriffen.

WIRKUNG

PROLENE® bewirkt anfangs, lediglich eine geringe, entzündliche Gewebereaktion, auf die eine langsam fortschreitende, bindegewebige Einkapselung folgt. Prolene® wird weder resorbiert noch durch Gewebeenzyme angegriffen. Da das Material biologisch relativ inert ist, wird seine Verwendung dort empfohlen, wo eine möglichst geringe Gewebereaktion erwünscht ist. Als Monofilament wird es besonders bei solchen Wunden erfolgreich verwendet, die sich in der Folge kontaminieren oder infizieren können. Das Risiko der Bildung von Wundhöhlen und der Nahtabstoßung kann so auf ein Minimum reduziert werden. Weil PROLENE® nicht mit dem Gewebe verklebt, ist es besonders für Nähte geeignet, die später gezogen werden müssen.

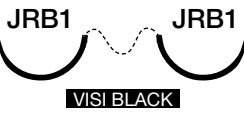
GEGENANZEIGEN

Nicht bekannt.

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

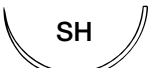
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	6,5	blau monofil	7-0	0,5	0,30	24	EH 7811	E
		blau monofil	6-0	0,7	0,30	24	EH 7812	E
	6,5	blau monofil	7-0	0,5	0,45	24	EH 7813	E
		blau monofil	6-0	0,7	0,45	24	EH 7814	E
	10,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7830	H
	10,0	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	PUU 5670	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7835	H
		blau monofil; Langpackung mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	5-0	1	0,60	36	EH 7834 L	G
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7404	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7400	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7401	H
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	5-0	1	0,75	36	EH 7412	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 7411	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8711	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	8710	H
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	8870	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8871	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	8872	H
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,90	36	8556	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8557	H
		blau monofil	4-0	1,5	1,20	36	PBB 5613	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	8558	H
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,90	36	EH 8075	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 8074	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 8073	H
	22,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7581	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7582	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

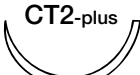
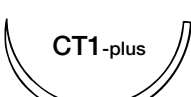
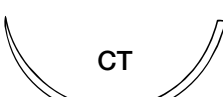
1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☹

 JB1 VISI BLACK	22,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 8078	H
 SH1	22,0	blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 7585	H
		blau monofil	4-0	1,5	1,20	36	PEE 5613	H
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	4-0	1,5	0,75	36	EH 7535	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 7586	H
 JB1 VISI BLACK	22,0	blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	5-0	1	0,90	36	EH 8066	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 8081	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 8080	H
 SH	26,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8831	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	8832	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	8833	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	8834	H
 SH-plus	26,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	PF 5672 S	H
 JB VISI BLACK	26,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 8083	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 8082	H
 SH	26,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7587	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8529	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8521	H
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	4-0	1,50	0,90	36	EH 7588	H
		blau monofil	4-0	1,5	1,20	36	EH 7583	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	8528	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	8522	H
		blau monofil	3-0	2	1,20	36	EH 7584	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	8523	H
 SH-plus	26,0	blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	4-0	1,5	0,90	12	EH 7190 L	G

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis Rundkörper Nadel ☉ und flache Rundkörper Nadel ☿

	26,0	blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 8087	H
		blau monofil	4-0	1,5	1,20	36	X 1166	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 8086	H
		blau monofil mit Ethisorb-Pledget 5 x 8 mm	3-0	2	0,90	36	EH 8061	H
	36,4	blau monofil	2-0	3	0,75	36	PG 5674	H
	36,4	blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 7499	H
		blau monofil	3-0	2	1,20	36	PGG 5613	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	PGG 5694	H
		blau monofil	2-0	3	1,20	36	PGG 5614	H
		blau monofil	0	3,5	0,90	36	PGG 5695	H
	36,4	blau monofil	3-0	2	1,20	36	X 1295	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	EH 8090	H
		blau monofil	2-0	3	1,20	36	X 1296	H
	26,0	blau monofil	1	4	0,75	36	PK 5676	H
	26,0	blau monofil	2-0	3	0,75	36	8411	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	8412	H
	36,4	blau monofil	2-0	3	0,75	36	8423	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	8424	H
		blau monofil	1	4	0,75	36	8425	H
	40,0	blau monofil	1	4	1,00	12	W 742	
	48,0	blau monofil als Schlinge	1	4	1,50	12	8527	G

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Rundkörper Nadel Ⓞ

BV4 	4,9	blau monofil	10-0	0,2	0,15	12	EH 7596 G
BV2 	6,5	blau monofil	9-0	0,3	0,15	12	EH 7597 G
BV130-5 BV130-5 	6,5	blau monofil	8-0	0,4	0,45	24	EH 7470 E
		blau monofil	8-0	0,4	0,60	36	KHH 5662 H
		blau monofil	8-0	0,4	0,75	24	EH 7469 E
		blau monofil; Langpackung	8-0	0,4	0,75	12	EH 7469 L G
		blau monofil	7-0	0,5	0,45	36	KHH 5643 H
		blau monofil	7-0	0,5	0,70	36	KHH 5673 SH
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	2*0,75	12	KHL 5673 JG
BV130-5 BV130-5  VISI BLACK	6,5	blau monofil	8-0	1,5	0,75	24	EH 7456 E
		blau monofil	8-0	0,4	0,45	12	X 916 G
		blau monofil	8-0	0,4	0,75	24	EH 7459 E
		blau monofil; Langpackung	8-0	0,4	0,75	12	EH 7459 L G
		blau monofil	7-0	0,5	0,60	36	8207 H
BV1 	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7403 H
BV1  VISI BLACK	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7220 H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7221 H
BV175-8 	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7402 H
BV1 BV1 	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7406 H
BV1 BV1  VISI BLACK	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,45	36	EH 7225 H
		blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	X 1212 H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7223 H
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	4*0,60	12	X 966 G

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

BV175-8 BV175-8 	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,45	36	8701 H
		blau monofil	7-0	0,5	0,60	36	KAA 5660 H
		blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7405 H
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	4*0,75	12	M 8702 G
BV175-8 BV175-8  VISI BLACK	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,07	36	EH 7454 H
		blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7222 H
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	2*0,75	12	MEH 7224 J G
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	4*0,60	12	X 967 G
BV1X BV1X 	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7245 H
BV1X BV1X  VISI BLACK	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7240 H
BV175-7 BV175-7 	8,0	blau monofil	8-0	0,4	0,60	36	8767 H
		blau monofil; Langpackung	8-0	0,5	2*0,60	12	M 8767
		blau monofil	7-0	0,5	0,60	36	8766 H
BV175-7 BV175-7  VISI BLACK	8,0	blau monofil	8-0	0,4	0,60	36	8967 H
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	2*0,60	12	M 8966
BV175-6 BV175-6 	8,0	blau monofil	8-0	0,4	0,45	36	8740 H
		blau monofil	8-0	0,4	0,60	36	8741 H
BV175-6 BV175-6  VISI BLACK	8,0	blau monofil	8-0	0,4	0,60	36	8841 H
		blau monofil; Langpackung	8-0	0,4	4*0,60	12	M 8941
		blau monofil	7-0	0,5	0,60	36	8335 H
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,4	2*0,60	12	M 8935
BV BV 	11,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8776 H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis Rundkörper Nadel Ⓢ

	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8889	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	8890	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7476	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7226	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7227	H
	13	blau monofil	6-0	0,7	0,55	36	KBB 5650	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8706	H
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	4*0,75	12	M 8706	G
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	8717	H
		blau monofil	5-0	1	0,60	36	KBB 5661	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7477	H
		blau monofil	5-0	1	0,90	36	8720	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7478	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	X 577	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7228	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,90	36	EH 7230	H
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	2*0,75	12	MEH 7232	J G
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7229	H
		blau monofil	5-0	1	0,90	36	EH 7231	H
		blau monofil; Langpackung	5-0	1	4*0,60	12	X 999	G
		blau monofil	5-0	1	4*0,70	12	8725 B	G
		blau monofil; Langpackung	5-0	1	2*0,75	12	MEH 7233	J G
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7254	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7255	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7257	H
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	8880	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8881	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7481	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

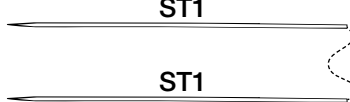
3/8 Kreis Rundkörper Nadel ☉

	17,0	blau monofil	5-0	1	0,90	36	8580	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8581	H
		blau monofil	4-0	1,5	1,20	36	KCC 5613	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 7480	H
 VISI BLACK	17,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 8051	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 8050	H

Asymptotische Rundkörper Nadel ☉

	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 8010	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 8014	H

gerade Rundkörper Nadel ☉

	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,35	36	EH 7508	H
	45,0	blau monofil	3-0	2	0,35	36	EH 7921	H

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ☿

 VISI BLACK	11,0	blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	0,60	12	X 1004	G
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	8951	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8952	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	8953	H
	17,0	blau monofil	5-0	1	0,90	36	8934	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8935	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	8936	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	8937	H
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	4-0	1,5	0,90	12	8955	G
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm; Langpackung	4-0	1,5	0,90	12	8954	G

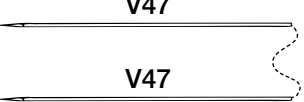
PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	22,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7770	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7771	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7772	H
	22,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	OKK 5672	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 7774	H
	26,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	8963	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	8964	H
	26,0	blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8975	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	8976	H
		blau monofil	3-0	2	1,20	36	EH 7778	H
		blau monofil mit 2 TFE-Pledgets 3 x 6 mm	3-0	2	0,90	36	OBB 5694 S	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	8977	H

gerade schneidende Rundkörper Nadel

	36,4	blau monofil	4-0	1,5	0,35	36	8592	H

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel mit Kurzschliff

 	13,0	blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	0,60	12	X 924	G
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	2*0,60	12	EH 7244	G
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7241	H
		blau monofil; Langpackung	5-0	1	2*0,75	12	MEH 7241 J	G

3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	5,5	blau monofil	8-0	0,4	0,60	24	EH 7828	E
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7471	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7472	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

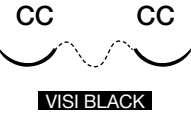
3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel

	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7474	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7475	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7258	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7259	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7253	H
	17,0	blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	8942	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	8943	H
	17,0	blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	8925	H
	26,0	blau monofil	4-0	1,5	0,90	36	EH 7787	H
		blau monofil	3-0	2	0,90	36	EH 7788	H
		blau monofil	2-0	3	0,90	36	EH 7829	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

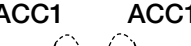
3/8 Kreis schneidende Rundkörper Nadel mit Kurzschliff ☺

	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7970	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7971	H
	9,3	blau monofil	8-0	0,4	0,60	24	EH 7972	E
		blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	8704	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8807	H
	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	X 1012	H
	9,3	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	X 1130	H
	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7236	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7235	H
	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 7237	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7234	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 7975	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7976	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7248	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	8719	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	8707	H
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	2*0,75	12	X 535	G
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7977	H
		blau monofil	5-0	1	0,90	36	8721	H
	13,0	blau monofil	5-0	1	0,75	36	EH 7251	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

Asymptotische schneidende Rundkörper Nadel ▼

 ACC  VISI BLACK	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	EH 8022	H
 ACC ACC  VISI BLACK	9,3	blau monofil	7-0	0,5	0,75	24	EH 8021	E
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	0,75	12	MEH 8024	G
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	2*0,75	12	MEH 8024 J	G
 ACC1  VISI BLACK	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 8032	H
 ACC1 ACC1  VISI BLACK	13,0	blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	0,75	12	MEH 8040	G
		blau monofil; Langpackung	7-0	0,5	2*0,75	12	MEH 8040 J	G
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	0,60	12	EH 8034	G
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	2*0,60	12	MEH 8033 J	G
		blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	EH 8030	H
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	0,75	12	MEH 8034	G
		blau monofil; Langpackung	6-0	0,7	2*0,75	12	MEH 8034 J	G
		blau monofil	6-0	0,7	0,90	36	EH 8031	H
		blau monofil	5-0	1	0,90	36	EH 8037	H

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

 J1	17,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	MD 5642	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7545	H
 CP2	26,0	blau monofil	0	3,5	0,75	36	EH 7171	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	FD 5640 H
	16,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	12	8750 G
	16,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7175 H
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7176 H
	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	8661 H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7151 H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	4-0	1,5	0,45	12	EH 7961 G
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7150 H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	8665 H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7693 H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	3-0	2	0,60	12	EH 7962 G
	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7284 H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7285 H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7026 H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7286 H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	8683 H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7692 H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7008 H
	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	8629 H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	8684 H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	3-0	2	0,60	12	EH 7963 G
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7694 H
	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7032 H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7287 H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7299 H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	26,0	blau monofil	2-0	3	0,45	36	8685	H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	2-0	3	0,60	12	EH 7964	G
	26,0	blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7038	H
	30,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	8675	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7697	H
		blau monofil	0	3,5	0,45	36	EH 7920	H
	36,4	blau monofil	2-0	3	0,75	36	8689	H
		blau monofil	0	3,5	0,75	36	EH 7561	H

1/2 gebogene schneidende Nadel ▼

	22,0	blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7578	H

gerade schneidende Nadel ▼

	60,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	8622	H

1/2 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	16,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7759	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

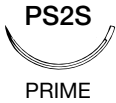
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	8,0	blau monofil	7-0	0,5	0,45	36	8648	H
	11,	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	8697	H
	11,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7060	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	8695	H
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	8698	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	8699	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,45	36	JA 5742	H
	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	EH 7288	H
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7289	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7290	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	8681	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7764	H
	16,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7075	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7076	H
	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	8686	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7168	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7167	H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	4-0	1,5	0,45	12	EH 7166	G
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7923	H
		blau monofil mit 2 Silikon-Perlen und 2 Alu-Plomben (je 1 fest)	3-0	2	0,60	24	JC 5663 V E	
		blau monofil mit 2 Fixierclips	3-0	2	0,60	12	EH 7667	G
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7691	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7555	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,45	36	JC 5743	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	EH 7169	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7291	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7090	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7293	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7292	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7294	H
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	8682	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7690	H
		blau monofil mit 2 Fixierclips	4-0	1,5	0,45	12	EH 7765	G
	19,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7295	H
	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	EH 7758	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	EH 7695	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	EH 7757	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7568	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7756	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7550	H
		blau monofil mit 2 Silikon-Perlen und 2 Alu-Plomben (je 1 fest)	3-0	2	0,60	24	EH 7670	E
		blau monofil mit 2 Fixierclips	3-0	2	0,60	12	EH 7666	G
	24,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7297	H
		blau monofil	2-0	3	0,75	36	EH 7298	H
	26,0	blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7102	H
	30,0	blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7120	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	EH 7123	H
		blau monofil	2-0	2	0,75	36	EH 7121	H
		blau monofil	0	3,5	0,45	36	EH 7124	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel PRIME MultiPass

P1 MultiPass 	11,0	blau monofil	7-0	0,5	0,75	36	MPP 2854	H
		blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPP 8697	H
P3 MultiPass 	13,0	blau monofil	6-0	0,7	0,45	36	MPP 8695	H
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPP 8698	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	MPP 2831	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPP 8699	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPP 2847	H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,75	36	MPP 2858	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPP 2860	H
PS3 MultiPass 	16,0	blau monofil	6-0	0,7	0,75	36	MPP 2832	H
		blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPP 8681	H
		blau monofil	5-0	1	0,75	36	MPP 2833	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPP 7764	H
		ungefärbt monofil	5-0	1	0,75	36	MPP 2859	H
PS2 MultiPass 	19,0	blau monofil	5-0	1	0,45	36	MPP 8686	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPP 8682	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPP 2834	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	MPP 8687	H
		blau monofil	3-0	2	0,75	36	EH 7691	H
		ungefärbt monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPP 2861	H
		ungefärbt monofil	3-0	2	0,75	36	MPP 2862	H
PS1 MultiPass 	24,0	blau monofil	4-0	1,5	0,45	36	MPP 7758	H
		blau monofil	4-0	1,5	0,75	36	MPP 7695	H
		blau monofil	3-0	2	0,45	36	MPP 7757	H
		blau monofil	2-0	3	0,45	36	MPP 7756	H

PROLENE, Polypropylen

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

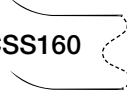
1/4 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

CTC6L 	13,0	blau monofil als Schlinge	10-0	0,2	0,10	12	EH 7896	G
		blau monofil	10-0	0,2	0,10	12	EH 7897	G

3/8 Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

GS12 	5,5	blau monofil	10-0	0,2	0,30	12	EH 7473	G

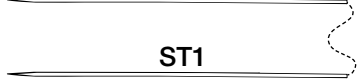
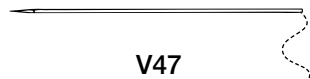
skiförmige Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

CSS160  CSS160	16,0	blau monofil	10-0	0,2	0,30	12	EH 7997	G

gerade Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

STC6 	16,0	blau monofil als Schlinge	10-0	0,2	0,15	12	EH 7900	G
STC6  STC6	16,0	blau monofil	10-0	0,2	0,20	12	1713	G

Spezielle Kombinationen

ST1  ST1  FS	45,0	blau monofil,	3-0	2	0,35	12	EH 7922	G
	26,0	Schlinge mit Polypropylen-Knopf, Ausziehnacht nach Bunnell			0,20			
V47  V47  FS	36,4	blau monofil,	4-0	1,5	0,35	12	EH 7668	G
	26,0	Schlinge mit Polypropylen-Knopf, Ausziehnacht nach Bunnell			0,20			

STAHL DRAHT

BESCHREIBUNG

STAHL DRAHT ist ein mono- oder polyfiles, nicht resorbierbares, steriles Nahtmaterial aus chirurgischem Edelstahl.

ANWENDUNGSGEBIETE

Nähte aus STAHL DRAHT eignen sich zum Bauchwandverschluß, sowie Zerclagen von Sternotomien und orthopädischen Operationen (u. a. Zerclagen, Sehnennähte).

WIRKUNG

STAHL DRAHT verursacht eine minimale, entzündliche Gewebereaktion und wird nicht resorbiert.

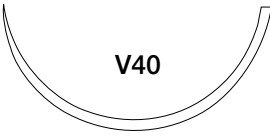
GEGENANZEIGEN

STAHL DRAHT ist bei Patienten kontraindiziert, bei denen eine Allergie gegenüber Stahl sowie Metallbestandteilen wie Chrom und Nickel besteht.

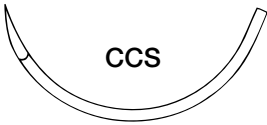
STAHLDRAHT

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/ Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

1/2 Kreis schneidende Rundkörper Nadel ▼

	48,0	monofil MULTIPAK	6	8	6*0,45	12	6OF 8348 G

1/2 Kreis schneidende Nadel ▼

	48,0	monofil	5	7	0,45	12	EH 7677 G
		monofil MULTIPAK	5	7	4*0,45	12	EH 7680 G
		monofil MULTIPAK	5	7	6*0,45	12	EH 7677 C G
	48,0	monofil MULTIPAK	3	6	3*0,60	12	3OM 8367 G
		monofil MULTIPAK	5	7	4*0,45	12	MEH 7210 G
		monofil MULTIPAK	5	7	6*0,45	12	MEH 7212 G
		monofil, MULTIPAK Langpackung	5	7	8*0,45	12	MEH 7218 G
		monofil MULTIPAK	5	7	3*0,60	12	MEH 7219 G
		monofil	6	8	0,45	12	OM 8349 G
		monofil MULTIPAK	6	8	4*0,45	12	653 B G
		monofil MULTIPAK	6	8	6*0,45	12	MEH 7213 G
		monofil MULTIPAK	6	8	8*0,45	12	MEH 7214 G
		monofil MULTIPAK	7	9	4*0,45	12	MEH 7211 G
		monofil, STERNOFLEX, die Nadel ist um 360° drehbar	5	7	0,45	12	EH 7216 G
		monofil, STERNOFLEX, MULTIPAK, die Nadel ist um 360° drehbar	5	7	6*0,45	12	MEH 7216 G

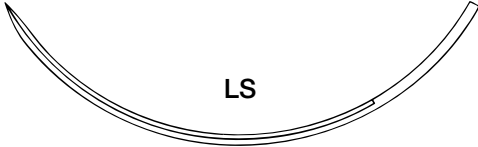
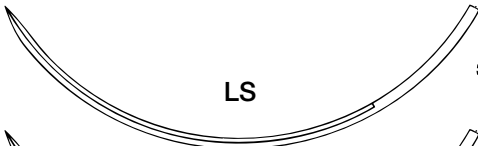
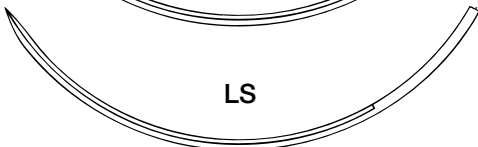
3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	30,0	polyfil	2-0	3	0,45	36	EH 7603 H
	45,0	monofil	2	5	0,6	12	400 G

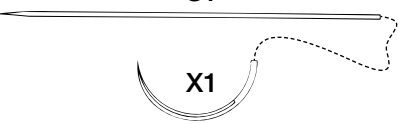
STAHLDRAHT

Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
			USP	metric			

3/8 Kreis schneidende Nadel ▼

	90,0	polyfil, Polyethylen beschichtet, mit 2 Polyethylen-Scheiben, 2 Silikon-Scheiben und 4 Bleiplomben	2	5	0,40	4	EH 7605
	90,0	polyfil, Polyethylen beschichtet, 2 Silikon-Platten mit 13 Loch	2	5	0,90	6	EH 7609
		polyfil, Polyethylen beschichtet, mit 2 Polystyrol-Platten, 2 Silikon-Platten mit 2 Einschnitten	2	5	0,90	4	EH 7612
		polyfil, Polyethylen beschichtet, mit 2 Polystyrol-Platten, 2 Silikon-Platten mit 5 Einschnitten	2	5	0,90	6	EH 7611
							

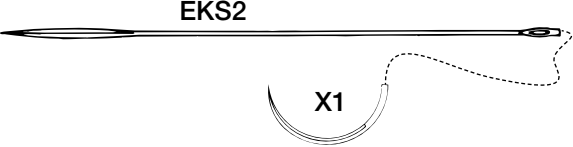
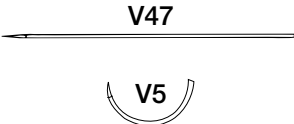
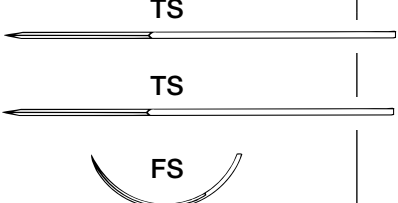
Spezielle Kombinationen

	48,0	STAHL DRAHT POLYFIL , mit Widerhaken, 2 Bleikugeln, 2 Silikonscheiben, 2 Stahlscheiben. Lengemann-Naht	2-0	3	0,30	12	SN 13 G
	22,0						

STAHL DRAHT

Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
			USP	metric			

Spezielle Kombinationen

 EKS2 X1	22,0 70,0	STAHL DRAHT POLYFIL mit Widerhaken, 2 Bleikugeln, 1 Silikonscheibe, 1 Stahlscheibe, Distanzhülse 9 mm. Lengemann- Naht 1 modifiziert nach Reck et al.	2-0	3	0,30	12	SN 1 G
 V47 V5	36,4 17,0	STAHL DRAHT POLYFIL mit Widerhaken, 1 Silikonscheibe, 2 Stahlscheiben, Lengemann-Naht	3-0	2	0,40	12	SN 17 G
 TS TS FS	48,0 26,0	STAHL DRAHT POLYFIL Schlinge mit Polypropylenknopf, Ausziehnah nach Bunnell	3-0	2	0,35	12	EH 7623 G

Implantate – resorbierbar

VICRYL Band

violett, flach gewebt, feste Struktur

Best.-Nr.

3 mm breit, 30 cm lang	VH 303
5 mm breit, 30 cm lang	VH 503
7,5 mm breit, 30 cm lang	VH 703
10 mm breit, 30 cm lang	VH 1003
15 mm breit, 30 cm lang	VH 1503
3 mm breit, 60 cm lang	VH 306
5 mm breit, 60 cm lang	VH 506
7,5 mm breit, 60 cm lang	VH 706
10 mm breit, 60 cm lang	VH 1006

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Band

violett, flach gewebt, feste Struktur Best.-Nr.

3 mm breit, 30 cm lang	ZH 303
5 mm breit, 30 cm lang	ZH 503
7,5 mm breit, 30 cm lang	ZH 703
10 mm breit, 30 cm lang	ZH 1003
15 mm breit, 30 cm lang	ZH 1503
3 mm breit, 60 cm lang	ZH 306
5 mm breit, 60 cm lang	ZH 506
7,5 mm breit, 60 cm lang	ZH 706
10 mm breit, 60 cm lang	ZH 1006
15 mm breit, 60 cm lang	ZH 1506

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Microband

violett, gewebt

Best.-Nr.

1,0 mm breit, 20 mm lang	ZH 1002
--------------------------	---------

2 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Kordel

violett, rund geflochten

Best.-Nr.

0,7 mm Ø, 75 cm lang, Langpackung	ZK 708
1,0 mm Ø, 150 cm lang	ZK 1015
1,2 mm Ø, 60 cm lang	ZK 1206
1,2 mm Ø, 150 cm lang	ZK 1215
1,3 mm Ø, 75 cm lang, Langpackung	ZK 1308
1,5 mm Ø, 60 cm lang	ZK 1506
2,0 mm Ø, 60 cm lang	ZK 2006

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Kordel

violett, rund geflochten,
mit transossärem Durchzieher

Best.-Nr.

1,5 mm Ø, 60 cm lang	ZX 1506
2,0 mm Ø, 60 cm lang	ZX 2006

1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Kordel

violett, rund geflochten
mit 2 transossären Durchziehern

Best.-Nr.

1 mm Ø, 60 cm lang	X 613
1,5 mm Ø, 60 cm lang	X 671
2,0 mm Ø, 60 cm lang	ZX 2026

1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Kordel II

violett, rund, zweifache Flechtung

Best.-Nr.

2,0 mm Ø, 70 cm lang	ZK 2007
2,0 mm Ø, 70 cm lang, mit transossärem Durchzieher	ZK 2017
2,0 mm Ø, 70 cm lang, mit 2 transossären Durchziehern	ZK 2027

1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 3 Folien

PDS Kordel

violett, rund, geflochten mit Nadel

Best.-Nr.

0,7 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadeln ASW1+ASW1	ZK 728
1,3 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadeln V68W+V68W	ZK 1328

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

0,8 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel CT1-plus für Kindersternum	Z 809 G
0,8 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel CT2-plus für Kindersternum	Z 811 G
1,0 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel CCS	Z 812 G
1,0 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel BPT1	Z 813 G
1,0 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel CPX	Z 814 G
1,0 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel BPT3	Z 825 G
1,0 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel V37	Z 835 G
1,5 mm Ø, 75 cm lang mit ATRALOC Nadel V40	Z 838 G
1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 12 Folien	

Implantate – resorbierbar

ETHIPIN Set – Knochenfixierstift – aus Polydioxanon, violett

Best.-Nr.

3 ETHIPIN PDS-Stifte 40 mm lang,
1,3 mm Ø ZP 4013
1 Meßsonde, 1 Stempel
2 Kirschnerdrähte, 1,3mm Ø
1 Set steril im Blister
Packung mit 3 Blistern

ETHIPIN Set – Knochenfixierstift – für die arthroskopische Anwendung

Best.-Nr.

5 ETHIPIN PDS-Stifte, 35 mm lang ZPA 4013
1,3 mm Ø
1 Stempel
1 Kirschnerdraht, 180 mm lang,
mit Meßmarkierung bei 20, 25, 30 und 35 mm
1 Set steril in Folienpackung
Packung mit 3 Blistern

ETHISORB Nahtwiderlager

ungefärbt, Polyglactin 910 (VICRYL)
und Polydioxanon (PDS)

Best.-Nr.

1 x 15 x 90mm ZV 1590
1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 6 Folien
1 x 15 x 30mm ZV 1530 G
1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 12 Folien
1 x 8 x 5mm ZV 805 H
2 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 36 Folien

ETHISORB Markraumplombe

ungefärbt, Polyglactin 910 (VICRYL)
und Polydioxanon (PDS)

Best.-Nr.

Ø oben 30mm ZV 3000
Ø unten 8mm
Höhe 15mm
Ø oben 25mm ZV 2500
Ø unten 8mm
Höhe 15mm
1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 6 Folien
Applikator für Markraumplombe ZV 2001
1 Stück unsteril verpackt
Packung mit einem Applikator

ETHISORB Patch Typ 6

ungefärbt, Polyglactin 910 (VICRYL)
und Polydioxanon (PDS)

Pack.-Inh.

Best.-Nr.

0,6 x 20 x 30mm 6 Stück ZVP 203
0,6 x 40 x 60mm 3 Stück ZVP 406
1 Stück steril in Folienpackung

ETHISORB Dura Patch

Komposite aus ETHISORB Vlies ungefärbt
und PDS Film violett

Pack.-Inh.

Best.-Nr.

2 x 3 cm 6 Stück EDP 23
4 x 6 cm 3 Stück EDP 46
6 x 14cm 1 Stück EDP 614
1 Stück steril in Folienpackung

ETHISORB Bohrlochplombe

ungefärbt, Polyglactin 910 (VICRYL)
und Polydioxanon (PDS)

Best.-Nr.

Ø Kopf 9mm, 2mm hoch ZV 709
Ø Schaft 7mm
Gesamtlänge 10mm
Ø Kopf 13mm, 2mm hoch ZV 1113
Ø Schaft 11mm
Gesamtlänge 10mm
Ø Kopf 16mm, 2mm hoch ZV 1416
Ø Schaft 14mm
Gesamtlänge 10mm
1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 6 Stück

VICRYL Kissen

Polyglactin 910, violett

Best.-Nr.

25mm breit, 60mm lang VX 50
1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 3 Folien

VICRYL Netze

Polyglactin 910, ungefärbt,
feinmaschig

Best.-Nr.

3 x 2 cm VM 302
6 x 5 cm VM 605
8 x 2 cm VM 802
10,5 x 8,5 cm VM 96
12 x 8 cm VM 1208
25 x 15 cm VM 2515
26,5 x 21,5 cm VM 94
30 x 3 cm VM 3003
28 x 18 cm VM 3020

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

grobmaschig
35 x 28 cm X 579

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 1 Folie

VICRYL Netz-Tasche

Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig

Best.-Nr.

nierenumhüllend
15x 8cm VM 101
18x 10cm VM 102
milzunmhüllend
26x 30cm VM 106
leberumhüllend/rechter Leberlappen
44x 30cm VM 210
leberumhüllend/linker Leberlappen
50x 20,5cm VM 220

1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 1 Folie

Implantate – resorbierbar

VICRYL Schlauch

Polyglactin 910, violett, gestrickt, lockere Struktur.
Gestrickte Hülle aus VICRYL zur Aufnahme und
Formgebung von Hydroxylapatit-Granulat bei
präprothetischem Kieferkammaufbau

Best.-Nr.

6 mm Ø, 15 cm lang	VL 615
8 mm Ø, 15 cm lang	VL 815
12 mm Ø, 15 cm lang	VL 1215

1 Stück steril Folienpackung
Packung mit 3 Folien

ETHISORB Alveolar -Tamponaden-Set

unefärbt, Polyglactin 910 (VICRYL)
und Polydioxanon (PDS)

Zylinder H: 7mm, B: 8mm

Vliesscheiben H: 1,5mm, B: 8 mm

Best.-Nr.

1 Zylinder, 3 Vliesscheiben	ATS 1
2 Zylinder, 3 Vliesscheiben	ATS 2
3 Zylinder, 6 Vliesscheiben	ATS 3

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 1 Folie

PDS Folie

Polydioxanon, violett, resorbierbar

Best.-Nr.

0,25 x 30 x 40 mm (Orbitazuschnitt)	ZX 3
0,50 x 30 x 40 mm (Orbitazuschnitt)	ZX 4
0,25 x 40 x 50 mm (rechteckig)	ZX 5
0,50 x 40 x 50 mm (rechteckig)	ZX 6
0,15 x 40 x 30 mm (Orbitazuschnitt gelocht)	ZX 7
0,15 x 50 x 40 mm (rechteckig gelocht)	ZX 8

1 Stück steril Folienpackung Packung mit 3 Folien

VICRYL Membrane

Parodontalzuschnitte

Polyglactin 910, ungefärbt, vorgelegte

VICRYL-Haltefäden, gewebt

Best.-Nr.

5 mm Bukkal-/Lingual-Membran	VPM 2940
8 mm Bukkal-/Lingual-Membran	VPM 2942
3 mm Interproximal-Membran	VPM 2944
5 mm Interproximal-Membran	VPM 2945
7 mm Rund-Membran	VPM 2946
29 x 32mm Molaren-Membran	VPM 2947
Ohne vorgelegte VICRYL-Haltefäden	
1 x 2,0 cm Membran rechteckig	VPM 2950
3 x 3,5 cm Membran oval	VPM 2952

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 1 Folie

Implantate – teilweise resorbierbar

VYPRO Netz

VICRYL-PROLENE-Composite
ungefärbt

Best.-Nr.

30 x 30 cm	PVM	L1
15 x 15 cm	PVM	M1
15 x 10 cm	PVM	N1
1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 1 Folie		

VYPRO II Netz

VICRYL-PROLENE-Composite
ungefärbt in Planlage

Best.-Nr.

15 x 17 cm	PVM	2L3
15 x 15 cm	PVM	2M3
15 x 10 cm	PVM	2N3
12 x 10 cm	PVM	2P3
6 x 11 cm	PVM	2S3

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

VYPRO visor Netz

VICRYL-PROLENE-Composite,
mit violetten Netzmarkierungen

Best.-Nr.

15x10 cm	PVM2	VN3
----------	------	-----

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 3 Folien

ULTRAPRO Netz

MONOCRYL-PROLENE-Composite ungefärbt
mit blauen Streifen

Pack.-Inh.

Best.-Nr.

30 x 30 cm	1	UML	1
15 x 30 cm	1	UMT	1
15 x 15 cm	3	UMM	3
10 x 15 cm	3	UMN	3
10 x 12 cm	3	UMP	3
6 x 11 cm	3	UMS	3

1 Stück steril in Folienpackung

ULTRAPRO HERNIA SYSTEM

MONOCRYL-PROLENE-Composite ungefärbt

Pack.-Inh.

Best.-Nr.

oberer Patch: 12 x 6 cm unterer Patch: Ø 10 cm	1	UHSL	1
oberer Patch: 12 x 6 cm unterer Patch: Ø 10 cm	3	UHSL	
oberer Patch: 12 x 6 cm unterer Patch: Ø 7,5 cm	1	UHSM	1
oberer Patch: 12 x 6 cm unterer Patch: Ø 7,5 cm	3	UHSM	
oberer Patch: 12 x 5 cm unterer Patch: 12 x 10 cm	1	UHSOV	1
oberer Patch: 12 x 5 cm unterer Patch: 12 x 10 cm	3	UHSOV	

ULTRAPRO Plug

MONOCRYL-PROLENE-Composite Plug ungefärbt
mit Onlay Patch

Pack.-Inh.

Best.-Nr.

Klein:

Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 3 cm Ø Anker	1	UPPS	1
Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 3 cm Ø Anker	6	UPPS	6

Mittel:

Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 4 cm Ø Anker	1	UPPM	1
Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 4 cm Ø Anker	6	UPPM	6

Groß:

Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 5 cm Ø Anker	1	UPPL	1
Onlay Patch = 12 x 7,5 cm Plug = 5 cm obere Randzone, 5 cm Ø Anker	6	UPPL	6

PROCEED Netz

PROLENE - PDS -ORZ (oxidierte
regenerierte Zellulose) Composite
ungefärbt mit blauen Streifen

Best.-Nr.

25 x 35,5 cm rechteckig	PCD	W1
20 x 30 cm rechteckig	PCD	J1
20 x 25 cm oval	PCD	H1
15 x 20 cm oval	PCD	G1
15 x 15 cm quadratisch	PCD	M1

1 Stück steril in Folienpackung
Packung mit 1 Folie

Implantate – nicht resorbierbar

PROLENE Netz		MERSILENE NETZE	
Polypropylen, ungefärbt	Best.-Nr.	Polyster, ungefärbt	Best.-Nr.
6 x 11 cm	PMS 3	15 x 30 cm	RM 3015
12 x 10 cm	PMP 3	30 x 30 cm	RM 3030
15 x 10 cm	PMN 3	1 Stück steril in Folienpackung	
15 x 15 cm	PMM 3	Packung mit 3 Folien	
Planage		Nahtwiderlager	
1 Stück steril in Folienpackung		TFE Polymer Pledgets	Best.-Nr.
Packung mit 3 Folien		2 x 4 cm, weich	EH 370 G
30 x 30 cm	PML 1	1 Stück steril Folienpackung	
1 Stück steril in Folienpackung		Packung mit 12 Folien	
Packung mit 1 Folie		5 x 8 mm, weich	X 619 G
Zuschnitt, 6,1 x 13,7 cm groß	PMLK3	2 Stück steril in Folienpackung	
Zuschnitt, 4,6 x 10,2 cm klein	PMSK3	Packung mit 12 Folien	
Planage		3 x 6 mm, weich	X 620 G
1 Stück steril in Folienpackung		2 Stück steril in Folienpackung	
Packung mit 3 Folien		Packung mit 12 Folien	
PROLENE Netz ENDOROLL		3 x 6 mm	X 273 H
für die laparoskopische Hernienreparation		5 Stück steril in Folienpackung	
Polypropylen, ungefärbt	Best.-Nr.	Packung mit 36 Folien	
15 x 12 cm	PMT 15	3 x 6 mm	X 626 H
Planage		2 Stück steril in Folienpackung	
1 Stück steril in Blisterpack mit Aufrollvorrichtung		Packung mit 36 Folien	
Packung mit 1 Blister			
PROLENE HERNIA SYSTEM			
Polypropylen, ungefärbt	Best.-Nr.		
erweiterte Länge	PHSE1		
groß	PHSL1		
mittlere Größe	PHSM1		
1 Stück steril in Folienpackung			
Packung mit 1 Folie			
erweiterte Länge	PHS E		
groß	PHS L		
mittlere Größe	PHS M		
1 Stück steril Folienpackung			
Packung mit 3 Folien			
PROLENE 3D Patch			
Polypropylen ungefärbt	Best.-Nr.		
5,5 x 12,5 cm (Oberer Patch)/	3 DPM		
3,5 x 1,9 cm (Unterer Patch)			
5,5 x 12,5 cm (Oberer Patch)/	3 DPL		
4,8 x 2,3 cm (Unterer Patch)			
5,5 x 12,5 cm (Oberer Patch)/	P3 DPM		
3,5 x 1,9 cm (Unterer Patch)			
Vorgeschnitten			
5,5 x 12,5 cm (Oberer Patch)/	P3 DPL		
4,8 x 2,3 cm (Unterer Patch)			
Vorgeschnitten			
1 Stück steril Folienpackung			
Packung mit 3 Folien			

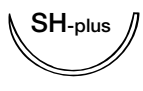
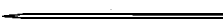
Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

Endoloop Ligaturschlinge in Langpackung mit Kunststoffknotenschieber

			VICRYL violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	0,90	12	MIC 511 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,90	12	MIC 108 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	0,90	12	MIC 109 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	0	3,5	0,90	12	MIC 110 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	1	4	0,90	12	MIC 111 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar, große Schlinge	0	3,5	1,50	12	MIC 112 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar, große Schlinge	1	4	1,50	12	MIC 113 G
			PROLENE blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	0,90	12	EH 464 G

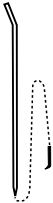
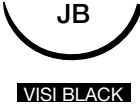
Ethi-Endo-Naht Nadel Faden Kombination in Langpackung für die extrakorporale Knotung mit Kunststoffknotenschieber

		26,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,20	12	MIC 136 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 134 G
		26,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 131 G
		26,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 130 G
		19,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 133 G
		30,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,00	12	MIC 171 G
			PDS II violett monofil, resorbierbar	1	4	1,00	12	MIC 170 G
		17,0	PROLENE blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	1,00	36	MIC 202 H

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

Ethi-Endo-Naht Nadel Faden Kombination in Langpackung für die extrakorporale Knotung mit Kunststoffknotenschieber

		26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,00	12	MIC 260 G
		22,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,00	12	EX 10 CG

Endo-Suture-System wiederverwendbares Metallinstrument für die extrakorporale Schlingen- und Knotentechnik, unsteril

			Endo Applikator Endo-Suture-System				1	ESS 15

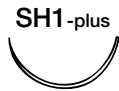
Endo-Suture-System Schlinge für die endoskopische Schlingenligatur

			VICRYL Endo-Suture-System Schlinge	0	3,5	0,40	12	EJ 11
			VICRYL Endo-Suture-System große Schlinge	0	3,5	0,60	12	EJ 12
			PDS II violett Endo-Suture-System Schlinge	0	3,5	0,40	12	EZ 11
			PDS II violett Endo-Suture-System große Schlinge	0	3,5	0,60	12	EZ 12
			PROLENE Endo-Suture-System große Schlinge	2-0	3	0,60	12	ED 13

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

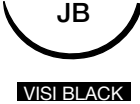
Endo-Suture-System Nadel-Fadenkombination für die extrakorporale Knotung

		22,0	VICRYL violett geflochten, resorbierbar	3-0	2	1,10	12	EB 15
		24,0	VICRYL violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EB 12
			VICRYL violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EB 11
			PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EA 12
	 VISI BLACK	26,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EA 62 G
		24,0	PROLENE blau monofil, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	ED 12
		26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EC 50
	 VISI BLACK	26,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 52
		24,0	ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,10	12	EC 12
			ETHIBOND EXCEL , grün geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,10	12	EC 11

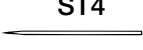
Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

Extrakorporale Naht

		22,0	VICRYL , geflochten, resorbierbar	3-0	2	1,20	36	MIC 565 H
		19,0	VICRYL , geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,20	36	MIC 572 H
		26,0	VICRYL , geflochten, resorbierbar	3-0	2	1,20	36	MIC 586 H
		19,0	PDS II violett, monofil resorbierbar	3-0	2	1,20	36	Z 120 H
		26,0	ETHIBOND EXCEL , grün, geflochten, nicht resorbierbar	2-0	3	1,20	36	MIC 253 H
		26,0	ETHIBOND EXCEL , grün, geflochten, nicht resorbierbar	0	3,5	1,20	36	X 1059 H

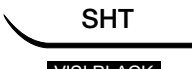
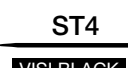
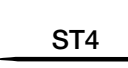
Schlingennähte für die intrakorporale, fortlaufende Naht

		26,0	VICRYL violett geflochten als Schlingennaht	3-0	2	0,40	36	MIC 540 H
			PDS II violett, monofil, resorbierbar als Schlingennaht	3-0	2	0,40	36	MIC 140 H
		19,0	PDS II violett, monofil, resorbierbar als Schlingennaht	4-0	1,5	0,40	36	MIC 144 H

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

Intrakorporale Naht

	26,0	MONOCRYL violett monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 105 H
 VISI BLACK	17,0	VICRYL violett, geflochten, Ethi-Endo-Mikro-Naht, resorbierbar	4-0	1,5	0,20	36	MIC 101 H
 VISI BLACK	22,0	VICRYL violett, geflochten, Ethi-Endo-Mikro-Naht, re- sorbierbar	4-0	1,5	0,20	36	MIC 563 H
 VISI BLACK	26,0	VICRYL violett, geflochten, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 582 H
 VISI BLACK	26,0	VICRYL violett, geflochten, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 552 H
		VICRYL violett, geflochten, resorbierbar	2-0	3	0,20	36	MIC 551 H
 VISI BLACK	19,0	VICRYL violett, geflochten, Ethi-Endo-Mikro-Naht, resorbierbar	4-0	1,5	0,20	36	MIC 103 H
		VICRYL violett, geflochten, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 573 H
 VISI BLACK	22,0	PDS II violett, monofil, Ethi-Endo-Mikro-Naht, resorbierbar	4-0	1,5	0,20	36	MIC 163 H
 VISI BLACK	26,0	PDS II violett, monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 161 H
 VISI BLACK	26,0	PDS II violett, monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 182 H
 VISI BLACK	19,0	PDS II violett, monofil, Ethi-Endo-Mikro-Naht, resorbierbar	4-0	1,5	0,20	36	MIC 102 H
		PDS II violett, monofil, resorbierbar	3-0	2	0,20	36	MIC 173 H

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogenlänge (mm)	Faden	Fadenstärke		Fadenlänge (m)	Fadenanzahl/Packung	Bestellnummer
				USP	metric			

LAPRA TY II Applikationszange

			LAPRA TY II Applikationszange				1	MIC 4030

LAPRA TY II Fadenfixierclip

			2 Clips steril im Magazin				6	MIC 4032
			4 Clips steril im Magazin				6	MIC 4034
			6 Clips steril im Magazin				6	MIC 4036

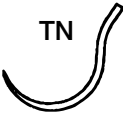
Empfohlen für Vicryl und Vicryl Plus in den Fadenstärken USP 2-0 bis 4-0

Ethi-Endo-Clip-Naht nach Lahodny

	17,0	Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,07	24	MIC 54 E
		Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,10	24	MIC 55 E
	19,0	Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,07	24	MIC 52 E
		Clipnaht mit 2 ABSOLOK PLUS Clips, Größe mittel	3-0	2	0,10	24	MIC 51 E

(kompatibel mit Clippanzelgezange AP2010S, Stärke: mittel)

Trokarinzisionsnaht

	26,0	VICRYL violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,10	36	MIC 514 H
		VICRYL violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	1,10	36	MIC 515 H
		VICRYL Plus , violett geflochten, resorbierbar	2-0	3	1,10	36	MIC 507 H
		VICRYL Plus , violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	1,10	36	MIC 509 H
	31,0	VICRYL violett geflochten, resorbierbar	0	3,5	0,45	36	MIC 518 H
	26,0	PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,10	36	MIC 114 H
		PDS II violett monofil, resorbierbar	0	3,5	1,10	36	MIC 115 H

Lieferprogramm MIC sortiert nach Nahtmaterial

	Nadeltyp	Bogen- länge (mm)	Faden	Fadenstärke		Faden- länge (m)	Faden- anzahl/ Packung	Bestell- nummer
				USP	metric			

Sutupak extrakorporale Ligaturen

			VICRYL violett geflochten, resorbierbar	1	4	1,40	36	V 617 H
			PDS II violett monofil, resorbierbar	2-0	3	1,20	36	Z 512 H

Folgende Nadeltypen sind durch 5-mm-Trokare einführbar: BB, C1, SHT, JBT, ST4, ST3, PSG

Folgende Nadeltypen sind durch 10-mm-Trokare einführbar: SH-plus, JB, SH1-plus, JB1, TN, J, EN3

SONSTIGES

TIEFENUNTERBINDER-INSTRUMENT

Best.-Nr.

für Schlingen	1 Stück unsteril verpackt, wiederverwendbar Packung mit 1 Stück	EH 360
---------------	--	--------

VICRYL RAPID-SCHLINGEN ungefärbt

Best.-Nr.

für Tiefenunterbinder-Instrument	metric 3,5 (0)	VS 3530 E
	metric 4,0 (1)	VS 3540 E
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 24 Folien	

VICRYL SCHLINGEN ungefärbt

Best.-Nr.

für Tiefenunterbinder-Instrument	metric 3,5 (0)	VS 353 E
	metric 4,0 (1)	VS 354 E
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 24 Folien	

SONSTIGES

CERVIX-LIGATUREN

nach McDONALD

Best.-Nr.

ETHIBOND EXCEL grün, geflochten	metric 8 (6), 75 cm lang		
	mit ATRALOC Nadel BPT1	RS	71 G
	mit ATRALOC Nadel BPT2	RS	72 G
	1 Stück steril in Folienpackung; Packung mit 12 Folien		

nach SHIRODKAR

Best.-Nr.

MERSILENE Band weiß, flach gewebt	5 mm breit, 30 cm lang 1 Stück steril in Folienpackung; Packung mit 12 Folien	RS	5MG
MERSILENE Band weiß, flach gewebt	5 mm breit, 40 cm lang		
	mit ATRALOC Nadel BP1 + BP1	RS	21 G
	mit ATRALOC Nadel BP2 + BP2	RS	22 G
	mit ATRALOC Nadel BP3 + BP3	RS	23 G
	1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 12 Folien		
	0,9 mm Ø breit, 40 cm lang		
	mit ATRALOC Nadel BP2 + BP2	RS	62 G
	mit ATRALOC Nadel BP3 + BP3	RS	63 G
	1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 12 Folien		

PRINEO

Best.-Nr.

Wundverschluss System zum Hautverschluss von langen Inzisionen	60 cm selbstklebender Netzstreifen 3,8 ml 2-Octyl Cyanoacrylat je 1 Stück steril in Blisterpackung Packung mit 2 Blistern	CLR	602
---	--	-----	-----

PROXI-STRIP

Best.-Nr.

selbstklebende Hautverschlusstreifen aus Polyamid	3 x 80 mm 5 Strips steril in Folienpackung	100 K
	6 x 80 mm 3 Strips steril in Folienpackung	101 K
	6 x 38 mm 6 Strips steril in Folienpackung	102 K
	6 x 100 mm 10 Strips steril in Folienpackung	103 K
	12 x 100 mm 6 Strips steril in Folienpackung, Packung mit 50 Folien	104 K
	25 x 127 mm 4 Strips in Folienpackung Packung mit 25 Folien	105 K

DERMABOND MINI

Best.-Nr.

Topischer Hautkleber, (2-Octyl Cyanoacrylat), High Viscosity	12 Ampullen, je 0,36 ml	AHVM12
---	-------------------------	--------

DERMABOND

Best.-Nr.

Topischer Hautkleber, (2-Octyl Cyanoacrylat), High Viscosity	6 Ampullen, je 0,5 ml	AHV 6
	12 Ampullen, je 0,5 ml	AHV12

DERMABOND PROPEN

Best.-Nr.

Topischer Hautkleber, (2-Octyl Cyanoacrylat), High Viscosity	6 Ampullen, je 0,5 ml, mit beiliegender Präzisionsspitze	APP 6
	6 Ampullen, je 0,75 ml, mit beiliegender Präzisionsspitze	APPXL6
	1 Stück steril in Folienpackung	

SONSTIGES

Zubehör für Intracutanah

Best.-Nr.

Fixierclips aus Polypropylen	2 Fixierclips steril in Folienpackung	EH	379 G
------------------------------	---------------------------------------	----	-------

ETHIKEIL

Best.-Nr.

Keilförmiger Saugtupfer für Ophthalmologie Mikrochirurgie, ZMK-Chirurgie, weiß	15 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 24 Folien	EH	390 E
---	--	----	-------

ETHIZIP

Best.-Nr.

Polyestergewebe für den temporären Wundverschluß nach Teichmann	50 cm lang, 13 cm breit	EH	375
	50 cm lang, 43 cm breit	EH	365
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 3 Folien		

Ersatzgleiter für ETHIZIP

Best.-Nr.

1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 12 Folien	EH	376 G
---	----	-------

TRANSOSSÄRER DURCHZIEHER

Best.-Nr.

VA Draht mit Öse, verdreht	Durchzieher à 230 mm Länge 2 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 12 Folien Langpackung	EH	398 G
----------------------------	---	----	-------

TROCHANTER-NAHT

Best.-Nr.

ETHIBOND Polyester weiß, geflochten	1,0 mm, 150 cm lang 1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 24 Folien	EH	381 E
-------------------------------------	---	----	-------

ETHILOOP Retraktionsschlauch aus Silikon

Best.-Nr.

1,3 mm, Länge 45 cm, weiß	EH	382 E
1,3 mm, Länge 45 cm, rot	EH	383 E
1,3 mm, Länge 45 cm, blau	EH	384 E
1,3 mm, Länge 45 cm, gelb	EH	385 E
2 Schläuche steril in Folienpackung, Packung mit 24 Folien"		
2,0 mm, Länge 45 cm, weiß	EH	386
2,0 mm, Länge 45 cm, rot	EH	387
2,0 mm, Länge 45 cm, blau	EH	388
2,0 mm, Länge 45 cm, gelb	EH	389
2,0 mm, Länge 45 cm, blau + rot	X	1192
2,0 mm, Länge 75 cm, blau	X	265
2 Schläuche steril in Folienpackung, Packung mit 6 Folien		

ETHILOOP Retraktionsschlauch, weiß

Best.-Nr.

mit ATRALOC Nadel BPS-4	1,1 mm, Länge 45 cm 2 Schläuche steril in Folienpackung, Packung mit 24 Folien	EH	7700 E
-------------------------	--	----	--------

SONSTIGES

ETHITOUCH

		Best.-Nr.
Polyestergewebe für den temporären Wundverschluß	148 x 105 mm	EH 465
	210 x 148 mm	EH 466
	210 x 297 mm	EH 467
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 3 Folien	

STERNUMBAND

		Best.-Nr.
aus nichtrostendem Edelstahl (AISI613L)	Sternumband, 12 Stück unsteril verpackt	EH 395
	Spanner für Sternumband, 1 Stück unsteril verpackt	X 114

Haltebänder

	Packungsinhalt	Best.-Nr.
MERSILENE Polyester grün, flach gewebt	3 mm breit, 75 cm lang,	EH 399 E
	4 mm breit, 75 cm lang	EH 396 E
	7 mm breit, 90 cm lang	EH 397 G
	1 Stück steril in Folienpackung	

Schrittmacher Elektroden

Temporäre Schrittmacher Elektroden		Best.-Nr.
metric 2 (3-0), 60 cm lang mit blauer Isolierung, 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau	ATRALOC Nadel SH plus+KS	TSE11
	ATRALOC Nadel SH plus+LSS	TSE12
	2 Stück steril in Folienpackung,	
	Packung mit 6 Folien	

Monopolare Schrittmacher Elektroden

		Best.-Nr.
metric 2 (3-0), 60 cm lang, mit blauer Isolierung, Abbrechnadel	ATRALOC Nadel SH+KSS	MPW 10 E
	ATRALOC Nadel SH1+KSS	MPW 11 E
	ATRALOC Nadel KSS	MPW 14 E
	2 Stück steril in Folienpackung Packung mit 24 Folien	
metric 2 (3-0), 60 cm lang mit transparenter Isolierung, Abrechnadel	ATRALOC Nadel C1+STK	MPW 16 E
	1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 24 Folien	

Bipolare Schrittmacher Elektroden

		Best.-Nr.
metric 2 (3-0), 60 cm lang, mit blauer Isolierung, 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau, 1 Z-Clip	ATRALOC Nadel SH+SH + KS	BPW11
metric 2 (3-0), 60 cm lang, mit blauer Isolierung, 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau, 1 Z-Clip	ATRALOC Nadel RB1 plus+RB1 plus + KS	BPW13
metric 2 (3-0), 60 cm lang, mit transparenter Isolierung 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau, 1 Z-Clip	ATRALOC Nadel SH plus+SH plus+KS	BPW51
	1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 6 Folien	
metric 2 (3-0), 200 cm lang mit blauer Isolierung, 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau, 1 Z-Clip	ATRALOC Nadel SH plus+SH plus+KS	BPW211
	ATRALOC Nadel SH +SH +LSS	BPW212
metric 2 (3-0), 200 cm lang mit transparenter Isolierung, 2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau, 1 Z-Clip	ATRALOC Nadel SH plus+SH plus+KS	BPW251
	1 Stück steril in Folienpackung Packung mit 6 Folien	

Zubehör für Schrittmacher Elektroden

		Best.-Nr.
für Schrittmacher Elektroden TSE, BPW	2 Adapterstecker, 1 rot, 1 blau 2 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 6 Folien	BPW 1

SONSTIGES

KNOCHENWACHS

Best.-Nr.

2,5 g

W 30 E

1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 24 Folien

ETHIBLOC

Best.-Nr.

Okklusions-Emulsion
zur präoperativen Gefäßembolisation

Einmalspritze mit 7,5 ml
1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 1 Folie

EH 1980

PARAFFINIUM PERLIQUIDUM

Best.-Nr.

Ampulle mit 2,5 ml Inhalt

EH 1252 G

Ampulle mit 10 ml Inhalt

EH 1253 G

1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 12 Folien

FOLIENZUBEHÖR

Best.-Nr.

ATRALOC-Folien-Kabinett-Grundeinheit mit 8 Fächern

R 8

ATRALOC-Aufbau-Folien-Kabinett für R 8, mit 8 Fächern

R 9

Nadelbox mit Griff, aus Kunststoff mit 16 transparenten Einsätzen

EH16

Stahlmagazin mit 24 transparenten Schubfächern

EH24

Wandkonsole für R 8

EH74

Fahrbarer Ständer für R 8 und R 9

EH75

Fahrbarer Ständer für R 8 und R 9 mit Unterfach
für Langpackungen

EH76

Folien-Magazin mit 2x5 Fächern, Bonner Kasten

EH81

Folien-Magazin mit 6 Fächern

EH82

Folien-Magazin mit 2x5 Fächern und Halteleiste
mit Klemmfeder (Witzenhäuser Modell)

EH83

1 Stück unsteril verpackt

BLAKE SILIKON DRAINAGEN

Best.-Nr.

flach, voll-kanneliert

7 mm

2211

7 mm, mit 4,8 mm Trokar

2212

10 mm

2214

10 mm, mit 4,8 mm Trokar

2215

1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 10 Folien

rund, voll-kanneliert,
mit Röntgenkontraststreifen

10 FR

2226

10 FR, mit 3,2 mm Trokar

2227

15 FR

2228

15 FR, mit 4,8 mm Trokar

2229

19 FR

2230

19 FR, mit 6,4 mm Trokar

2231

19 FR, mit 6,4 mm krümmbarer Trokar

2232

15 FR, mit 4,8 mm krümmbarer Trokar

2233

24 FR

2234

1 Stück steril in Folienpackung,
Packung mit 10 Folien

SONSTIGES

J-VAC SAUGRESERVOIR für BLAKE SILIKON-DRAINAGEN

MIT Anti-Rückflussventil	100 ml (Birnenform)	Best.-Nr.	2160
	150 ml		2161
	300 ml		2163
	450 ml		2162
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 10 Folien		

BLAKE KONNEKTOREN für BLAKE SILIKON-DRAINAGEN

Konnektoren für Herz- und Thoraxchirurgie	1:1, 10-13 x 5 mm	Best.-Nr.	BCC 1
	2:1, 10-13 x 5 x 5 mm		BCC 2
	3:1, 10-13 x 5 x 5 x 5 mm		BCC 3
	1 Stück steril in Folienpackung, Packung mit 20 Folien		

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ETHICON GmbH

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zu. Unsere Verkaufsbedingungen gelten insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt. Abweichungen, Nebenabreden und mündliche Vereinbarungen sowie Vereinbarungen mit Reisenden, Vertretern und Beauftragten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

II. Vertragsabschluss - Unterlagen

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Ausführung unserer vertraglich geschuldeten Leistung zustande. Unser Lieferschein gilt gleichzeitig als Auftragsbestätigung.
3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten.

III. Preise - Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise verstehen sich – sofern nicht anders vereinbart – „ab Werk“ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der Rechnungsstellung.
2. Der Kaufpreis netto (ohne Abzug) ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt gewähren wir 2 % Skonto vom Rechnungsbetrag. Bestellern, die sich unserem Bankeinzugsverfahren anschließen, werden 3 % Skonto eingeräumt. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferzeit

1. Liefertermine sind – sofern nicht anders vereinbart – unverbindlich.
2. Die Lieferfrist beginnt mit dem Bestelleingangsdatum, jedoch nicht vor Klärung aller für die Durchführung der Bestellung erforderlicher Fragen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
3. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände – z. B. Arbeitskampfmaßnahmen, Betriebsstörungen, Störungen der Energieversorgung und der Belieferung mit Rohstoffen und Materialien, Transportstörungen, behördliche Maßnahmen – verlängern sich Lieferfristen in angemessenem Umfang, wenn wir an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung verhindert sind. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Sofern die Lieferverzögerung länger als vier Wochen dauert, ist der Besteller berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils, vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung aus den oben genannten Umständen frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller unverzüglich benachrichtigt haben.
4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

V. Gefahrenübergang - Verpackungskosten

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Wir übernehmen auf unsere Kosten die Verpackung. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten.
3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

VI. Rechte wegen Mängeln - Rücknahme

1. Auf öffentliche Äußerungen durch uns oder – soweit wir nicht Hersteller sind – den Hersteller oder dessen Gehilfen kann sich der Besteller nicht berufen, wenn und soweit er nicht nachweisen kann, dass die Aussagen seine Kaufentscheidung beeinflusst haben, wenn wir die Äußerung nicht kannten und nicht kennen mussten oder die Aussage im Zeitpunkt der Kaufentscheidung bereits berichtigt war.
2. Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Besteller die rechtzeitige Anzeige, gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung der Ware. Im kaufmännischen Verkehr hat der Besteller die Ware unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen nach Empfang zu untersuchen und uns etwaige Beanstandungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Besteller die Anzeige, so gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung. Die Gewährleistung für verdeckte Mängel, die trotz sorgfältiger Unter-

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ETHICON GmbH

suchung innerhalb der Frist von drei Tagen nicht zu erkennen waren, ist ausgeschlossen, wenn der Besteller diese nicht unverzüglich nach Entdeckung schriftlich rügt.

3. Bei begründeter, rechtzeitig und ordnungsgemäß erhobener Rüge, sind wir unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Bestellers zunächst nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Schadens – und Aufwendungsersatzansprüche wegen eines Mangels bleiben hiervon unberührt, soweit sie nicht nach Ziffer VII. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen beschränkt oder ausgeschlossen sind.
4. Die Übernahme einer Garantie setzt eine entsprechende ausdrückliche Vereinbarung voraus. Genaue Beschreibungen des Kaufgegenstandes und seines Verwendungszweckes stellen allein noch keine Garantie dar.
5. Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb von einem Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Haftung für Vorsatz bleibt unberührt.
6. Die Rechte des Bestellers aus §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.
7. Waren aus ordnungsgemäß vorgenommenen Lieferungen werden nur nach unserer Zustimmung binnen 90 Tagen ab Rechnungsdatum zurückgenommen. Rückgaben werden auf der Grundlage des Rechnungspreises mit einem Abschlag gutgeschrieben.

VII. Haftung

1. Schadenersatz statt der Leistung gemäß § 281 BGB oder Aufwendungsersatz gemäß § 284 BGB kann der Besteller erst geltend machen, nachdem er uns zuvor eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung mit der Erklärung gesetzt hat, dass er nach Ablauf der Frist die Leistung bzw. Nacherfüllung ablehne und die Leistung bzw. Nacherfüllung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfolgt ist; § 281 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.
2. Die gesetzliche Haftung für Schäden wegen einer garantierten Beschaffenheit der Leistungen, wird vorbehaltlich der vorstehenden Ziffer VII.1 durch diesen Vertrag nicht eingeschränkt. Im Übrigen haften wir ausschließlich nach Maßgabe der nachstehenden Ziffern VII.3 bis VII.7.
3. Wir haften vorbehaltlich der nachstehenden Ziffer VII.4 unbeschränkt nur in folgenden Fällen:
 - a) für Vorsatz unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen;
 - b) für grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten;
 - c) für schuldhafte Pflichtverletzungen unserer ge-

setzlichen Vertreter und leitenden Angestellten, die zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führen.

Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haften wir in den vorgenannten Fällen gemäß lit. b) und c) nur in Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens.

4. Für leichte Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen haften wir nur gemäß vorstehender Ziffer VII.3 oder wenn eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf die Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens begrenzt.
5. Die Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen gemäß vorstehender Ziffern VII.2 bis VII.4 gelten auch für die außervertragliche Haftung und auch zugunsten unserer Mitarbeiter, Subunternehmer, Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
6. Für Aufwendungsersatzansprüche gelten die vorgenannten Haftungsbeschränkungen entsprechend.
7. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

VIII. Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zur Eigentumsübertragung pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern und den Abschluss derartiger Versicherungen nachzuweisen. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten durchführen.
3. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura- Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ETHICON GmbH

Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
6. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns jedoch zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zur Zeit der Verarbeitung oder Vermengung/Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, untrennbar vermengt oder vermischt und ist diese Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt uns der Besteller anteilig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

IX. Wiederaufbereitung oder Mehreinfacheinsatz von Einmalprodukten

1. Die als Einmalprodukte gekennzeichneten Produkte von uns eignen sich nicht für die Wiederaufbereitung und den Mehrfacheinsatz in der Klinik. Wir haften daher nicht für solche Mängel, die aufgrund der Wiederaufbereitung und/oder des Mehrfacheinsatzes unserer Einmalprodukte entstehen. Dies gilt insbesondere für etwaige Funktionsbeeinträchtigungen der Einmalprodukte durch die Wiederaufbereitung und den Mehrfacheinsatz.
2. Hat der Besteller als Einmalprodukte gekennzeichnete Produkte selbst oder durch Dritte wiederaufbereitet - insbesondere resterilisiert - und/oder hat der Besteller Einmalprodukte mehrfach in der Klinik eingesetzt und machen Dritte Ansprüche gegen uns, insbesondere Produkthaftungsansprüche, geltend, die ihre Ursache darin haben, dass das Einmalprodukt durch den Besteller wieder aufbereitet und/oder mehrfach benutzt wurde, so stellt der Besteller uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen möglichen Ansprüchen Dritter, insbesondere möglichen Produkthaftungsansprüchen frei und

erstattet uns die Kosten der Rechtsverteidigung.

3. Die Haftung von uns nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

X. Sonstiges

1. Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Beratungen und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich unter Ausschluss jeglicher Haftung.
2. Im Falle einer Änderung der von uns bezogenen Produkte, insbesondere in Bezug auf ihre Kennzeichnung und/oder ihre Steril- und Lagerverpackung durch den Besteller oder sonstige Dritte, übernehmen wir keine Haftung.
3. Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass die Lagerräumlichkeiten für unsere Produkte sauber sind und die Lagertemperaturen, soweit keine besonderen Lagerbedingungen vorgegeben sind, nicht dauerhaft unter 10o C bzw. über 30o C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit nicht 90 % überschreitet.
4. Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen und deshalb ein System einzurichten und aufrechtzuerhalten, das aufgrund von Aufzeichnungen des Bestellers in Bezug auf Code-Nr., Menge, Lieferdatum und Chargen-Nr. eine unverzügliche Feststellung der Empfänger eines Produktes gewährleistet, um Rückrufe von Produkten nach unserer Anweisung oder der zuständigen Behörden durchführen zu können.
5. Wir verpflichten uns, alle von uns nach dem 13. August 2005 in den Verkehr gebrachten Produkte, die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz fallen, zurückzunehmen und einer geeigneten Entsorgung oder Verwertung zuzuführen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind implantierte und infektiöse Produkte. Der Besteller verpflichtet sich, uns über die Entsorgung der betroffenen Altgeräte zu informieren. Die Abholung, Verwertung und / oder Entsorgung wird von uns oder einem von uns beauftragten Dritten durchgeführt. Der Besteller ist für eine ordnungs- und sachgerechte Dekontamination der Altgeräte, entsprechend den Angaben des Herstellers, verantwortlich.

XI. Gerichtsstand - Erfüllungsort - Datenschutz

1. Sofern der Besteller Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist unser Geschäfts-sitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohn- bzw. Geschäfts-sitzgericht zu verklagen.
2. Soweit nicht anders vereinbart, ist unser Geschäfts-sitz Erfüllungsort.
3. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das zwischen Inländern anwendbare Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen.
4. Persönliche Daten des Bestellers werden von uns und/oder mit uns verbundenen Unternehmen insoweit gespeichert, als dies für die Abwicklung der Geschäftsbeziehungen erforderlich ist.

Schutzmarken

ATRALOC
BLAKE
DERMABOND
ENDOLOOP
ENDOROLL
E-PACK
ETHALLOY
ETHIBINDER
ETHIBLOC
ETHIBOND
ETHICON
ETHI-ENDO-NAHT
ETHIGUARD
ETHIKEIL
ETHILOCK
ETHILON
ETHILOOP
ETHIPIN
ETHI-SET
ETHISORB
ETHITOUCH
ETHIZIP
LAPRA-TY
LIGAPAK
MERSILENE
MONOCRYL
MULTIPASS
NUROLON
PDS
PERMA-HAND
PRIME
PRINEO
PROCEED
PROLENE
PROXI-STRIP
SUTUPAK
ULTRAPRO
VICRYL
VISI-BLACK
VYPRO

Wir informieren
Sie gerne über
innovative, elektronische
Geschäftsprozesse.

Rufen Sie uns an,
oder informieren Sie sich
im Internet über
www.ghxeurope.com

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.ethicon.de

ETHICON GmbH
Geschäftsbereich
ETHICON Products
Robert-Koch-Straße 1
D-22851 Norderstedt
Telefon 0180 - 1000829 0,039€/Min.
Fax 0800 - 10 16 138 kostenfrei

JOHNSON & JOHNSON Medical Products
Gunoldstrasse 16
A-1190 Wien
Telefon 01 - 360 25-0
Fax 01 - 36 02 55 02

JOHNSON & JOHNSON Medical
Rotzenbühlstrasse 55
CH-8957 Spreitenbach
Telefon 056 - 417 33 33
Fax 056 - 417 35 24

 gedruckt auf recyceltem Umweltpapier

ETHICON®
a Johnson & Johnson company

